

Hướng dẫn an toàn

1. Đảm bảo rút kết nối sạc khi vệ sinh bảo trì và trong quá trình sản phẩm đang hoạt động
2. Trong trường hợp bất thường (sản phẩm có mùi khét), người sử dụng nên tắt cho thiết bị dừng hoạt động
3. Không kéo, chạm vào bộ sạc khi tay đang ướt.
4. Không sử dụng trong phòng tắm hoặc trong môi trường ẩm ướt khác
5. Không phun các loại dầu dễ bay hơi, chất phủ hoặc thuốc trừ sâu lên sản phẩm



Vệ sinh và bảo trì

1. Ngăn chặn nước và các chất lỏng ăn mòn khác xâm nhập vào thân máy có thể gây ra sự cố hoặc hư hỏng
2. Vui lòng vệ sinh, lau thiết bị bằng chất tẩy rửa trung tính và vải mềm. Không được phép sử dụng chất tẩy ăn mòn vệ sinh sản phẩm.
3. Không nên tự ý mở thân máy sản phẩm khi chưa được sự hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật.

**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: Số 235-237, Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bảo hành: 028 7106 5858. **Hotline:** 1800 6977

Hà Nội: Số 2, Ngõ 382, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. **Bảo hành:** 024 37 855 966



*Chuyên gia chăm sóc sức khỏe
số 1 đến từ Hàn Quốc*




www.buheung.vn

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY MASSAGE CẦM TAY
DẠNG SÚNG BUHEUNG MK-330**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY MASSAGE CẦM TAY DẠNG SÚNG BUHEUNG

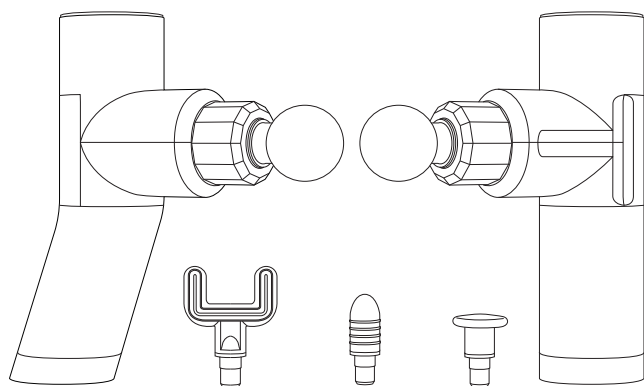


Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy massage cầm tay dạng súng
Điện áp định mức	7.4V , 1A
Công suất tối đa	≤ 24W
Trọng lượng	0,4 kg
Loại thiết bị	□

Cách sử dụng

Những thao tác chính của máy massage cầm tay dạng súng

1. Nhấn giữ nút nguồn để khởi động thiết bị. Sau khi nút nguồn được mở, đèn báo thiết bị sẽ được hiển thị màu xanh ở mức thứ nhất.
2. Nhấn nút  lần nữa, đèn báo thiết bị sẽ được hiển thị màu xanh ở mức thứ hai
3. Nhấn nút  lần nữa, đèn báo thiết bị sẽ hiển thị ở mức kế tiếp, và tiếp tục thay đổi ở mức tiếp theo sau mỗi lần nhấn.
4. Sản phẩm có 4 mức hiển thị. Nhấn  để chuyển về mức 1 khi ở đèn báo đang ở mức hiển thị thứ 4 và tiếp tục luân chuyển theo hình tròn
5. Nhấn giữ lâu nút nguồn để tắt thiết bị.

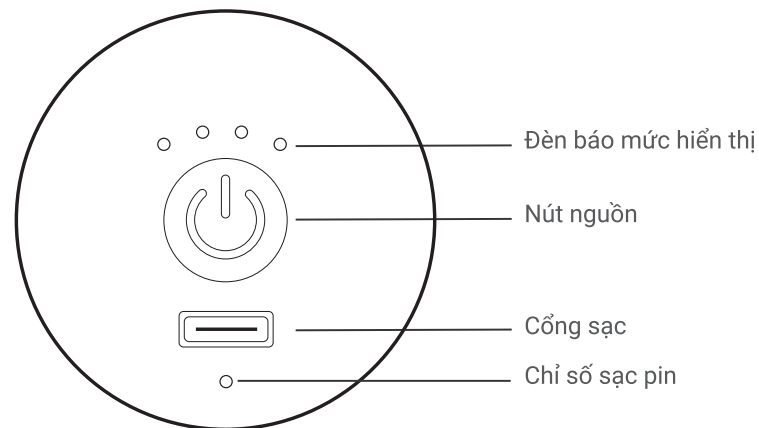


Cách sạc pin

Dòng sạc loại C được dùng trong sản phẩm này.

1. Kết nối giao diện USB của cáp sạc với bộ chuyển đổi điện áp 5V hoặc giao diện USB của máy tính.
2. Kết nối giao diện cáp sạc loại C với giao diện sạc của phần thân chính của máy
3. Khi sạc, đèn báo bộ sạc có màu đỏ và sau khi sạc đầy, đèn báo sẽ chuyển sang màu xanh lục.
4. Không sử dụng máy trong khi sạc

Cách thay đổi đầu massage

1. Rút đầu massage ban đầu ra

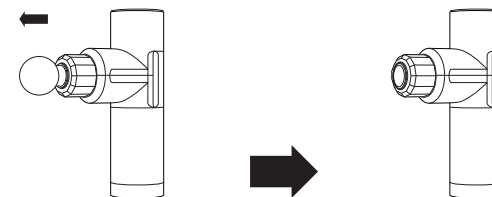

2. Đặt đầu massage bạn cần vào

