



GỖI MASSAGE BUHEUNG MK-320



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

THẬN TRỌNG AN TOÀN

Phòng ngừa an toàn

Đọc tất cả các cảnh báo cẩn thận trước khi sử dụng.

Các biện pháp phòng ngừa và cảnh báo được liệt kê dưới đây sẽ giúp đảm bảo hoạt động đúng của thiết bị này.

Các loại tai nạn do sử dụng không chính xác được phân loại thành CẢNH BÁO và THẬN TRỌNG. Đọc tất cả CẢNH BÁO và THẬN TRỌNG bên dưới và làm theo tất cả các hướng dẫn trong hướng dẫn này.

	CẢNH BÁO Hoạt động không đúng cách có thể gây thương tích cho người dùng.
	THẬN TRỌNG Hoạt động không đúng cách có thể gây thương tích cho người dùng hoặc làm hỏng sản phẩm
	Biểu tượng bị cấm chỉ ra rằng việc tháo gỡ không cho phép
	Biểu tượng biểu thị dây nguồn phải được rút ra sau khi sử dụng xong

Giám sát chặt chẽ là cần thiết khi sản phẩm này được sử dụng bởi, trên hoặc gần trẻ em, thương binh hoặc người khuyết tật.

 Bắt buộc	Bắt buộc - Chúng tôi khuyên những người có bất kỳ điều kiện nào sau đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. 1. Có máy tạo nhịp tim hoặc các thiết bị điện tử được cấy vào cơ thể 2. Những người đang được các bác sĩ điều trị, đặc biệt là những người cảm thấy không thoải mái 3. Có các vòng quay ác tính hoặc áp xe ác tính. 4. Phụ nữ đang mang thai hoặc có kinh nguyệt 5. Người bị loãng xương hoặc gãy cột sống. 6. Những người bị bong da hoặc những người có da bị thương. 7. Người đang sốt cao.
---	--

 Cấm	Giám sát chặt chẽ là cần thiết khi sản phẩm này được sử dụng bởi, trên hoặc gần trẻ em, thương binh hoặc người khuyết tật.
	Không cho phép trẻ em sử dụng hoặc chơi với sản phẩm này
	Đừng đứng trên sản phẩm bất cứ lúc nào.
	Cấm Không làm hỏng, uốn cong, kéo mạnh hoặc xoắn dây nguồn
	Không sử dụng sản phẩm này gần nhiệt hoặc ngọn lửa để tránh nguy cơ cháy
 Sửa chữa	Không tìm cách sửa chữa hoặc tháo dỡ thiết bị mà không được phép. Vui lòng liên hệ với đại lý ủy quyền hoặc đại lý dịch vụ.

XỬ LÝ SỰ CỐ

STT	DẤU HIỆU	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
1	Nghe âm thanh gõ nhẹ	Những âm thanh này là bình thường và nó được phát sinh ra do sự va chạm giữa các con lăn và vỏ bọc	Không cần thực hiện bất kỳ biện pháp gì.
2	Máy Massage không khởi động được	Công tắc đã tắt	Bật lại công tắc
		Mức pin yếu	Sạc pin
		Máy hết thời gian mặc định	Hẹn giờ mặc định
		Bộ chuyển đổi nguồn không được kết nối với nguồn điện	Kết nối bộ điều hợp nguồn với nguồn điện
3	Thiết bị quá nóng	Có thể đã được sử dụng trong một thời gian dài	Khởi động lại sau khi hạ nhiệt

* Nếu vẫn có vấn đề, vui lòng liên hệ với đại lý để bảo trì,

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm Gối Massage

Số model: MK-320

Điện áp định mức 12.6V

Công suất : 11W

CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG

Hướng dẫn chăm sóc

1. Làm sạch

- Hãy tránh xa nguồn điện và ngắt kết nối dây nguồn khỏi ổ cắm điện trước khi làm sạch-
- Để xử lý vết bẩn, thấm nước chất tẩy trung tính nhẹ - nhúng vải mềm, sau đó lau khô bằng vải khác.
- Không bao giờ rửa sản phẩm này bằng nước, cũng không làm đổ nước hoặc chất lỏng đất vào sản phẩm.
- Không sử dụng benzen, chất pha loãng hoặc dung môi khác trên sản phẩm, nó có thể gây phai màu hoặc làm hỏng sản phẩm.
- Đừng cố tự tháo dỡ thiết bị trong khi nó ướt, hãy lau khô nó.
- Cố định phích cắm chống bụi trước khi vệ sinh



2. Chăm sóc và bảo trì

- Hãy chắc chắn tắt nguồn và ngắt kết nối dây nguồn khỏi ổ cắm điện trước khi bảo trì.
- Đặt thiết bị vào môi trường không có độ ẩm, nhiệt độ cao và dễ bay hơi
- Khi không sử dụng trong một thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên để sản phẩm được đóng gói trong hộp để tránh xa bụi.

3. Mẹo :

- Trong quá trình sử dụng hàng ngày, vui lòng kiểm tra các triệu chứng sau:
 - + Mùi cháy
 - + Sản phẩm bị BẬT / TẮT nguồn bất thường khi chạm vào dây nguồn.
 - + Dây nguồn nóng.
 - + Dây nguồn bị hỏng.

CẤU TRÚC MÁY

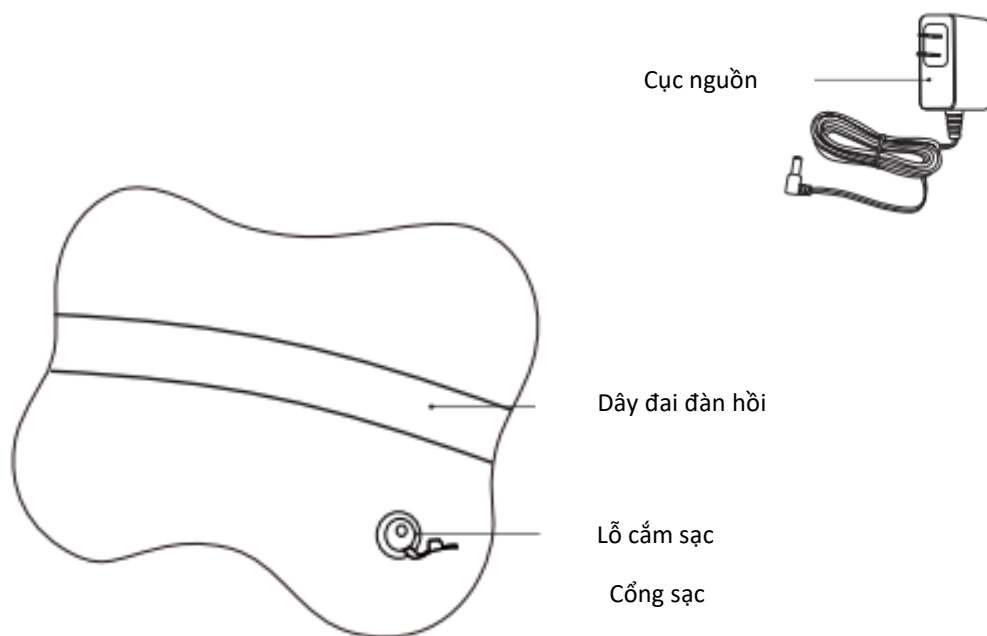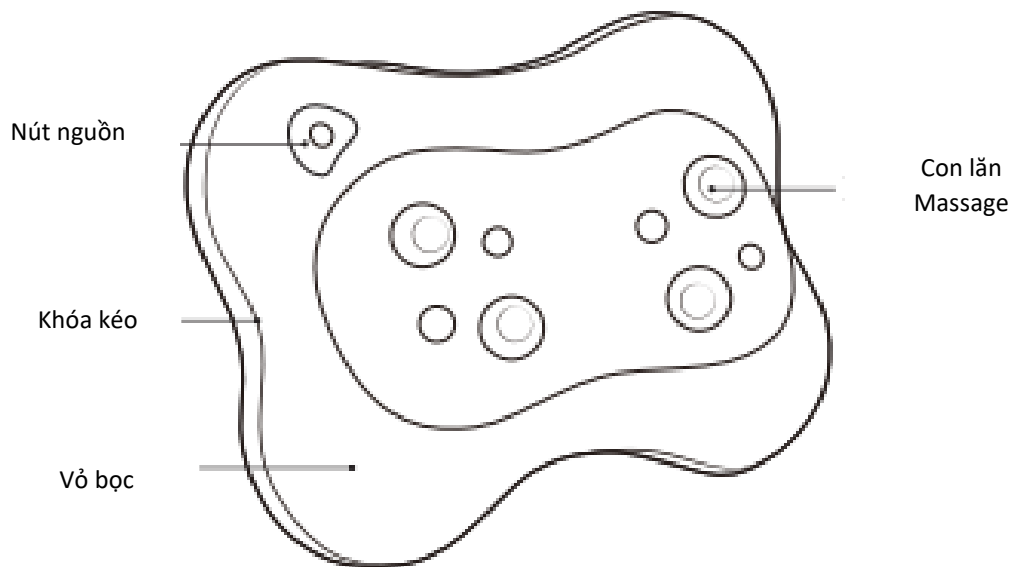

HƯỚNG DẪN SẠC ĐIỆN

Kết nối dây nguồn vào nguồn điện, đèn báo sáng lên, bộ chuyển đổi điện là tốt để sạc. Kết nối đầu kia của nguồn điện - cổng nguồn của gối massage, đèn báo màu đỏ sáng lên, pin lithium đang sạc. Đèn báo màu xanh lá cây sáng lên sau 2-3 giờ (giờ sạc tùy thuộc vào mức pin) khi được sạc đầy. Ngắt kết nối với nguồn điện và nhấn nút nguồn để tận hưởng massage (kiểm tra bản phác thảo để tham khảo)

Chuẩn bị trước khi sử dụng

- + Kiểm tra xem có bất kỳ hư hỏng nào đối với sản phẩm trước khi sử dụng không.
- + Đặt máy mát xa ở vị trí mong muốn và ấn máy mát xa vào phần mong muốn để bắt đầu.

Cách sử dụng

- + Nhấn công tắc nguồn một lần để khởi động máy mát xa với chức năng nhiệt Bật.
- + Nhấn nút này một lần nữa để đảo ngược chuyển động nhào.
- + Nhấn lần thứ ba để tắt nhiệt, massage nhào vẫn hoạt động.
- + Nhấn lần thứ tư để tắt nguồn.

TƯ THẾ MASSAGE



Massage cổ



Massge lưng



Massage dùi



Massage bắt chân



Massage cánh tay



Massage chân

**“CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ LỰA CHỌN SẢN PHẨM
CỦA CHÚNG TÔI”**



Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi

Công ty TNHH TM XNK Nguồn Sống Việt

Địa chỉ Hồ Chí Minh: 235-237 đường 9A KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh TP.HCM

Điện thoại: 18006977

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ Hà Nội: Số 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37855966