

Hướng dẫn sử dụng bàn chải điện Oral-B Pro 500

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng chọn mua sản phẩm Bàn chải điện Oral-B Vitality. Chúng tôi tin rằng quý khách sẽ hài lòng với sản phẩm chất lượng này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo an toàn và giữ lại để tham khảo khi cần.








Cảnh báo an toàn

- Nếu sản phẩm bị rơi, đầu bàn chải cần được thay thế, kể cả khi không thể nhìn thấy hư hại.
- Không được đặt để sạc và phích cắm trong nước, chất lỏng hay để ở nơi có thể bị rơi xuống nước. Không nên chạm vào

thiết bị sạc khi bị rơi xuống nước mà hãy rút dây cắm điện ngay lập tức

- Không được tự ý mở hoặc tháo lắp thiết bị trừ khi có ý định vứt bỏ pin. Khi lấy pin ra để bỏ, cần chú ý 2 cực của pin.
- Khi tháo sạc, luôn giữ phích cắm thay vì dây sạc. Không được chạm vào dây sạc khi tay đang ướt để tránh bị điện giật.
- Nếu bạn đang điều trị bất kỳ vấn đề nào về răng miệng, hãy tham khảo ý kiến của nha sĩ trước khi sử dụng
- Bàn chải đánh răng này là vật dụng chăm sóc cá nhân, không được thiết kế với mục đích sử dụng chung cho nhiều bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc răng miệng.

Mô tả sản phẩm

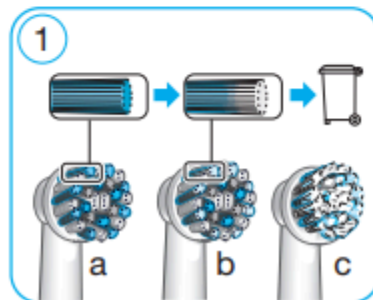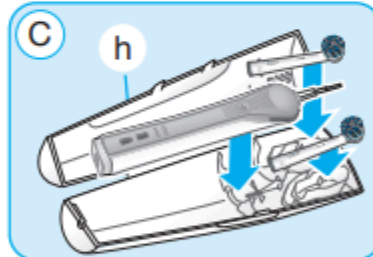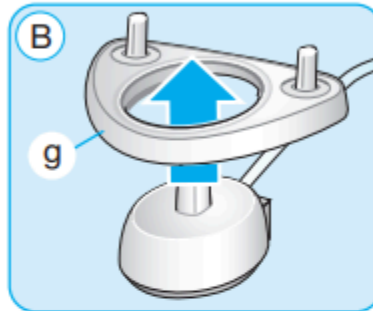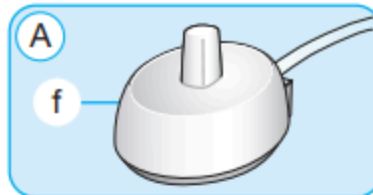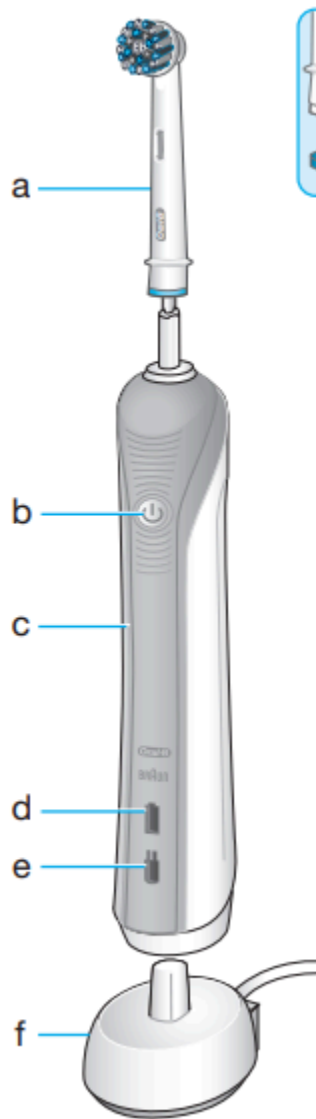

Oral-B Pro 500

A. Đầu bàn chải

B. Nút bật/tắt
(chuyển đổi giữa các
chế độ)

C. Thân bàn chải

D. Đèn báo sạc

E. Đèn báo nguồn
yếu

F. Bộ sạc

Phụ kiện (tùy thuộc
vào model):

G. Giá đỡ đầu bàn
chải

H. Ngăn đầu bàn
chải có nắp bảo vệ

Thông số kỹ thuật

- Vui lòng xem thông số về nguồn sạc dưới đế sạc

Lưu ý quan trọng

- Kiểm tra định kỳ toàn bộ sản phẩm/dây sạc/phụ kiện đi kèm. Không nên sử dụng thiết bị khi đã hư hỏng hoặc không còn sử dụng đúng chức năng của nó. Nếu dây sản phẩm/dây cắm/phụ kiện bị hư hỏng, hãy đưa đến trung tâm bảo hành Braun. Không nên tự sửa chữa sản phẩm, vì có thể gây ra cháy, giật điện hoặc bị thương cho người sử dụng.
- Không nên sử dụng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Trẻ em, người khuyết tật về thể chất và tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng an toàn thiết bị và hiểu rõ các mối nguy hiểm có liên quan.
- Không nên cho trẻ em tự lau chùi hoặc bảo dưỡng sản phẩm.
- Trẻ em không được dùng sản phẩm để chơi.
- Chỉ sử dụng sản phẩm đúng với chức năng trong hướng dẫn sử dụng. Không sử dụng với bất kì phụ kiện khác mà nhà sản xuất không khuyến cáo sử dụng.
- Thay đầu bàn chải 3 tháng 1 lần hoặc sớm hơn nếu đầu bàn chải bị mòn.

Hướng dẫn sử dụng Bàn chải điện Oral-B Pro 500

Sạc và vận hành máy

Bàn chải đánh răng này chống thấm nước, an toàn về điện và được thiết kế để sử dụng trong phòng tắm.

- Cắm bộ sạc cơ bản (f) hoặc bộ sạc đã được lắp ráp (g) vào ổ điện và đặt thân bàn chải (c) lên bộ sạc.
- Đèn báo sạc màu xanh lá (d) nhấp nháy khi thân bàn chải đang được sạc. Khi đã được sạc đầy, đèn sẽ tắt. Việc sạc đầy có thể mất tối đa 22 giờ và cho phép sử dụng liên tục trong 10 ngày (2 lần/ngày, mỗi lần 2 phút) (hình 2).

*Lưu ý: Nếu pin ở mức quá thấp, đèn báo sạc có thể không nhấp nháy ngay; Khi đó cần sạc tối thiểu 10-15 phút.

- Nếu pin sạc thấp, đèn báo sạc màu đỏ (e) nhấp nháy vài giây khi bật/ tắt bàn chải đánh răng.
- Để sử dụng hàng ngày, hãy luôn cắm thân bàn chải trên bộ sạc để đảm bảo luôn trong tình trạng đầy pin. Hãy yên tâm vì sẽ không xảy ra trường hợp pin bị quá tải.
- Để duy trì công suất tối ưu của pin sạc, rút phích cắm của bộ sạc và xả pin với việc sử dụng thường xuyên ít nhất 6 tháng một lần.

Sử dụng bàn chải điện

CÁCH SỬ DỤNG

- BƯỚC 1:**
Sạc pin bàn chải của bạn
- BƯỚC 2:**
Đánh răng từ ngoài vào trong
- BƯỚC 3:**
Đánh răng dọc theo nướu
- BƯỚC 4:**
Dùng bàn chải chà lưỡi để có hơi thở thơm tho



* Lưu ý:

- Trong những ngày đầu sử dụng bàn chải đánh răng điện, nướu của bạn có thể bị chảy máu nhẹ. Thông thường, hiện tượng này sẽ ngừng lại sau vài ngày.
- Nếu vẫn còn chảy máu sau 2 tuần, hãy liên hệ nha sĩ hoặc chuyên gia về răng miệng để được tư vấn và chăm sóc.

Các chế độ đánh răng tùy chỉnh

- “Daily Clean” – Chế độ tiêu chuẩn cho sử dụng hàng ngày
- “Sensitive Clean” – Chế độ chải răng nhẹ nhàng nhưng vẫn kỹ lưỡng cho những khu vực nhạy cảm
- «Whitening» – Tẩy trắng đặc biệt khi thỉnh thoảng sử dụng hoặc kể cả khi sử dụng hàng ngày.


Làm thế nào để thay đổi chế độ đánh răng?

- Bàn chải đánh răng tự động bắt đầu ở chế độ «Daily Clean».
- Để chuyển sang các chế độ khác, nhấn nút bật/ tắt. Nếu bạn muốn tắt chế độ “Daily Clean”, nhấn và giữ nút bật/ tắt cho đến khi động cơ dừng lại.

Cảm biến lực

- Để đạt hiệu quả tối ưu, bàn chải đánh răng của bạn có một tính năng kiểm soát lực. Nếu chải răng với lực quá mạnh, đầu bàn chải sẽ tiếp tục dao động nhưng tác động nhấn sẽ dừng lại. Ngoài ra bạn cũng sẽ nghe thấy một âm thanh khác trong khi đánh răng.

Đồng hồ hẹn giờ chuyên nghiệp

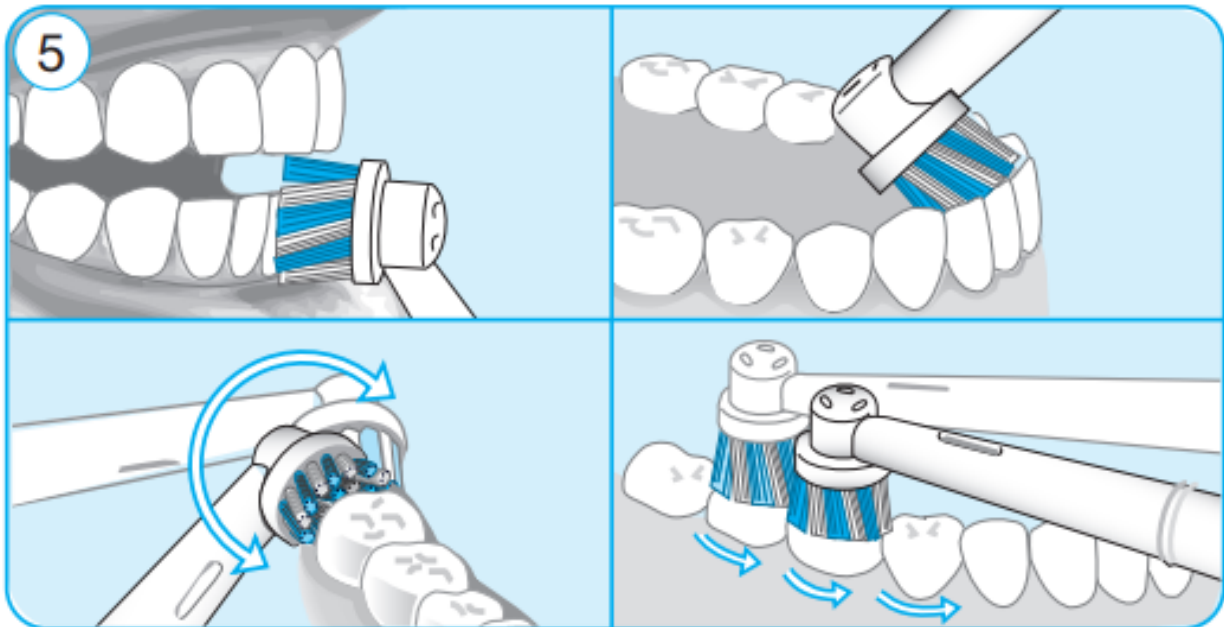

- Sau mỗi 30 giây bàn chải có tiếng rung ngắn, khi đó bạn cần di chuyển bàn chải tới phần tư khác của răng.
- Tiếng rung dài cho biết kết thúc thời gian chải răng tối ưu 2 phút.
- Đồng hồ hẹn giờ chỉ ghi nhớ thời gian chải răng, khi bạn dừng chải răng trong thời gian ngắn, đồng hồ sẽ dừng cho đến khi bạn tiếp tục sử dụng bàn chải. Khi tạm dừng lâu hơn 30 giây bộ hẹn giờ sẽ tự cài đặt lại.

Đầu bàn chải thay thế




** Lưu ý: Hầu hết các đầu bàn chải Oral-B đều có các lông chải INDICATOR® màu xanh nhạt để giúp bạn giám sát việc thay thế đầu bàn chải. Với việc đánh răng thông thường, hai lần một ngày trong hai phút, màu xanh lam sẽ mờ dần trong khoảng 3 tháng, cho thấy cần*

thay đầu bàn chải. Nếu lông bàn chải bị mòn trước khi nhạt màu, nguyên nhân có thể do bạn đã đánh răng với lực quá mạnh lên răng và nướu.

Hướng dẫn vệ sinh Bàn chải điện Oral-B Pro 500

- Sau khi chải răng, rửa cẩn thận đầu bàn chải dưới dòng nước đang chảy trong vài giây trước khi tắt.
- Tắt bàn chải bằng nút bật/ tắt trên thân và tháo đầu bàn chải. Làm sạch từng phần dưới dòng nước đang chảy; Sau đó lau khô chúng trước khi lắp lại bàn chải đánh răng. Tháo rời bộ sạc trước khi làm sạch.
- Để giữ đầu bàn chải (g) có thể vệ sinh bằng máy rửa chén. Không bao giờ đặt bộ sạc vào máy rửa chén hoặc nước, chỉ nên làm sạch bộ sạc bằng vải ẩm (hình 6).

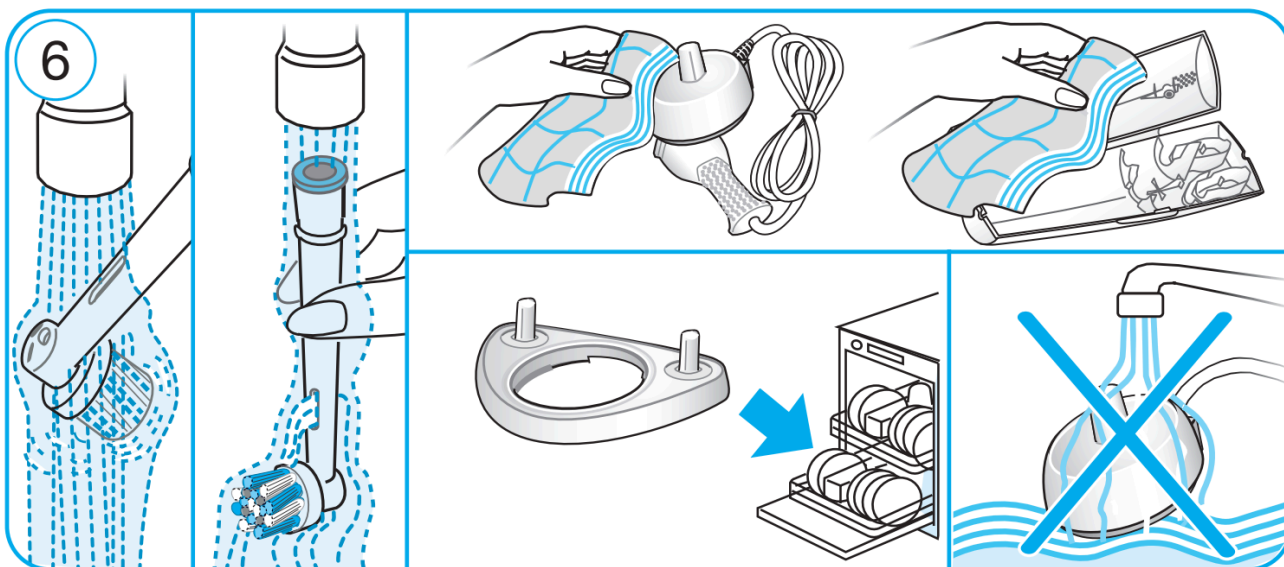

Lưu ý về bảo dưỡng pin và sản phẩm


Bảo dưỡng Pin

Để duy trì tối đa công suất pin, bạn hãy tháo sạc ít nhất 6 tháng 1 lần. bằng cách rút sạc và dùng thiết bị cho đến hết pin.

Điều kiện bảo dưỡng sản phẩm

- Thời gian bảo hành: 2 năm kể từ ngày mua sản phẩm. **Trong thời gian bảo hành, bảo hành miễn phí tất cả các lỗi do nhà sản xuất. Bảo hành được chấp nhận cho tất cả các chi nhánh của Braun khi khách hàng xuất hóa đơn mua hàng.*
- Sản phẩm này bao gồm pin có thể sạc lại được. Để bảo vệ sản phẩm khỏi tác hại của môi trường xung quanh, không vứt bỏ sản phẩm ở những nơi có nước thải sinh hoạt sau khi hết vòng đời sử dụng. Có thể vứt bỏ sản phẩm tại trung tâm bảo hành của Oral-B Braun.

- Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự vứt bỏ sản phẩm, thì hãy tháo pin ra theo hướng dẫn ở hình bên cạnh và mang đến các trạm thu hồi Pin để hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

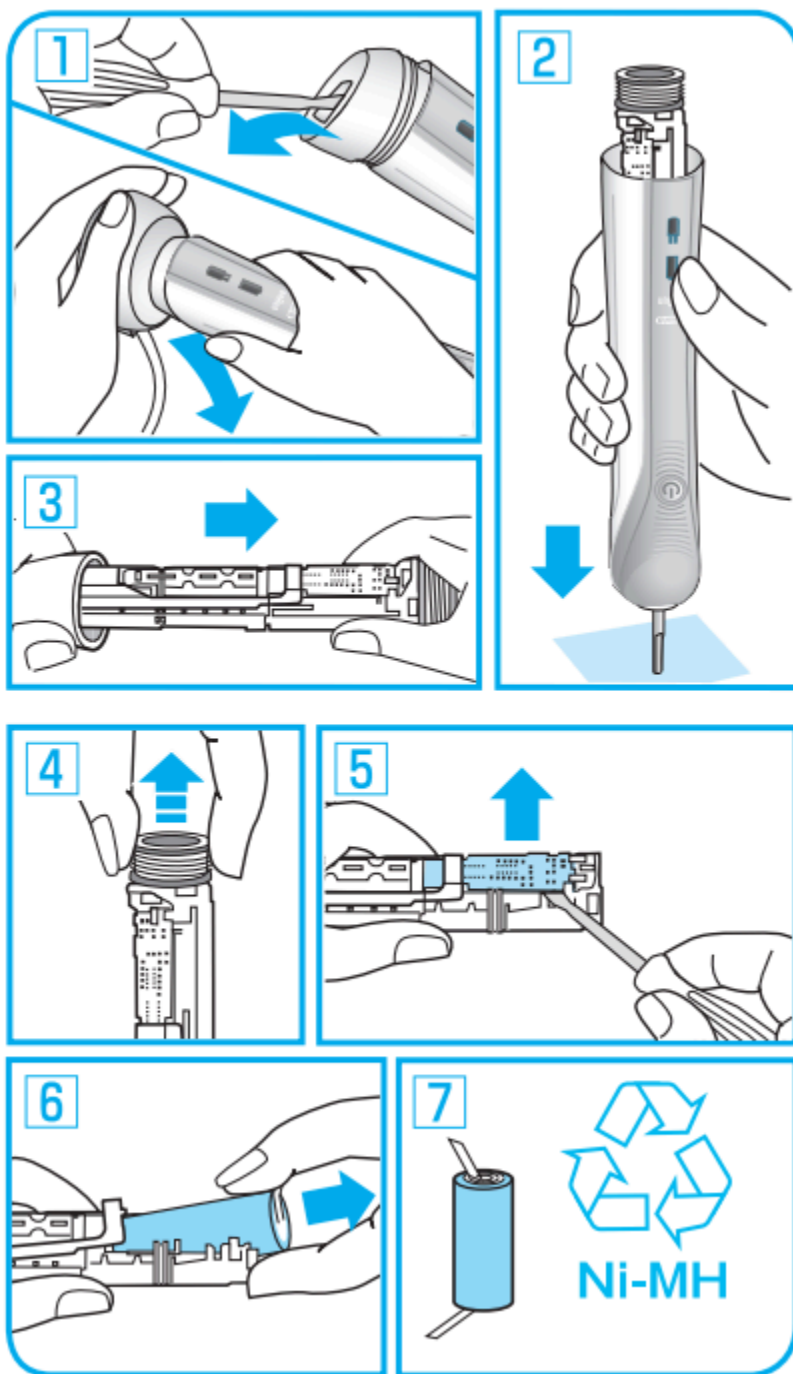

Chú ý! Tháo thân bàn chải ra sẽ làm sản phẩm bị lỗi và không được bảo hành. Hướng dẫn sử dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo.