



Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ
và sản phẩm của công ty chúng tôi!

Buheung

**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: Số 235-237, Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bảo hành: 028 7106 5858. **Hotline:** 1800 6977

Hà Nội: Số 2, Ngõ 382, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. **Bảo hành:** 024 37 855 966



www.buheung.vn

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GHẾ MASSAGE
TRANSFOMER 5D BUHEUNG LUX-9800**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng (thiết bị này).

NGUY HIỂM - Để giảm nguy cơ bị điện giật:

1) Luôn rút thiết bị này ra khỏi ổ cắm điện ngay sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh.

CẢNH BÁO - Để giảm nguy cơ bỏng, hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người:

1) Không được để thiết bị mà không được giám sát khi đang cắm điện. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận.

2) Không hoạt động dưới chân hoặc gối. Sưởi ấm quá mức có thể xảy ra và gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người.

3) Giám sát chặt chẽ là cần thiết khi thiết bị này được sử dụng bởi, trên hoặc gần trẻ em, thương binh hoặc người tàn tật.

4) Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như được mô tả trong sách hướng dẫn này. Không sử dụng các phần đính kèm không được nhà sản xuất khuyến nghị.

5) Không bao giờ vận hành thiết bị này nếu nó có dây hoặc phích cắm bị hỏng, nếu nó không hoạt động bình thường, nếu nó bị rơi hoặc bị hỏng, hoặc bị rơi vào nước. Đưa thiết bị trở lại trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa.

6) Không mang thiết bị này bằng dây nguồn hoặc sử dụng dây làm tay cầm,

7) Giữ dây tránh xa các bề mặt được nung nóng.

8) Không bao giờ vận hành thiết bị khi các lỗ thoát khí bị chặn. Giữ cho các khe hở không có xơ vải, lông và những thứ tương tự.

9) Không bao giờ làm rơi hoặc chèn bất kỳ đối tượng nào vào bất kỳ lỗ nào.

10) Không sử dụng ngoài trời.

11) Không hoạt động ở nơi đang sử dụng các sản phẩm bình xịt (phun) hoặc nơi đang sử dụng oxy.

12) Để ngắt kết nối, hãy chuyển tất cả các điều khiển sang vị trí tắt, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

13) Không sử dụng máy mát xa gần quần áo rộng hoặc đồ trang sức.

14) Để tóc dài tránh xa máy mát xa khi đang sử dụng.

15) Sử dụng cẩn thận các bề mặt được nung nóng Có thể gây bỏng nghiêm trọng. Không sử dụng trên các vùng da không nhạy cảm hoặc trong điều kiện lưu thông kém. Trẻ em hoặc những người không có khả năng vận động sử dụng nhiệt mà không giám sát có thể nguy hiểm.

LƯU CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

Chỉ sử dụng trong gia đình

Các lưu ý về an toàn

- Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ THẬN TRỌNG AN TOÀN để đảm bảo thiết bị này hoạt động chính xác.
 - Các biện pháp phòng ngừa và cách làm ẩm được liệt kê dưới đây sẽ giúp đảm bảo thiết bị này hoạt động bình thường.
 - Các loại tai nạn do sử dụng không đúng cách được phân loại thành CẢNH BÁO và THẬN TRỌNG
- Đọc tất cả CẢNH BÁO và THẬN TRỌNG bên dưới và làm theo tất cả các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này.

 CẢNH BÁO	Vận hành không đúng cách có thể gây thương tích cho người dùng
 THẬN TRỌNG	Vận hành không đúng cách có thể gây thương tích cho người dùng hoặc làm hỏng sản phẩm.
 Nghiêm cấm	 KHÔNG tháo rời

Không thích hợp cho những người dưới đây

Chúng tôi khuyên những người có bất kỳ tình trạng nào sau đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

 CẢNH BÁO	◆ Những người có máy tạo nhịp tim hoặc thiết bị điện tử được cấy vào cơ thể. ◆ Những người đang điều trị, đặc biệt là những người không được khôe. ◆ Những người có khối u ác tính, rối loạn cấp tính, bệnh tim hoặc tăng huyết áp nặng ◆ Cần được giám sát ◆ Phụ nữ có thai hoặc đang hành kinh. ◆ Những người bị loãng xương, biến dạng khớp, rối loạn chức năng hoặc gãy xương gần đây ◆ Những người có tình trạng da nghiêm trọng hoặc bị thương ◆ Những người bị sốt cao. ◆ Thiết bị có bề mặt được nung nóng. Những người không nhạy cảm với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị. (Cần được giám sát) ◆ Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. ◆ Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí não hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm bị liên lụy.
--	---

Biện pháp phòng ngừa đối với bộ điều khiển

 THẬN TRỌNG	◆ Không vận hành bộ điều khiển bằng tay ướt hoặc dùng lực kéo dây bộ điều khiển. ◆ Không làm đổ nước hoặc chất lỏng vào bộ điều khiển để tránh bị lỗi. ◆ Không đặt vật nặng lên bộ điều khiển.
--	--

Thận trọng về đầu nối nguồn và dây nguồn

 THẬN TRỌNG	◆ Chỉ sử dụng thiết bị với bộ cấp nguồn được cung cấp kèm theo thiết bị. ◆ Chỉ được cung cấp điện áp thấp an toàn tương ứng với nhãn trên ◆ Không dùng tay ướt để rút dây AC để tránh bị điện giật. ◆ Không kéo dây nguồn. Hãy rút dây ra phía trước để rút phích cắm. ◆ Không bóp chặt dây nguồn bằng vật nặng, quá sức ◆ Không được nhúng tay vào. Uốn cong, kéo mạnh hoặc xoắn dây nguồn ◆ Nếu dây nguồn bị hỏng, nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên môn tương tự ◆ phải được thay thế để tránh nguy hiểm.
--	--


Trường hợp tốt nhất

 THẬN TRỌNG	◆ Không sử dụng thiết bị này ở nơi có nhiệt độ trên 40 C. ◆ Không sử dụng thiết bị này trong môi trường ẩm ướt hoặc nhiều bụi. ◆ Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi có sấm sét hoặc bão nhẹ. ◆ Không sử dụng ngoài trời. ◆ Vui lòng đặt sản phẩm trên sàn bằng phẳng. ◆ Không lưu trữ gần nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa trần.
---	---


Các phương pháp tốt nhất để sử dụng an toàn

 THẬN TRỌNG	◆ Chỉ dành cho người dùng có trọng lượng dưới 120kg. ◆ Không sử dụng thiết bị trị liệu khác cùng với sản phẩm này. ◆ Chỉ sử dụng sản phẩm cho mục đích sử dụng như được mô tả trong sách hướng dẫn này ◆ Chỉ nên sử dụng thiết bị cho một người, không sử dụng cho hai hoặc nhiều người cùng một lúc để tránh làm hỏng sản phẩm. ◆ Không sử dụng sản phẩm ngay sau bữa ăn có thể gây cảm giác khó chịu. ◆ Tháo các phụ kiện ra khỏi cánh tay và làm trống các túi trong khi sử dụng dịch vụ mát-xa. ◆ Kiểm tra lớp bọc bên dưới đệm và các chỗ khác, nếu có bất kỳ hư hỏng nào, không được sử dụng và chuyển đến chuyên gia dịch vụ có chuyên môn để được bảo dưỡng. ◆ Nếu bạn cảm thấy bất kỳ khó chịu bất thường nào trong quá trình vận hành sản phẩm này, hãy tắt nguồn ngay lập tức và không sử dụng sản phẩm. ◆ Nên sử dụng thiết bị trong 20 phút mỗi lần. ◆ Đảm bảo không có chướng ngại vật phía sau ghế và có đủ khoảng trống trước khi điều chỉnh tựa lưng hoặc góc để chân ◆ Đảm bảo không có tải trọng quá mức nào khác đè lên tựa lưng hoặc chỗ để chân, giữ cho trẻ em vật nuôi hoặc bất kỳ vật cản nào khác tránh xa phần tựa lưng / mở rộng chỗ để chân để tránh mọi chấn thương do tai nạn. ◆ Hãy ngồi đúng chỗ trong khi sử dụng thiết bị để tránh gây thương tích cho người dùng hoặc làm hỏng thiết bị. ◆ Không kéo hoặc đẩy ghế hoặc lăn bánh trên sàn gỗ hoặc thảm để tránh hư hỏng.
 CẤM	◆ Không vận hành sản phẩm này nếu nó có các bộ phận bị hỏng / hờ hoặc rò rỉ điện. ◆ Không đứng hoặc chống các vật nặng lên chỗ để chân. ◆ Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch ghế mát xa. ◆ Không ngủ trong khi sản phẩm đang hoạt động. ◆ Tránh sử dụng sản phẩm dưới ảnh hưởng của rượu. ◆ Không cho tay hoặc vật lạ vào các lỗ hờ của thiết bị để tránh gây thương tích cho người sử dụng hoặc làm hỏng thiết bị. ◆ Nếu có bất kỳ khói hoặc mùi bất thường nào trong quá trình hoạt động, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.
 KHÔNG THÁO RỜI	◆ Không tháo rời sản phẩm này để tránh hỏng hóc. ◆ Không cố gắng sửa chữa hoặc tháo dỡ thiết bị mà không được phép ◆ Vui lòng liên hệ với đại lý ủy quyền hoặc đại lý dịch vụ.
 NGẮT NGUỒN ĐIỆN	◆ Rút dây nguồn khỏi các dải nguồn trước khi bảo trì. ◆ Không cầm hoặc rút dây nguồn bằng tay ướt để tránh bị điện giật hoặc bị thương ◆ Rút dây nguồn ra khỏi các dải nguồn sau khi sử dụng ◆ Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi nguồn điện bị cắt.


Cấu tạo bên ngoài

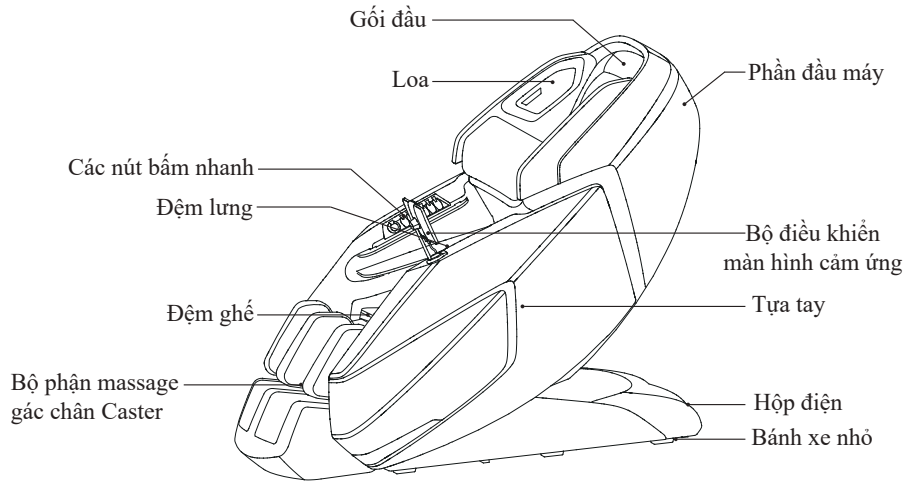

Cấu tạo bên trong

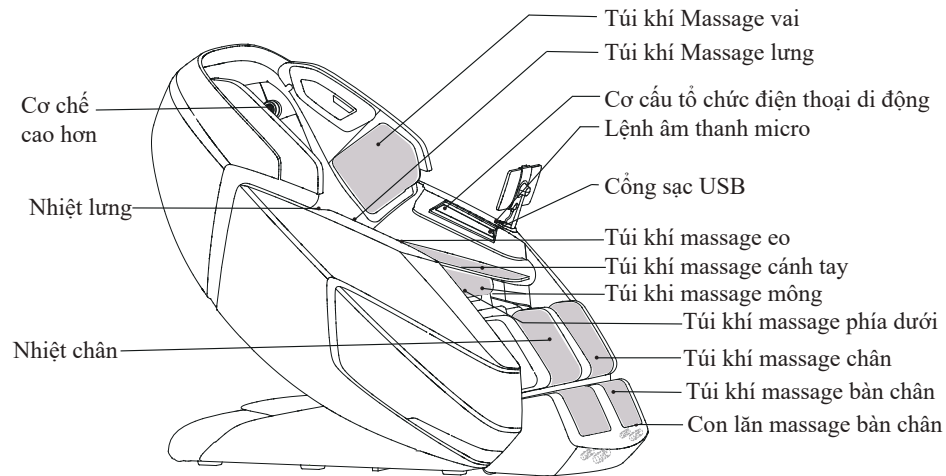

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

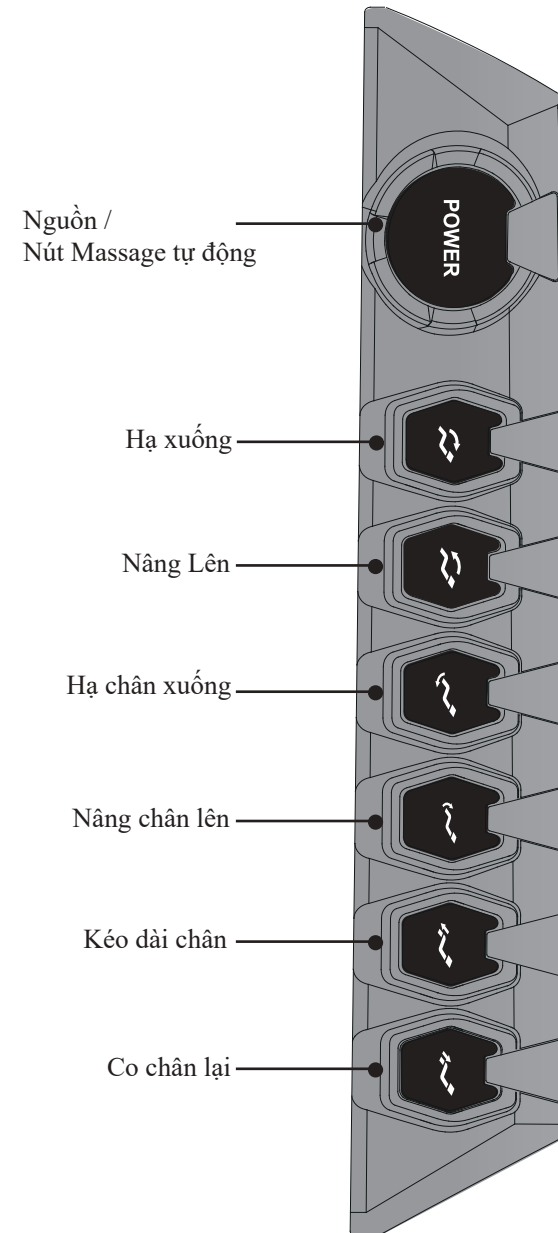

Hướng dẫn bảng điều khiển



Nút Nguồn / Tự động Massage

► Nhấn và giữ nút xoay để bật / tắt nguồn ghế massage, nhấn nhanh công tắc xoay để chuyển đổi các chương trình massage tự động.



Hạ xuống

► Nhấn và giữ để ngả lưng tựa; nhấn nút để dừng.
► Khi tựa lưng ngả về vị trí quý thứ ba, nó sẽ dừng lại và đợi cơ cấu bên dưới đạt được khoảng hở an toàn trước khi tiếp tục ngả ra.



Nâng lên

► Lại Nhấn và giữ để nâng tựa lưng lên vị trí thẳng đứng, nhấn nút để dừng



Hạ chân xuống

► Nhấn và giữ để hạ giá đỡ, nhấn nút để dừng.



Nâng chân lên

► Nhấn và giữ để nâng chỗ để chân, nhấn nút để dừng



Kéo dài chân

► Nhấn và giữ để mở rộng chỗ để chân; nhấn nút để dừng
(Đảm bảo trước có đủ khoảng trống)



Co chân lại

► Rút chân nhấn và giữ để thu lại chỗ để chân, nhấn nút để dừng.


Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển màn hình cảm ứng

► Xem "Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển màn hình cảm ứng" trên màn hình bộ điều khiển màn hình cảm ứng..

1. Điều khiển bằng một lần nhấn

Nó sẽ trượt về phía trước 28 cm và ngả ra sau.

Cơ chế liên kết ghế tựa của tàu lượn để tiết kiệm không gian và mang đến vị trí thư giãn tối đa.

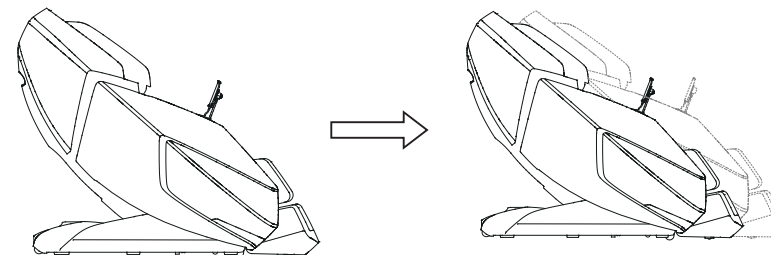

2. Vị trí không trọng lực

Ở vị trí không trọng lực sao cho độ cao của chân cao hơn phần trên một chút, trọng lượng cơ thể có thể phân bổ đều khắp, giảm áp lực của cột sống và khớp cả về thể chất lẫn tinh thần.

3. Mở rộng chỗ để chân tự động bằng tay

Phần đế chân có thể tự động mở rộng để tùy chỉnh độ dài chân của người dùng, bạn cũng có thể sử dụng nút điều khiển để điều chỉnh chỗ để chân theo nhu cầu của mình. Phần đế chân phía trên có thể kéo dài thêm 7cm và phần đế chân phía dưới có thể tự động kéo dài thêm 15cm cho nhiều người dùng với tầm vóc khác nhau.

4. Mát xa bằng áp suất khí

Mát xa toàn thân bằng áp suất không khí cho vai, tay, lưng, eo, hông, chân và bàn chân.

5. Con lăn Massage

3 con lăn dưới chân cung cấp áp lực xoa bóp theo mọi hướng cho vùng phản xạ.

6. Kỹ Thuật Mát Xa Đa Năng Bắt chước bàn tay con người

Các kỹ thuật xoa bóp shiatsu, shiatsu và 5D để thư giãn theo ý muốn.

7. Điều khiển bằng giọng nói ngoại tuyến

Hệ thống điều khiển bằng giọng nói đáp ứng nhu cầu điều khiển các chương trình massage dễ dàng hơn bằng đầu ngón tay.

8. Hoạt động đồng bộ của Hệ thống Dual-mech

Cơ chế massage mô sâu 5D kết hợp với Cơ chế chuyên biệt cho vùng eo & mông mang đến phương pháp massage đồng bộ giống như trải nghiệm massage bốn tay cùng một lúc.

9. Đường chạy linh hoạt

Đường chạy duỗi ra trong khi ghế massage đang ngả, khoảng cách di chuyển của cơ cấu tăng từ 1160mm lên 1210mm. Cung cấp massage ba chiều từ cổ đến đùi.

Điều khiển bằng giọng nói


Ngoại tuyến Thiết bị thoại có thể được kích hoạt bằng cách chạm vào rãnh hình vuông bằng micrô ra lệnh bằng giọng nói ở tay vịn bên trái hoặc nói "Hello My masseur", "Please tell your command" sẽ được nghe thấy khi giọng nói được kích hoạt.
(Cần khởi động ghế massage)

Ra lệnh bằng giọng nói
Hello my masseur
Turn off massage chair
Extension massage
Release massage
Breathe massage
Boss massage
Lady massage
Senior massage
Neck&Shoulder
Waist&Buttock
Back&Spine
Thai massage
Ancient massage
Pushing massage
Turn on foot rollers
Turn off foot rollers
Turn on heat
Turn off heat
Turn Off Zero Gravity
Zero Gravity one
Zero Gravity two


Vị trí & Vị trí lắp đặt

Khoảng trống cho ghế massage:

- Đảm bảo có đủ khoảng trống để lắp đặt: Ghế cần khoảng trống 10cm để ngả lưng tựa. Cần khoảng trống 60cm để mở rộng chỗ để chân và trượt về phía cái ghế.
- Đặt cách xa TV, radio hoặc thiết bị âm thanh / video khác 1 mét để tránh nhiễu tín hiệu.

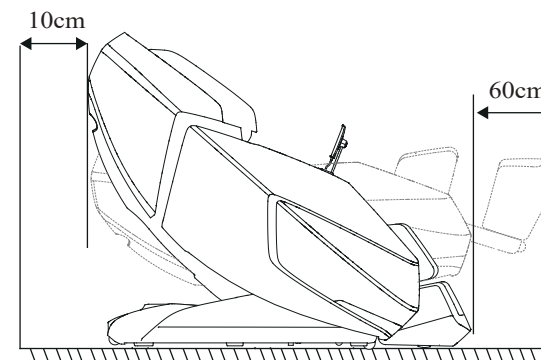

- Giữ khoảng cách giữa ổ cắm điện và công tắc nguồn trong vòng 1,5 mét.

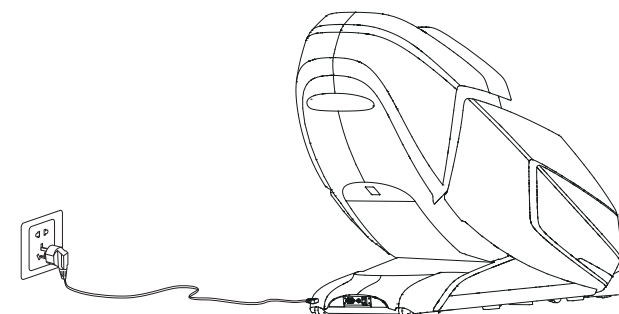


THẬN TRỌNG

- Giữ khoảng cách giữa ổ cắm điện và công tắc nguồn trong vòng 1,5 mét để tránh làm hỏng dây điện khi ghế mát xa trượt về phía trước.
- Kéo thẳng dây điện trong khi sử dụng để tránh bị rối hoặc hư hỏng,
- Khi ghế massage trượt về phía trước hoặc phía sau, vui lòng ch không có trẻ em, vật nuôi hoặc các chương ngại vật khác xung quanh để tránh xảy ra tai nạn.

Bảo vệ sàn

- Chúng tôi khuyên bạn nên đặt một miếng thảm hoặc tấm lót mềm bên dưới để tránh làm hỏng sàn.

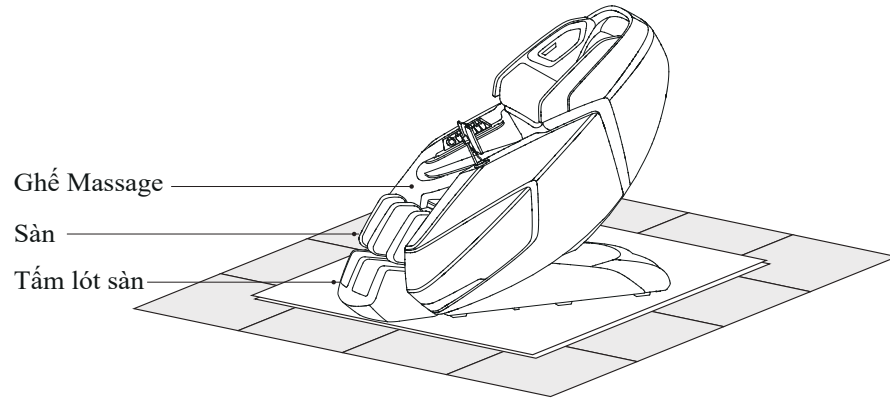

Thăm trải sàn ghế massage



Môi trường xung quanh không sử dụng ghế massage trong môi trường có độ ẩm cao như gần bể bơi hoặc phòng tắm để tránh tai nạn điện giật,



Vui lòng giữ ghế massage tránh xa các bề mặt có nhiệt độ cao để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm.

Tiếp đất



Sản phẩm này phải được nối đất, phích cắm phải được cắm vào ổ cắm nối đất 3 dây thích hợp được lắp đặt đúng cách và nối đất theo tất cả các quy định và quy định của địa phương để giảm nguy cơ điện giật.


Phương pháp lắp đặt

Bước 1: Lấy Tất cả các Bộ Ghế Massage Ra khỏi Thùng


- Mở gói các thùng: lấy tất cả vải bọc và phụ kiện ra khỏi thùng.
- Trước khi bắt đầu lắp đặt, vui lòng xác minh rằng tất cả các thành phần đã được bao gồm (kiểm tra kỹ với danh sách đóng gói)

Bước 2: Lắp đặt Bộ đỡ tay

- Kết nối ống dẫn khí được đánh số với các đầu phun được đánh số phù hợp trên tay vịn và cắm các đầu nối (Có thể phù hợp với màu sắc; Phương pháp lắp đặt tương tự với mặt khác.)

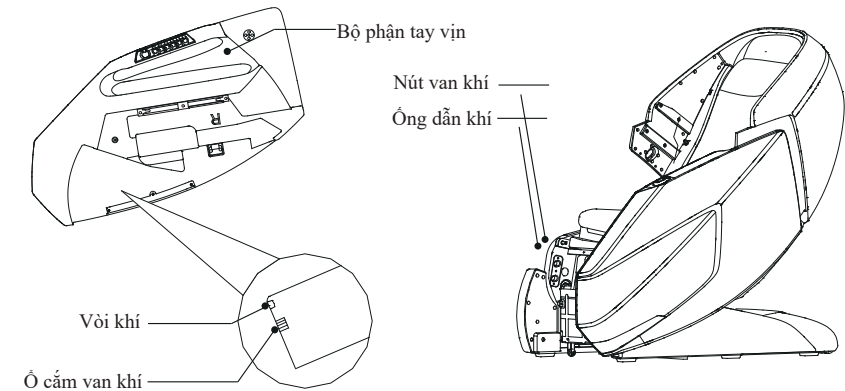


- Giữ bộ phận kê tay lên và móc giá đỡ 2 vào rãnh giá đỡ, từ từ đẩy bộ phận tay vịn vào liên kết ghế cho đến khi khung 2 thẳng hàng hoàn toàn với khung 4, lắp khung 1 vào khung 3, sử dụng vít để cố định tay vịn vào đúng vị trí. (Phương pháp lắp đặt tương tự với mặt còn lại)

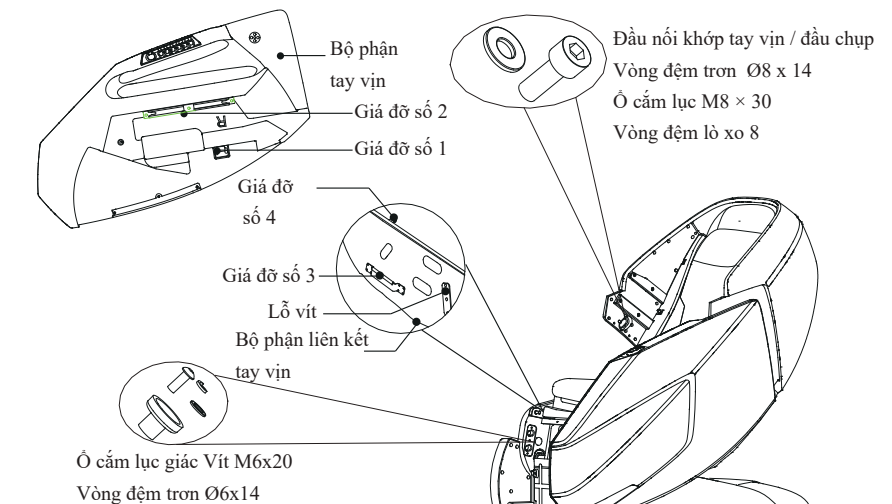


Bước 3: Lắp đặt Thiết bị Loa

- Kết nối các đầu nối phích cắm trên thiết bị loa với các đầu nối phù hợp trên tai nghe, lắp thiết bị loa vào tai nghe và gắn vòi phun khí vào các đầu nối không khí. (Phương pháp lắp đặt tương tự với mặt khác)
- Sau đó cố định bằng 2 vít M4x16 và 5 vít M5 × 20.

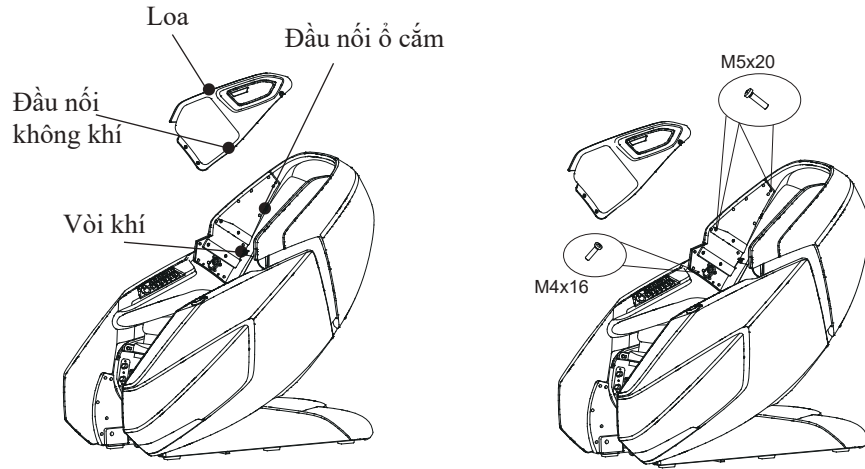


Bước 4: Lắp Bộ phận đế chân

- Nâng bộ phận đế chân lên, luồn ống dẫn khí vào không khí vòi phun, và lắp phích cắm van khí vào cổng van khí nằm ở mặt bên của đế ghế, đảm bảo chúng được giữ chặt.

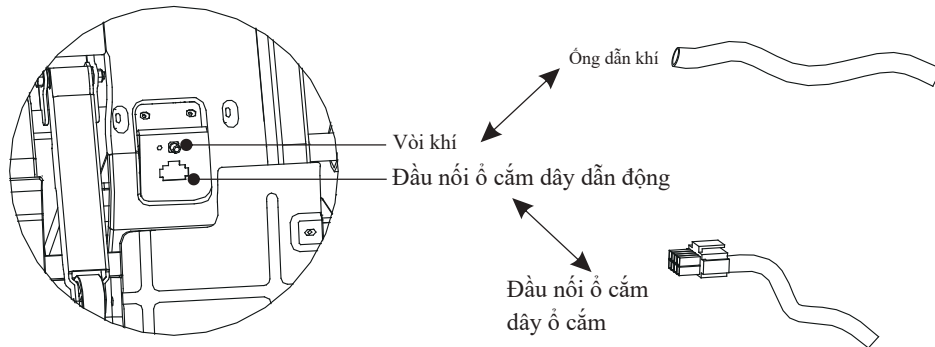


- Đặt ống bọc của khung đế chân vào khung đế chân, gắn khung đế chân vào trục quay của gác chân sau đó gắn một vòng tròn DK vào đầu trục quay của gác chân để giữ cố định chân ghế, sau đó khóa chân ghế và ghế chỉnh lại với nhau.

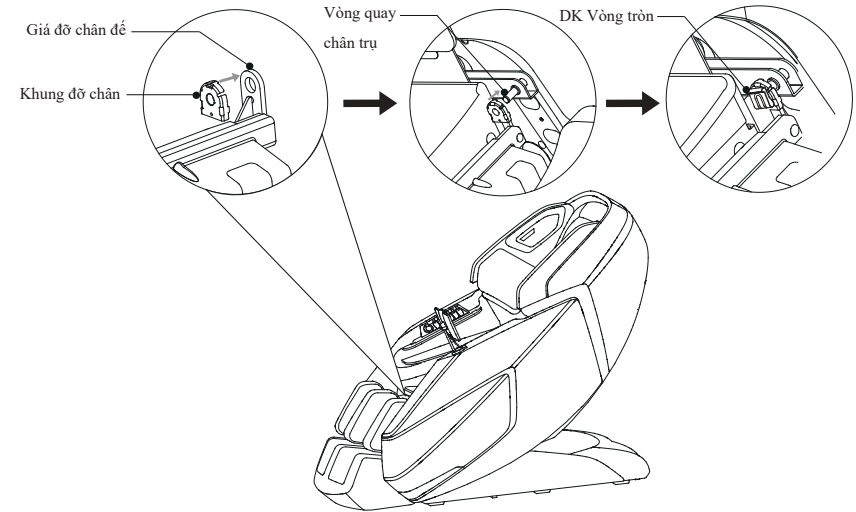


Bước 5: Lắp Giá đỡ bộ điều khiển màn hình cảm ứng

- Tháo vít khỏi ổ cắm, lắp giá đỡ bộ điều khiển màn hình cảm ứng vào ổ cắm và cố định bằng vít M4, sau đó đặt phần trang trí lên trên

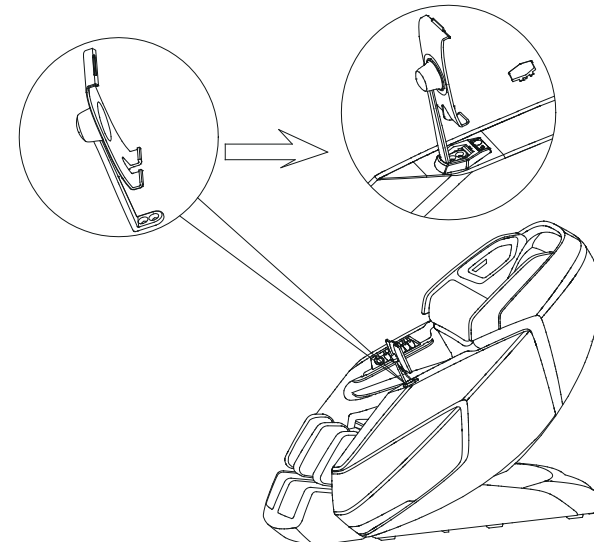


Bước 6: Lắp Giá đỡ Bộ điều khiển Màn hình cảm ứng


- Kết nối cáp bộ điều khiển với cổng của ghế mát xa (thẳng hàng các chân với cổng trước khi kết nối), sau đó vặn chặt nắp vặn theo chiều kim đồng hồ để cố định đầu nối vào đúng vị trí.

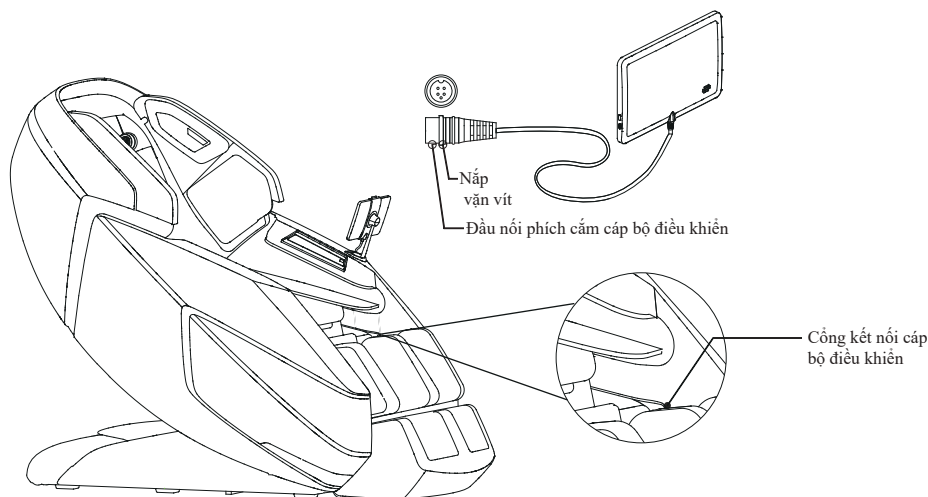**Bước 7: Các phụ kiện khác**

- Kết nối cáp nguồn với ổ cắm điện của sản phẩm nằm ở dưới cùng của tay vịn bên phải.
- Kết nối nguồn điện cho ghế, BẬT nút nguồn, sử dụng bộ điều khiển để nâng tựa lưng lên vị trí thẳng đứng hoàn toàn.

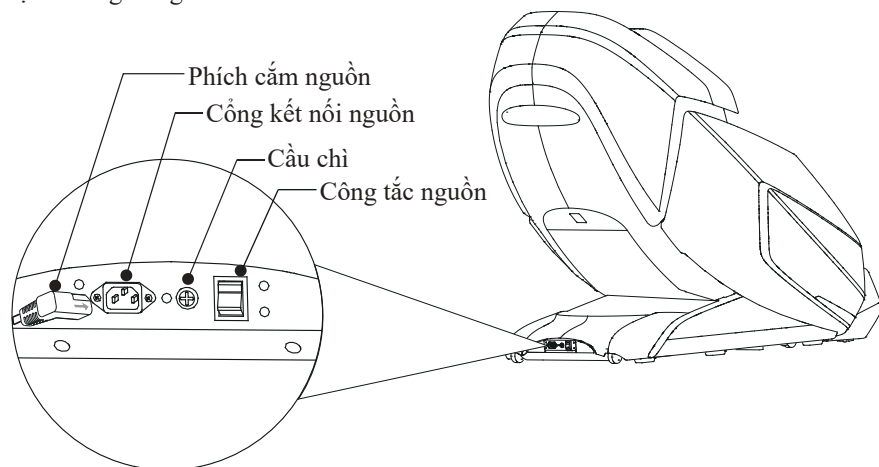**Di chuyển Ghế Massage**


- Lăn ghế trên bánh xe của nó đến vị trí mong muốn.
- Nghiêng phần tựa lưng về vị trí thẳng đứng.
- Tắt công tắc nguồn và rút thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.
- Sử dụng hai người, ấn xuống tựa lưng và nâng lên ở mặt trước bằng cách nắm lấy Giá đỡ di chuyển nằm ở phía dưới phía trước của tay vịn), lăn ghế trên bánh xe của nó đến vị trí mong muốn (kiểm tra bản phác thảo để tham khảo).

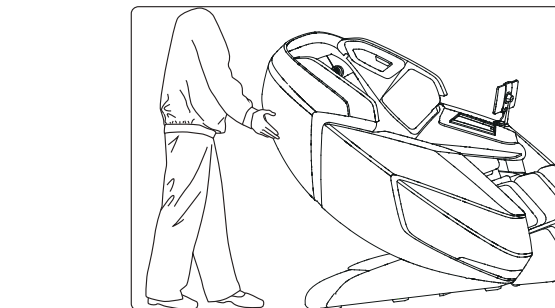**⚠ THẬN TRỌNG**

- Không di chuyển ghế khi có người dùng bên trên.
- Để mang sản phẩm này, không nâng bằng bộ đế chân hoặc tay vịn, giữ khung máy và cố định phần tựa lưng (có 4 người trở lên khiêng sản phẩm)

Kết nối với Nguồn


- Kết nối thiết bị này với ổ cắm 3 dây được nối đất đúng cách.
- Bật công tắc nguồn chính bên tay phải của ghế massage.

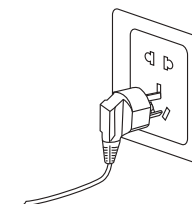**⚠ THẬN TRỌNG**

- Kiểm tra xem dây nguồn không bị hỏng trước khi bật ghế massage.
- Vui lòng xác minh rằng công tắc nguồn chính đã tắt trước khi kết nối với nguồn điện.

Vận hành

- ▶ Sử dụng bộ điều khiển để ngả tựa lưng về vị trí thấp nhất, nâng và mở rộng bệ đỡ chân về vị trí cao nhất, đảm bảo có đủ khoảng trống trước khi chạy thử.
- ▶ Đưa phần tựa lưng và chỗ để chân trở lại vị trí mặc định sau khi vận hành thử và tắt công tắc nguồn. Để chọn chương trình massage, vui lòng kiểm tra Hướng dẫn của Bảng điều khiển và Hướng dẫn của Bộ điều khiển màn hình cảm ứng để tham khảo.

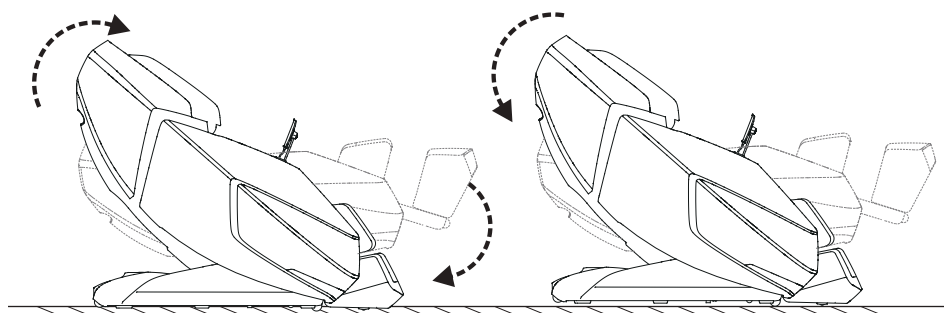

Trước khi ngồi vào ghế


- ▶ Đảm bảo chỗ để chân được lắp ráp tốt trước khi ngồi lên ghế massage.
- ▶ Đảm bảo ghế massage được trở về vị trí ban đầu trước khi ngồi lên.
- ▶ Nếu có bất kỳ bộ phận nào không ở vị trí mặc định, vui lòng tắt ghế massage để nó tự phục hồi.

⚠ THẬN TRỌNG

- ▶ Không ngồi trong khi phần đế chân được nâng lên.
- ▶ Không đặt quá tải lên phần đế chân để tránh hư hỏng.

Phần kéo dài chỗ để chân

- ▶ Nhấn và giữ nút “ ” hoặc “ ” để kéo dài (đảm bảo có đủ khoảng trống) hoặc thu lại phần đế chân đến độ dài bạn mong muốn để có trải nghiệm mát-xa tốt hơn, nhả nút để cố định vị trí.

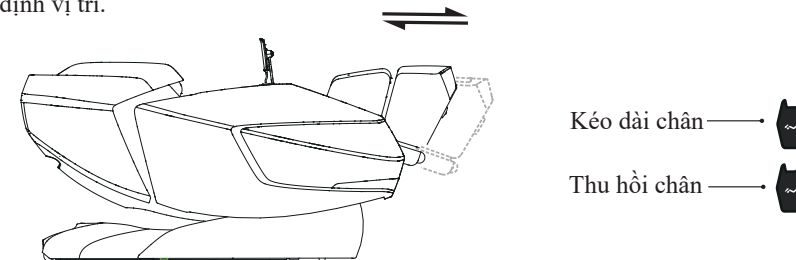

- ▶ Cảm biến được đặt ở dưới cùng của chỗ để chân, bộ phận đế chân sẽ tự động điều chỉnh độ dài khi ghế khởi động.



CẢNH BÁO

- ▶ Không chơi trên ghế massage hoặc vận hành không đúng cách.
- ▶ Đảm bảo không bị cản trở khi nâng hoặc ngả tựa lưng và gác chân.
- ▶ Không đặt bàn chân, ngón tay hoặc bất kỳ đồ vật nào khác vào khoảng trống giữa ghế và tựa lưng / chỗ để chân khi ghế đang ngả, nâng cao hoặc phục hồi chuyển động.
- ▶ Đảm bảo ghế massage được phục hồi trở lại vị trí ban đầu trước khi rời khỏi.

Sau khi sử dụng

- ▶ Luôn rút phích cắm của ghế mát xa khỏi ổ cắm điện ngay sau khi sử dụng.
- ▶ Đặt bộ điều khiển màn hình cảm ứng lên giá đỡ.
- ▶ Tắt công tắc nguồn và rút phích cắm của máy massage tóc từ ổ cắm điện trong khi không sử dụng để tránh trẻ em vô tình giật điện vào ghế massage.
- ▶ Khi không sử dụng trong một thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên bọc ghế cuộn dây nguồn và đặt thiết bị trong môi trường không có bụi và hơi ẩm.

Hướng dẫn bảo quản

- ▶ Để xử lý vết bẩn trên mặt sau, tay vịn, gác chân, các bộ phận bằng nhựa hoặc ống dẫn khí, làm sạch tại chỗ bằng bột tẩy rửa nhẹ, sau đó lau sạch bằng khăn lau khô.
- ▶ Để xử lý các vết bẩn trên hộp điều khiển, nguồn, hãy lau sạch tại chỗ bằng khăn lau khô.
- ▶ Để xử lý vết bẩn trên đệm lưng hoặc gối, chỉ sử dụng chất tẩy rửa ghế dựa trên nước, lau bằng vải ẩm, sau đó để khô trong không khí.
- ▶ Để làm sạch tấm phủ bàn chân / bắp chân, hãy tháo nó ra khỏi ghế, rửa tay bằng chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau khô.

 CẢNH BÁO

- ▶ Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
- ▶ Rút dây nguồn khỏi các dải nguồn trước khi chăm sóc và bảo dưỡng.
- ▶ Để tránh điện giật hoặc thương tích, không chạm vào dây điện bằng tay ướt.
- ▶ Đảm bảo không có chất tẩy rửa lọt vào hộp điện trong khi lau.
- ▶ Không sử dụng benzen, chất pha loãng hoặc các dung môi khác trên sản phẩm của bạn, nó có thể làm phai màu hoặc hư hỏng sản phẩm.
- ▶ Không ủi vải bọc.

Phương pháp bảo quản

- ▶ Che sản phẩm bằng vải không bụi để ngăn bụi bám vào nếu không sử dụng trong thời gian dài

 THẬN TRỌNG

- ▶ Không để sản phẩm này tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. Điều này có thể gây phai màu hoặc hư hỏng.

Mẹo: Trong quá trình sử dụng hàng ngày, vui lòng kiểm tra các triệu chứng sau:

- ▶ Có mùi khét.
- ▶ Nguồn nhấp nháy và tắt khi chạm vào cáp sạc.
- ▶ Dây nguồn nóng.
- ▶ Các triệu chứng bất thường khác.

 THẬN TRỌNG

- ▶ Ngừng sử dụng sản phẩm để tránh hỏa hoạn hoặc tai nạn nếu có bất kỳ triệu chứng nào ở trên.
- ▶ Tắt nút nguồn và rút phích cắm, liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà cung cấp tại địa phương để sửa chữa.
- ▶ Tất cả các dịch vụ bảo dưỡng khác ngoại trừ việc chăm sóc và bảo dưỡng ở trên phải được bảo dưỡng bởi đại lý hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

 CẢNH BÁO

Rút dây nguồn khỏi các dải nguồn trước khi chăm sóc và bảo dưỡng.
Để tránh điện giật hoặc thương tích, không chạm vào dây điện bằng tay ướt.
Đừng cố tự tháo dỡ hoặc sửa chữa sản phẩm.
Vui lòng gửi ghế massage của bạn đến trung tâm bảo hành được ủy quyền.

STT	TÌNH TRẠNG	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
1	Tiếng ồn khi sử dụng	Âm thanh này là bình thường và phát ra từ động cơ máy bơm không khí hoặc các bộ phận khác	Không cần thực hiện bất kỳ giải pháp nào
2	Thiết bị không khởi động được	Dây nguồn không được gắn chặt vào ổ cắm	Chèn phích cắm điện đúng cách vào ổ cắm điện
		Công tắc nguồn tắt	Bật công tắc khởi động
		Cầu chì bị xì	Chỉ thay thế bằng cầu chì cùng loại và cùng công suất.
3	Không nhạc phát	Âm lượng được vặn ở mức âm lượng thấp nhất	Điều chỉnh loa
		Bluetooth bị tắt loa	Bật Bluetooth
		Đã kết nối Bluetooth với thiết bị khác	Kết nối lại Bluetooth
4	Không nâng hoặc ngã trên tựa lưng hoặc chỗ để chân	Lực đè vào phần lưng hoặc gác chân quá tải	Giảm lực tác động và thử lại lần nữa

Nếu sự cố vẫn xảy ra, vui lòng liên hệ các đại lý để bảo trì.
Quan trọng: Đừng cố gắng tự sửa chữa sản phẩm này, công ty của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thương tích hoặc thiệt hại do bất kỳ bảo dưỡng nào mà không được ủy quyền.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THƯƠNG HIỆU : Buheung Korea

Model : lux - 9800

Điện áp định mức: 220-240V

Tần số định mức: 50-60HZ

Công suất định mức: 180W

Thiết kế an toàn: Cấp 1