



GHẾ MASSAGE BUHEUNG MK-8800



TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA GHẾ MASSAGE MK-8800:**1. Trượt:**

Với thiết kế 2 rãnh trượt ở phía dưới ghế Massage giúp cho ghế tự động ngả và di chuyển ra phía trước 30 cm giúp tiết kiệm diện tích sử dụng ghế. Đây là tính năng tự động thu gọn trong không gian hẹp mang lại tiện ích cho người sử dụng.

2. Chế độ Massage không trọng lực:

Chế độ Massage không trọng lực tạo 1 trạng thái Massage thoải mái và thư giãn cho người sử dụng. Ở chế độ này toàn bộ cơ thể sẽ được thả lỏng và mang lại hiệu quả Massage tối đa.

3. Con lăn Massage 3D:

Các con lăn Massage thiết kế dạng 3D tác dụng sâu vào các huyết đạo cơ thể.

4. Chế độ rút và kéo dẫn chân:

Chế độ kéo dẫn chân lên tới 17 cm tác dụng lên các phần xương của người sử dụng, hỗ trợ kéo dẫn xương khớp và thư giãn cơ.

5. Chế độ nghe nhạc Bluetooth:

Chế độ nghe nhạc bằng Bluetooth tích hợp qua Smart Phone giúp người nghe trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao qua 2 dàn loa Hi-Fi tích hợp ở 2 bên tai nghe của ghế.



6. Chế độ Massage 4D hình chữ L:

Chế độ Massage 4D hình chữ L giúp cho người dùng trải nghiệm chế độ Massage trên toàn bộ các vùng trên cơ thể. Đặc biệt là phần bi đi dọc sống lưng theo hình chữ L, nâng cao hiệu quả tối đa cho việc Massage phần xương cột sống.


7. Tính năng túi khí:

Ghế được tích hợp hệ thống túi khí ở nhiều vùng Massage khác nhau mang đến cảm giác thoải mái với tính năng co bóp nhiều cường độ.

CẤU TẠO SẢN PHẨM:

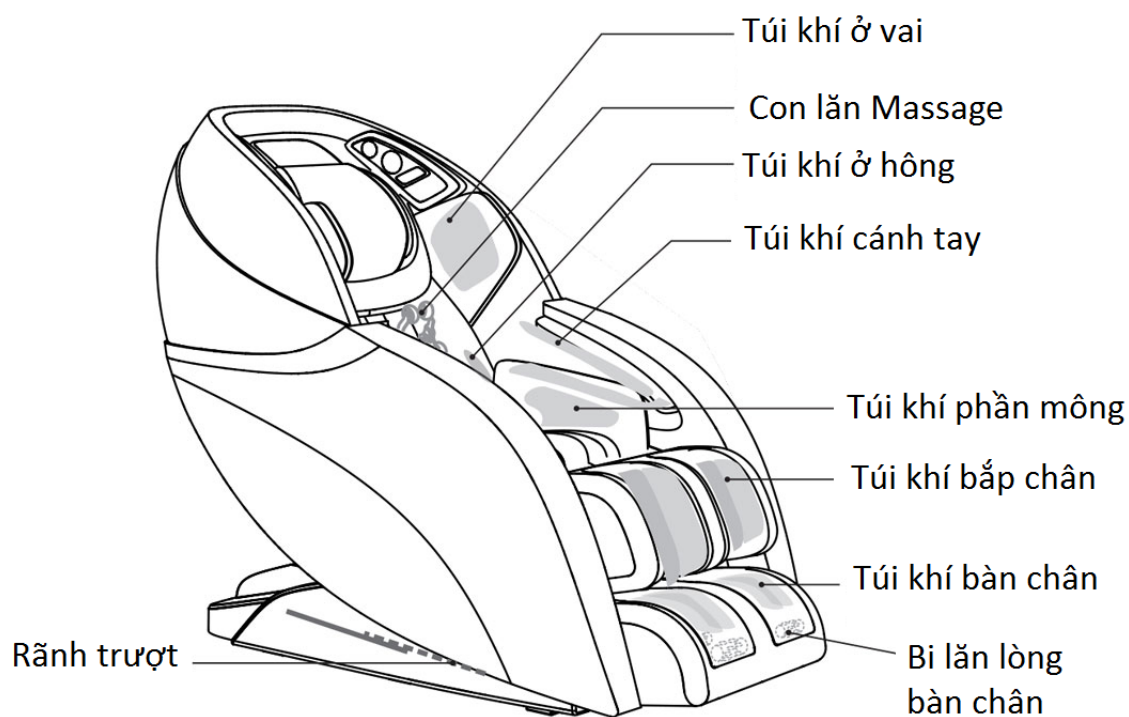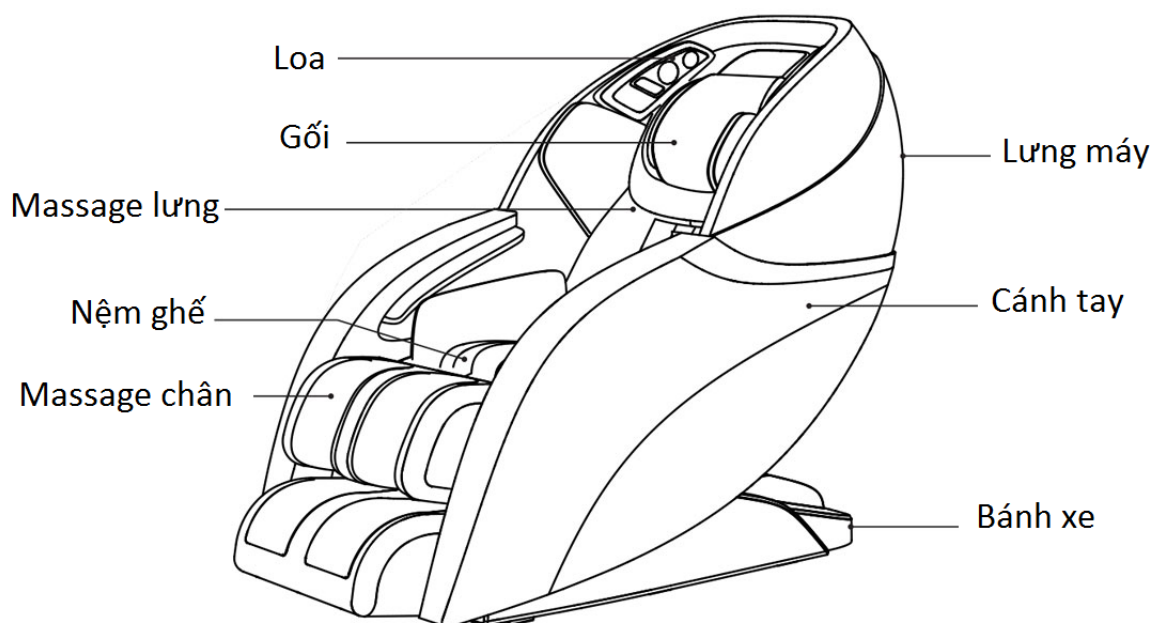

BẢNG ĐIỀU KHIỂN:

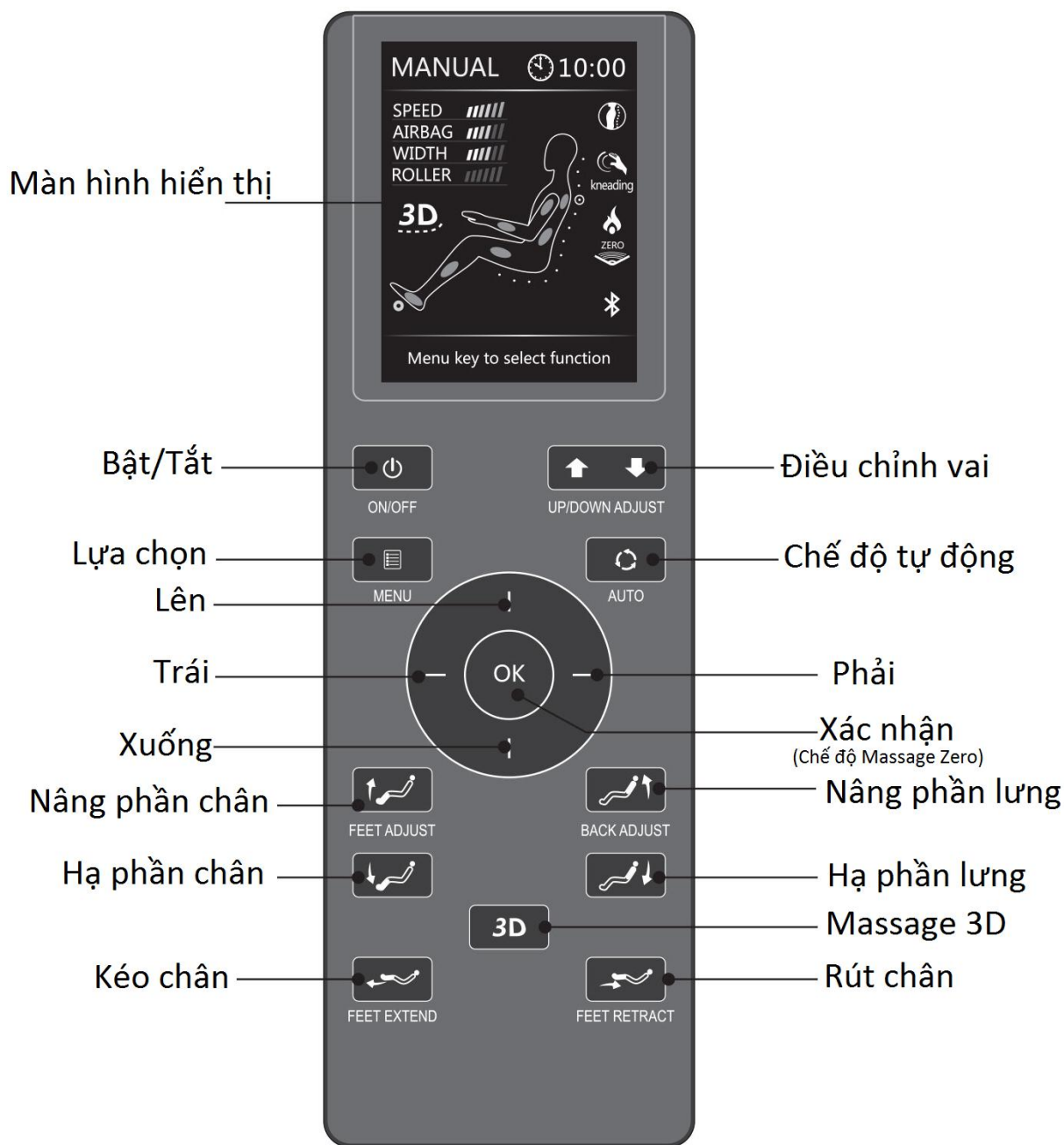

ON/OFF: Bấm nút ON máy đi vào trình hoạt động, lựa chọn các chế độ để sử dụng máy.

Bấm OFF lần nữa để tắt máy. Chế độ mặc định của máy là 20 phút.

 MENU: Bấm phím này để lựa chọn chế độ Massage tự động, chế độ Massage thủ công, chế độ túi khí, nhiệt, con lăn.

 UP/DOWN ADJUST: Điều chỉnh kích thước vai. Chế độ này thực hiện khi ở chế độ Massage thủ công điều chỉnh vị trí Massage hai phần vai.


 AUTO: Chế độ Massage tự động, lựa chọn phím này để lựa chọn các chế độ Massage bao gồm: SPORT REFRESH – Thư giãn cơ, EXTENTION- Kéo giãn, RELAX – Thư giãn, REST & SLEEP – Thư giãn và ngủ ngon, WORKING RELIEF – Giảm đau, NECK & SHOULDER OR WAIST & SPINE – Massage cổ và vai – Massage phần lưng hông, xương sống.

 3D: Bấm nút này để lựa chọn chế độ Massage không trọng lực.

CHẾ ĐỘ RÚT VÀ KÉO DẪN CHÂN:

Kéo dẫn chân 

Rút ngắn chân 

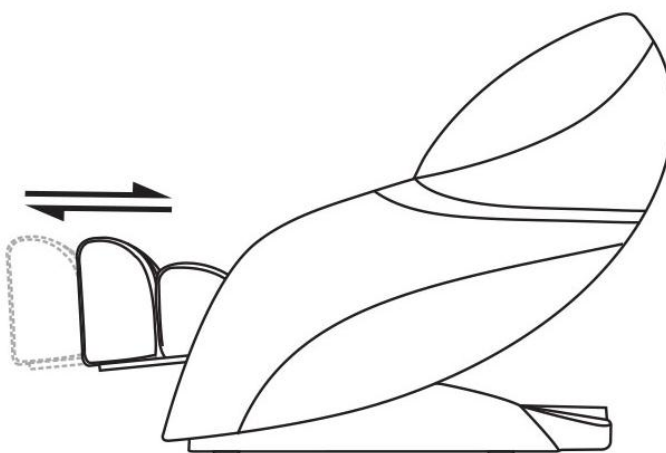


Chế độ Massage rút kéo dẫn chân là 1 trong những kỹ thuật Massage mới nhất giúp người dùng có những trải nghiệm Massage chân thực và thoải mái nhất.

PHÍM ĐIỀU HƯỚNG: Sử dụng để lựa chọn các chế độ, bấm OK để xác nhận lựa chọn.

CÁC CHẾ ĐỘ MASSAGE:

CHẾ ĐỘ MASSAGE TỰ ĐỘNG:

Bấm Auto để vào chế độ Massage tự động bao gồm 6 chế độ Massage tự động.

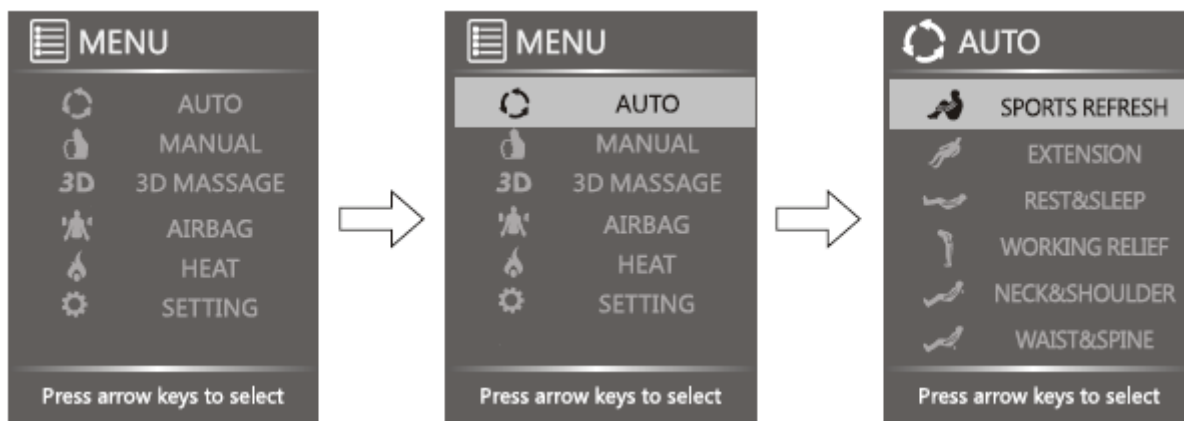

SPORT REFRESH: CHẾ ĐỘ MASSAGE THƯ GIÃN CƠ:

Dùng để hồi phục cơ sau các hoạt động thể thao và các bài tập thể dục. Chế độ này giúp cơ được thả lỏng và thư giãn, nghỉ ngơi, tăng cường khả năng hồi phục của cơ sau các bài tập.

EXTENSION: CHẾ ĐỘ MASSAGE KÉO DẪN

Chế độ Massage này bắt nguồn từ Thái Lan với những bài xoa và ấn mạnh vào các vùng trên cơ thể, đặc biệt hiệu quả với phần chân, mông. Chế độ Massage này giúp xóa tan sự mệt mỏi phần cơ và góp phần nâng cao thể chất người sử dụng.

REST AND SLEEP: CHẾ ĐỘ MASSAGE THƯ GIÃN VÀ NGHỈ NGƠI

Giúp nâng cao và cải thiện chất lượng trong thời gian nghỉ ngơi của người sử dụng, có thể trong thời gian nghỉ trưa hoặc khi đi ngủ. Chế độ Massage sẽ đi từ mạnh đến nhẹ, từ nhẹ đến không có để cơ thể được nghỉ ngơi 1 cách từ từ và trọn vẹn đồng thời chìm vào giấc ngủ 1 cách thoải mái nhất.

WORKING RELIEF: CHẾ ĐỘ MASSAGE GIẢM ĐAU

Dành cho những người làm văn phòng, những người phải ngồi nhiều, không có thời gian vận động, thường phải đi công tác dài ngày phải ngồi trên xe ô tô hoặc máy bay trong thời gian dài. Chế độ Massage giúp xóa tan cơn đau và hồi phục cơ hiệu quả.

NECK AND SHOULDER: CHẾ ĐỘ MASSAGE CỔ VÀ VAI


Để giảm đau nhức ở phần cổ và vai nên chế độ Massage tập trung vào 80% phần cổ và vai. Với việc Massage 1 cách tập trung và chủ động giúp cho người dùng xóa tan những cơn đau nhức ở những vùng này.

WAIST AND SPINE: CHẾ ĐỘ MASSAGE HÔNG VÀ XƯƠNG SỐNG

Chế độ Massage tập trung làm giảm những cơn đau nhức ở vùng thắt lưng

CHẾ ĐỘ MASSAGE THỦ CÔNG:

Vào MENU chọn MANUAL để lựa chọn chế độ Massage thủ công, bấm lựa chọn các chế độ gồm MODE – Phương pháp Massage, PART – Khu vực Massage, WIDTH – Độ rộng bi lăn, SPEED – Tốc độ, ROLLER – Bi lăn, ZERO – Massage không trọng lực.

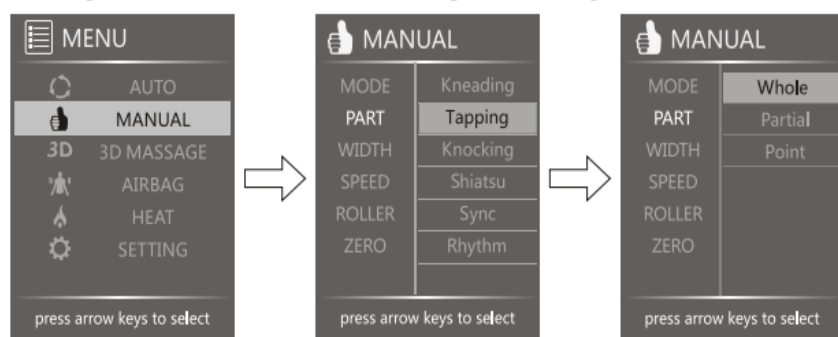


MODE: Lựa chọn các phương pháp Massage bao gồm: Kneadng - Xoa, Tapping – Vỗ, Knocking: Đấm, Shiatsu – Miết, chế độ Sync và Rhythm.


PART: Lựa chọn Massage các bộ phận cơ thể: Toàn bộ, từng phần và 1 vị trí.

WIDTH: Lựa chọn độ rộng của bi lăn : Rộng, vừa và hẹp

SPEED: Tốc độ 1-6

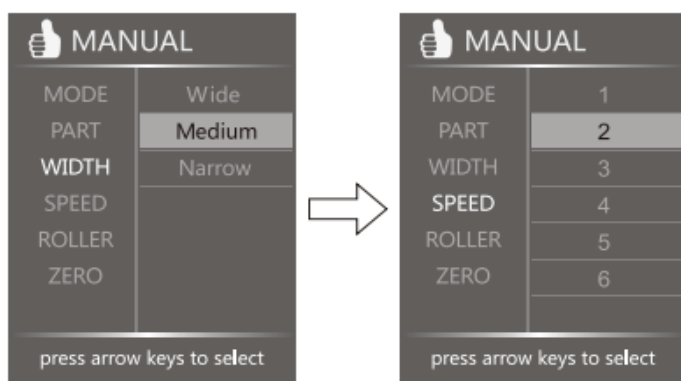


ROLLER: Sử dụng chế độ Massage con lăn với 3 tốc độ khác nhau. Sử dụng phím lên xuống để điều chỉnh tốc độ hoặc ngưng sử dụng tính năng này.

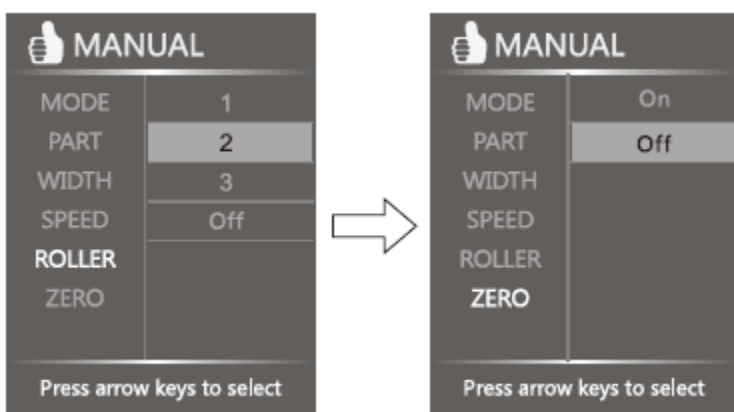

ZERO: Chế độ Massage không trọng lực, tạo cảm giác thả lỏng và thư giãn toàn bộ các bộ phận trên cơ thể. Chế độ Massage giúp người sử dụng tạo cảm giác ở trong không gian môi trường không trọng lực.

3D MESSAGE: CHẾ ĐỘ MESSAGE 3D


Chọn MENU, chọn 3D, điều chỉnh 3D MODE (Deep shiatsu –chế độ Massage vuốt ấn sâu, healthy Breath – Thư giãn, Massage extend – Kéo dẫn), FORCE (Cường độ từ 1-5), PART (Vị trí Massage: Toàn thân, từng phần và điểm).

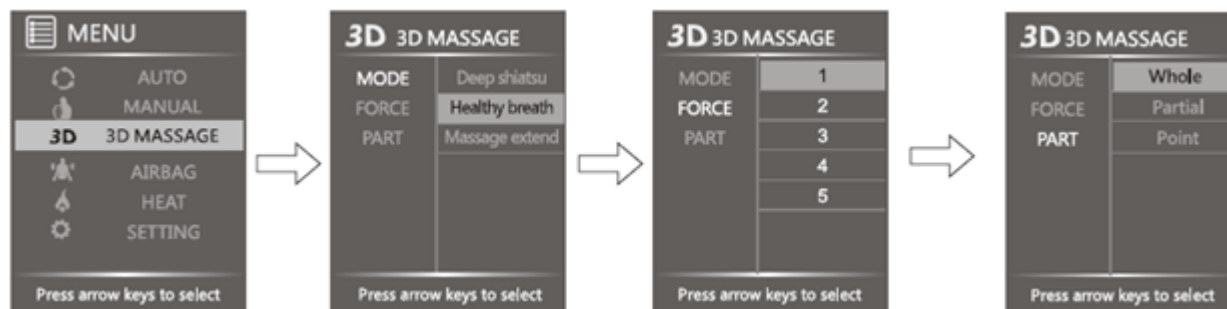

Deep shiatsu: Chế độ vuốt ấn sâu ở phần lưng trong vòng 10 phút.


Healthy breath: Chế độ Massage thư giãn, hoạt động trong 5 phút theo nhịp thở vào và ra.

Massage extend: Chế độ kéo dẫn diễn ra trong 5 phút.

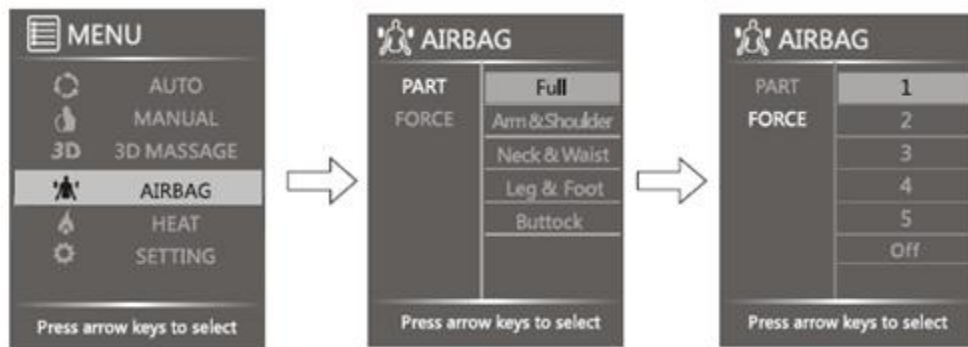

AIRBAG – CHẾ ĐỘ MASSAGE TÚI KHÍ

Vào MENU chọn AIRBAG: Lựa chọn PART (Vị trí) và FORCE (Cường độ)

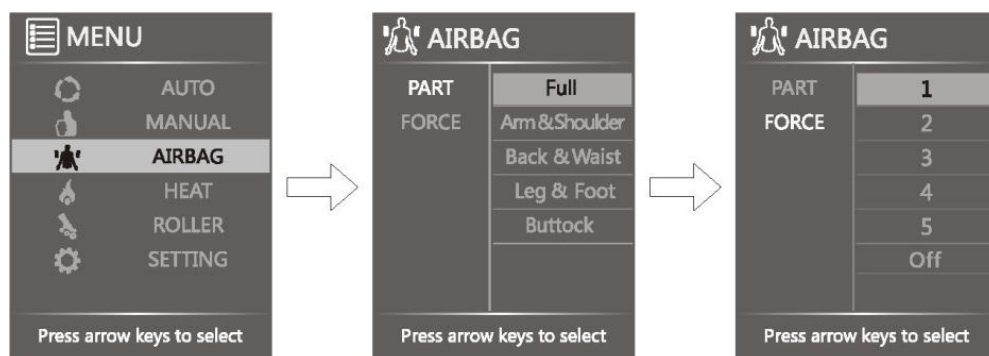


PART: Lựa chọn các vị trí Massage túi khí gồm có: Toàn bộ cơ thể, Vai và cánh tay, lưng và hông, chân, mông.

FORCE: Cường độ 1-5

HEAT – CHẾ ĐỘ MASSAGE NHIỆT:

Vào MENU chọn HEAT để vào chế độ nhiệt. Bấm nút này lần nữa để tắt chế độ nhiệt.

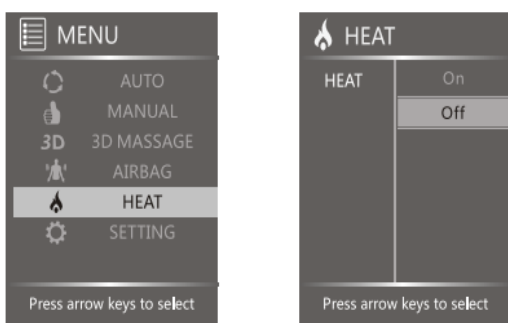


SETTING – CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT:

Vào SETTING để vào chế độ cài đặt của máy, có tùy chỉnh TIME - Thời gian, LANGUAGE - Ngôn ngữ, BLUETOOTH – Không dây.

TIME: Lựa chọn 10 phút/ 20 phút/ 30 phút máy sẽ tự ngưng hoạt động theo thời gian cài.

LANGUAGE: Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị.

BLUETOOTH: Bật và tắt kết nối Bluetooth.

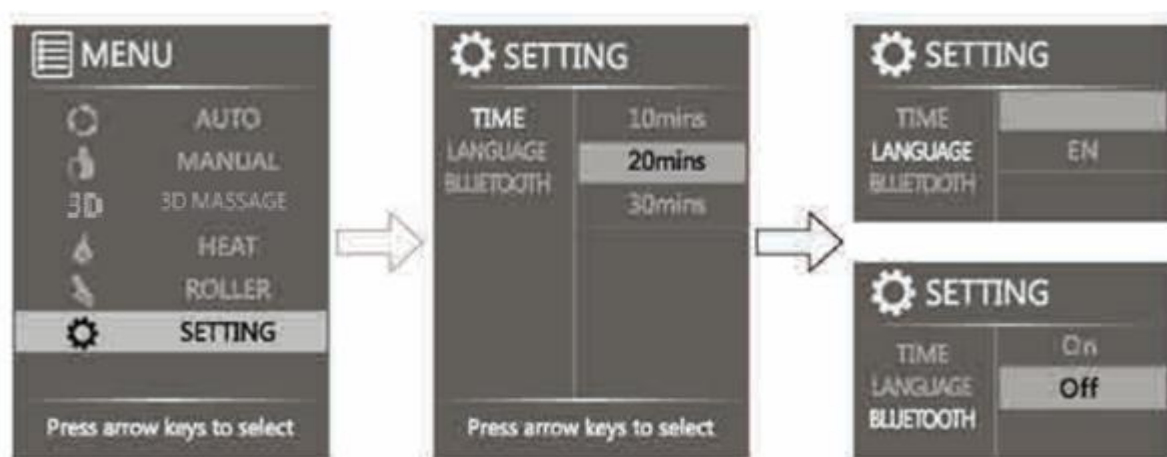


VỊ TRÍ ĐẶT GHẾ:

Khoảng cách an toàn đối với các ngoại vi tới ghế massage.

► Khoảng cách phần chân tối thiểu 60cm từ tường hoặc các vật bất kì.

Phía trước: tối thiểu 30cm

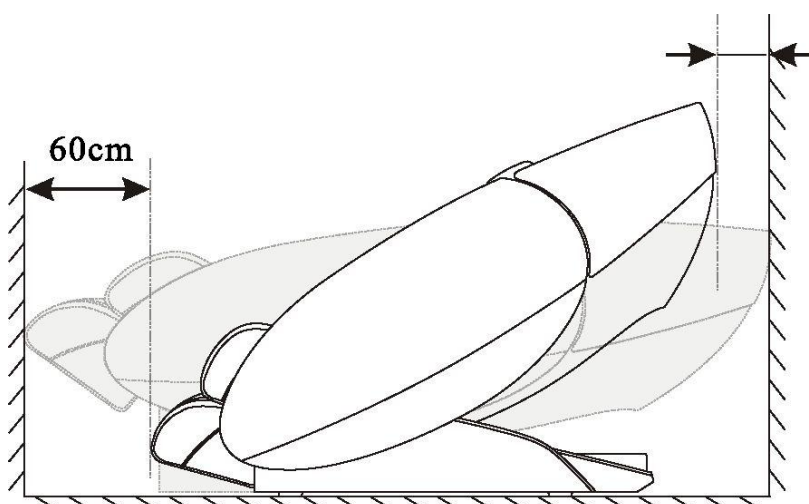

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Máy không khởi động được nguồn	Ổ cắm trực trực	Cắm lại vào nguồn điện mới
	Chưa khởi động công tắc nguồn	Khởi động công tắc nguồn
	Cầu chì không hoạt động	Thay thế loại cầu chì mới cùng loại
Một số bài hát không hoạt động bình thường	Sai định dạng nhạc MP3	Thay thế bằng định dạng nhạc MP3
Có chuông cảnh báo khi sử dụng chức năng nghe nhạc	Ổ đĩa U kết nối không tốt	Khởi động lại ổ đĩa U
	Ổ đĩa U đang cài đặt	Đợi 5-10 giây
	Định dạng nhạc trong ổ đĩa U chưa phù hợp	Kiểm tra và thay thế lại định dạng nhạc MP3
Không có âm thanh tại loa hoặc tai phone	Âm lượng điều chỉnh ở mức nhỏ nhất	Tăng âm lượng
Túi khí ở vùng ghế ngồi hoặc vùng chân không hoạt động	Ống dẫn khí không hoạt động	Kiểm tra gắn lại ống dẫn khí hoặc vệ sinh ống dẫn khí
Hiện thị lỗi cảnh báo từ E0-E7 trên màn hình hiển thị	Ghế massage tự động chuyển sang chế độ cảnh báo an toàn khi sản phẩm gặp sự cố	Tắt nguồn của sản phẩm và gọi cho trung tâm bảo hành sản phẩm gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: MK-8800

Thương hiệu và công nghệ Hàn Quốc

Điện áp: 220-240 V, 50-60 Hz

Công suất: 240W

Buheung Medical

HỆ THỐNG SHOWROOM TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY

Miền Nam

Showroom Công Ty: 235-237 đường số 9A, Ấp 4, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, HCM. Điện thoại: 1800 6977

Vincom B tầng B2: Vincom Center Lê Thánh Tôn- Lý Tự Trọng, Quận 1, HCM.

Vincom 3/2: 3C Đường 3/2, Quận 10, TPHCM

Big C quận 7: Nguyễn Thị Thập, quận 7, HCM

Lotte Mart Phú Thọ tầng 3: Cổng đường Lê Đại Hành và 3/2, Quận 11, HCM.

Lotte Mart Nam Sài Gòn tầng 2: Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập, P.Tân Hưng, Quận 7, HCM.

Cao Phong Q3, tầng trệt: Siêu thị điện máy Chợ Lớn Cách Mạng Tháng Tám, Quận Tân Bình, HCM.

Cao Phong Q5 tầng trệt: Siêu thị điện máy Chợ Lớn - chung cư Hùng Vương, Tân Đà, Quận 5, HCM.

Cao Phong Q7 tầng trệt: Siêu thị điện máy Chợ Lớn - TTTM Crecent Mall, Quận 7, HCM

Miền Bắc

Showroom tại Hà Nội: Địa chỉ: Số 10, Lô 2B, Đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 37855966.

Mê Linh HD: Lô 2 P.Hà Cầu, KHC Mới, Quận Hà Đông, Hà Nội

Pico Nguyễn Trãi: 76 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Pico Tây Sơn: 324 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook/buheung.vn hoặc website công ty www.buheung.vn