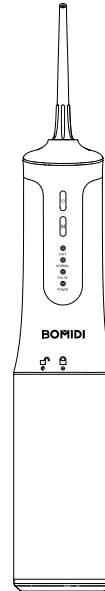


# BOMIDI

Máy tắm nước cầm tay  
DE02



Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và lưu giữ sách hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm.

## LƯU Ý AN TOÀN QUAN TRỌNG

Cần tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản khi sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt khi có trẻ em ở gần.

## VUI LÒNG ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

**Cảnh báo: Để giảm nguy cơ điện giật và các rủi ro khác, vui lòng chú ý các điều sau:**

1. Không đặt sản phẩm vào lửa hoặc nguồn nhiệt.
2. Không ngâm sản phẩm trong nước để tránh hỏng thiết bị.
3. Không cầm hoặc rút sạc khi tay ướt. Khi cầm hoặc rút sạc, hãy cầm vào đầu phích cắm, không kéo dây sạc.
4. Không làm hỏng, phá hủy hoặc tự ý sửa đổi bộ sạc; không kéo căng, bẻ cong hoặc xoắn dây sạc; không đặt vật nặng lên dây sạc hoặc để dây sạc bị kẹt giữa các vật.
5. Không làm rơi hoặc đưa vật lạ vào bất kỳ khe hở nào của sản phẩm.
6. Không đặt sản phẩm, bộ sạc hoặc dây sạc trên bề mặt nóng.
7. Không đặt sản phẩm ở nơi nóng, ẩm ướt và tránh ánh nắng trực tiếp.
8. Trước khi vệ sinh và bảo dưỡng, hãy đảm bảo thiết bị đã tắt và không đang sạc.

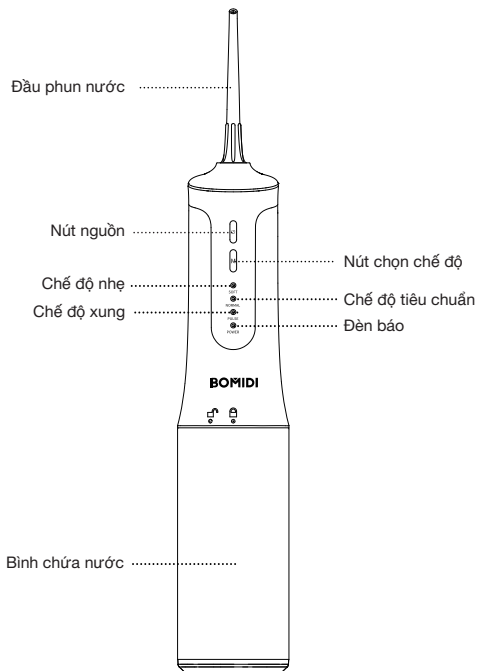
## CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM NGUY CƠ BỎNG, ĐIỆN GIẬT, CHÁY VÀ CHẤN THƯƠNG CÁ NHÂN, HÃY LƯU Ý CÁC ĐIỀU SAU:

1. Không sử dụng sản phẩm theo bất kỳ cách nào khác ngoài hướng dẫn trong sách này.
2. Không sử dụng sản phẩm khi chưa lắp đầu phun (nozzle).
3. Những người (bao gồm trẻ em) không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức phải sử dụng, vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm dưới sự giám sát và hướng dẫn của người giám hộ.
4. Đặt sản phẩm ngoài tầm với của trẻ em và trẻ nhỏ, không sử dụng như đồ chơi.
5. Người bị bệnh nha chu hoặc đã phẫu thuật răng miệng trong vòng 2 tháng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
6. Không tự ý tháo rời sản phẩm hoặc thay đổi các bộ phận để tránh hư hỏng hoặc nguy hiểm.
7. Không làm nóng sản phẩm trên 40°C. Không đổ nước nóng vào bình chứa hoặc vệ sinh miệng bằng nước nóng để tránh bị bỏng.
8. Không sử dụng sản phẩm cho mục đích khác ngoài vệ sinh răng miệng.
9. Không ấn đầu phun quá mạnh vào nướu hoặc răng để tránh gây tổn thương.
10. Không sử dụng sản phẩm ngoài trời khi có bình xịt (aerosol) hoặc ở nơi cung cấp oxy.
11. Vui lòng tháo bỏ tất cả đồ trang sức răng miệng trước khi sử dụng sản phẩm.
12. Không sử dụng iodine, nước muối hoặc tinh dầu đậm đặc không tan trong nước trong thiết bị. Các chất lỏng này có thể làm giảm hiệu suất và tuổi thọ sản phẩm.
13. Không đổ nước súc miệng trực tiếp vào sản phẩm. Nếu cần sử dụng, hãy pha loãng theo tỷ lệ phù hợp trước khi cho vào bình.

### 1. Thông số sản phẩm

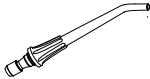

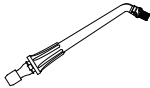
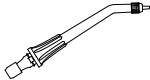
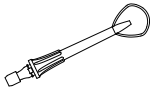
Tên sản phẩm	Máy tăm nước cầm tay
Model sản phẩm	DE02
Công suất định mức	8W
Chuẩn chống nước	IPX7
Thời gian sạc	3 giờ
Thông số đầu vào	5V / 1A

## 2. Mô tả sản phẩm



## Hướng dẫn

Máy tăm nước BOMIDI đi kèm: 2 đầu phun tiêu chuẩn và 4 đầu phun chức năng.

Đầu phun tiêu chuẩn	Công dụng
	Làm sạch răng miệng thông thường
Đầu phun chính nha	Công dụng
	Làm sạch kẽ răng cho niềng răng / mắc cài
Đầu chải mảng bám	Công dụng
	Làm sạch implant, răng giả, cầu răng và mão răng
Đầu phun túi nha chu	Công dụng
	Làm sạch viền nướu
Đầu làm sạch lưỡi	Công dụng
	Làm sạch lưỡi, loại bỏ mùi hôi miệng

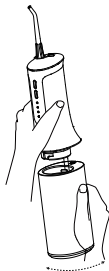
### 3. Các bước vận hành

Khởi động: Rất quan trọng! Vui lòng sạc đầy thiết bị trước khi sử dụng lần đầu, kết nối cáp USB với cổng sạc và bật nguồn điện. Không sử dụng sản phẩm khi đang sạc.

#### Bước 1: Đổ nước vào bình chứa


Xoay bình chứa nước ngược chiều kim đồng hồ và kéo xuống để tháo ra. Bạn có thể đổ nước vào bình chứa. Sau khi đổ nước, căn chỉnh bình nước với vị trí khớp khóa và xoay theo chiều kim đồng hồ để lắp lại.

**Lưu ý:** Đảm bảo thiết bị đã tắt nguồn khi đổ nước vào bình.



#### Bước 2: Lắp đầu phun

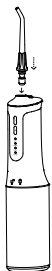Lắp đầu phun vào lỗ ở phía trên thân máy. Khi nghe thấy tiếng “click”, nghĩa là đã lắp thành công. Bạn có thể xoay đầu phun để điều chỉnh hướng dòng nước. Nếu cần thay đầu phun, nhấn và giữ nút tháo đầu phun, sau đó kéo đầu phun ra.




Lắp vào



Thay thế

#### Bước 3: Chọn chế độ

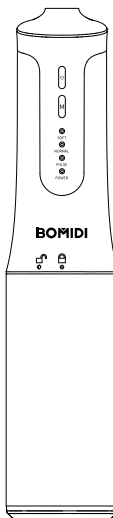Sản phẩm này có 3 chế độ. Khi thiết bị đang tắt, bạn có thể chọn chế độ mong muốn bằng cách nhấn nút chọn chế độ. Chức năng của từng chế độ như sau:



1. Nhấn nút nguồn để vào chế độ hoạt động; nhấn nhanh nút chọn chế độ để chuyển lần lượt giữa 3 chế độ: mức thấp -> mức cao -> chế độ xung. Trong bất kỳ chế độ hoạt động nào, nếu nhấn nhanh nút nguồn, thiết bị sẽ tắt.

2. Khi đang sạc, đèn báo sẽ hiển thị trạng thái sạc. Đèn báo sạc sẽ sáng đỏ, xanh dương và xanh lá tương ứng với mức pin 35%, 70%, 100%. Khi sạc đầy, đèn báo sẽ sáng liên tục và tự tắt sau 20 phút. Trong quá trình sử dụng, khi pin yếu, đèn báo nhấp nháy màu đỏ để nhắc người dùng sạc. Khi hết pin, đèn báo sẽ nhấp nháy nhanh và thiết bị tự động tắt sau một chu kỳ hoạt động. Sau khi sạc, thiết bị có thể tiếp tục hoạt động bình thường.

3. Thời gian hoạt động khoảng 2 phút. Có chức năng ghi nhớ chế độ: nếu sử dụng liên tục hơn 10 giây ở bất kỳ chế độ nào, lần bật máy tiếp theo sẽ tự động vào chế độ đã sử dụng trước đó, nếu không thì mặc định là chế độ tiêu chuẩn. Khi bật máy lần đầu, thiết bị mặc định ở chế độ tiêu chuẩn.

4. Khi sử dụng, đặt thiết bị thẳng đứng để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất. Sau khi chạy 120 giây, thiết bị sẽ tự động tắt.

#### Bước 4: Chuẩn bị trước khi sử dụng

Trước khi sử dụng, hãy hơi cúi người về phía bồn rửa, đưa đầu phun vào miệng và hướng vào răng, nướu hoặc vùng cần làm sạch. Xoay đầu phun để điều chỉnh hướng dòng nước, đảm bảo dòng nước vuông góc với vùng cần làm sạch. Mở miệng hơi hé để nước có thể chảy ra ngoài dễ dàng.

Mẹo sử dụng:

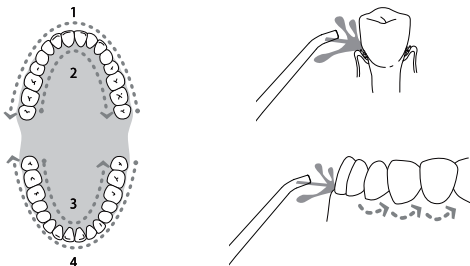
Khi sử dụng máy tăm nước lần đầu, hãy bắt đầu với mức áp lực nước thấp nhất, sau đó tăng dần khi miệng đã quen. Trong quá trình sử dụng, bạn có thể cảm thấy hơi ngứa hoặc chảy máu nướu nhẹ, điều này là bình thường và thường sẽ hết sau 1-2 tuần.

#### Bước 5: Sử dụng

Nhấn và giữ nút nguồn trong 0,6 giây để khởi động thiết bị. Nếu cần tạm dừng, hãy nhấn nhanh nút nguồn. Nếu muốn tiếp tục sử dụng, hãy nhấn và giữ nút nguồn lại. Sản phẩm có chức năng tự động tắt sau 120 giây. Trước khi tự động tắt, nước trong bình có thể đã hết. Nếu muốn tiếp tục sử dụng, hãy nhấn và giữ nút nguồn để tắt máy, thêm nước vào bình, sau đó bật lại thiết bị. Sau khi sử dụng, vui lòng tắt thiết bị.


Mẹo làm sạch hiệu quả:

Để đạt hiệu quả làm sạch tốt nhất, bắt đầu từ răng hàm (răng phía sau) rồi di chuyển dần đến răng phía trước. Khi làm sạch, giữ đầu phun nghiêng khoảng 90° dọc theo viền nướu và dừng lại một chút giữa các kẽ răng. Khi sử dụng, khép môi nhẹ để tránh nước bắn ra ngoài, nhưng vẫn để một khe hở nhỏ để nước trong miệng có thể chảy xuống bồn rửa.



#### Bước 6: Kết thúc sử dụng

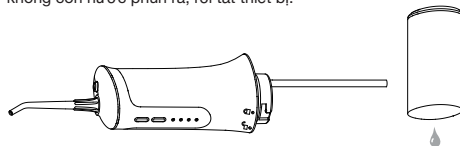Sau khi sử dụng, tháo bình chứa nước, đổ hết nước còn lại trong bình. Sau đó bật thiết bị để xả hết lượng nước còn lại bên trong cho đến khi không còn nước phun ra, rồi tắt thiết bị.



#### Bước 7: Sạc pin

Đèn báo mặc định có màu xanh dương. Trong quá trình sử dụng, đèn báo luôn sáng. Khi đèn báo chuyển sang màu đỏ, nghĩa là pin yếu. Trong trạng thái pin yếu, nếu nhấn nút nguồn, thiết bị sẽ không khởi động và đèn báo sẽ nhấp nháy, nhắc người dùng sạc pin kịp thời. Khi đang sạc, đèn báo sẽ hiển thị các mức pin: Đỏ: 35%, Xanh dương: 70%, Xanh lá: 100%. Khi sạc đầy, đèn báo sẽ sáng liên tục và tự động tắt sau 20 phút.

#### 4. Vệ sinh và bảo dưỡng

Vệ sinh thân máy:

1. Sử dụng nước sạch hoặc dung dịch tẩy rửa trung tính để vệ sinh sản phẩm. Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn hoặc có tính mài mòn. Không dùng nước nóng trên 50°C để vệ sinh bất kỳ bộ phận nào của thiết bị để tránh làm hỏng sản phẩm và giảm hiệu suất.
2. Không ngâm máy tăm nước trong nước. Nếu cần, hãy dùng khăn mềm thấm dung dịch tẩy rửa nhẹ để lau bề mặt thiết bị.

Vệ sinh bình chứa nước:

1. Tháo bình chứa nước.
2. Rửa bên trong bình bằng nước sạch ở nhiệt độ phòng, không sử dụng chất tẩy rửa.
3. Sau khi vệ sinh, lắp lại bình chứa nước.

2. Hướng đầu phun vào bồn rửa, bật thiết bị và để máy chạy cho đến khi hết nước. Sau đó đổ nước ấm sạch vào bình chứa và lặp lại các bước trên để làm sạch. Quy trình vệ sinh này nên được thực hiện mỗi 1–3 tháng để đảm bảo hiệu suất hoạt động của sản phẩm.

## 5. Bảo vệ môi trường

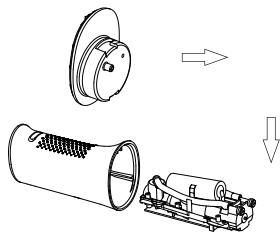
### Bảo quản pin

Pin phải được sạc đầy trước khi sử dụng lần đầu. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng sạc đầy pin trước khi cất giữ.

Để kéo dài tuổi thọ pin, hãy sạc pin ngay khi pin yếu.

### Tái chế pin

Sản phẩm này sử dụng pin sạc có thể tái chế. Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng, hãy tháo pin ra trước khi bỏ thiết bị và tái chế hoặc xử lý pin theo quy định quản lý rác thải tại địa phương.



## 6. Khắc phục sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Rò rỉ nước giữa đầu phun và thân máy	Vòng đệm trong giá đỡ đầu phun bị hỏng hoặc đầu phun lắp chưa đúng	Liên hệ nhà bán hàng để lắp lại đầu phun đúng cách
Rò rỉ nước tại cửa hút của bơm	Vòng đệm bị hỏng hoặc có tạp chất tại cửa hút	Liên hệ nhà bán hàng
Rò rỉ nước tại bình chứa	Vòng đệm bị hỏng	Thay vòng đệm và liên hệ nhà bán hàng
Áp lực nước yếu	Điện áp pin thấp	Sạc đầy pin trước khi sử dụng
Thiết bị không khởi động	Điện áp pin thấp	Sạc đầy pin hoặc liên hệ nhà bán hàng
Thiết bị không phun nước	Sử dụng lần đầu hoặc lâu ngày không sử dụng	Thêm một lượng nước thích hợp vào cổng lắp đầu phun, sau đó lắp đầu phun và sử dụng

## Phiếu bảo hành

Vui lòng giữ gìn phiếu bảo hành này cẩn thận như giấy chứng nhận bảo hành. Trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường, nếu sản phẩm gặp vấn đề về vật liệu hoặc lỗi sản xuất, hoặc xảy ra hư hỏng, công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ hậu mãi sau khi kiểm tra xác nhận.

Tên sản phẩm	
Tên khách hàng	
Model	
Số điện thoại	
Lý do trả / đổi	
Ngày bảo hành	

Khách hàng cần tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng khi vận hành sản phẩm. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào đối với người hoặc tài sản do sử dụng không đúng cách, ngừng hoạt động, hư hỏng hoặc lỗi của sản phẩm.

Các trường hợp sau không thuộc phạm vi bảo hành:

1. Dịch vụ bảo hành sẽ không được cung cấp nếu model sản phẩm, số seri hoặc hóa đơn của đại lý được ủy quyền bị thay đổi hoặc tẩy xóa.
2. Bảo hành không áp dụng cho hư hỏng hoặc tổn thất do lỗi của người dùng, sử dụng sai cách, bất cẩn, tự ý sửa chữa / thay đổi hoặc sử dụng sản phẩm cho mục đích khác với thiết kế ban đầu.
3. Bảo hành không bao gồm bề mặt ngoài, vỏ máy, các bộ phận tiêu hao hoặc phụ kiện.
4. Khách hàng cần mang sản phẩm đến bộ phận dịch vụ của công ty để sửa chữa và nhận lại sản phẩm tại cùng địa điểm sau khi sửa. Các linh kiện bị thay thế sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty.
5. Nếu khách hàng không nhận lại sản phẩm trong vòng 30 ngày sau khi được thông báo, công ty có quyền xử lý sản phẩm đó và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh.
6. Tất cả các điều khoản có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có tranh chấp, công ty có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.