

halio

Máy rửa mặt massage Halio Multi-task Cleansing and Massaging Device



Chuẩn IPX7 chống nước



Silicon y tế




Ánh sáng đỏ và xanh



Sạc từ tính

halio-sonic.com

1 Tổng quan máy

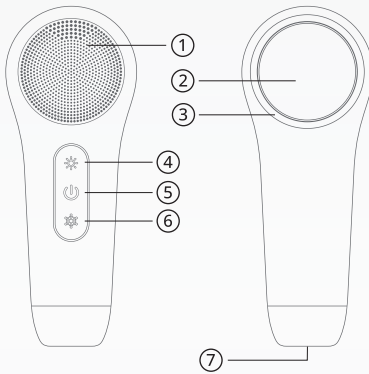

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Mặt silicon rửa mặt | 5. Nút nguồn |
| 2. Mặt kim loại massage | 6. Nút bông tuyết |
| 3. Ánh sáng đỏ/ ánh sáng xanh | 7. Cổng sạc từ tính |
| 4. Nút mặt trời | |

2 Cách sử dụng

- Bước 1:** Rửa mặt với nước và thoa sữa rửa mặt lên mặt.
- Bước 2:** Nhấn nút bật/tắt trong 3 giây để bật máy, mặc định chế độ rung nhẹ, nhấn lại nút để điều chỉnh mức độ rung (nhẹ hoặc trung bình).
- Bước 3:** Làm ướt đầu silicon và bắt đầu làm sạch mặt từng khu vực, sử dụng chuyển động tròn để đạt hiệu quả làm sạch cao nhất.
- Bước 4:** Nhấn nút bật/tắt trong 3 giây để tắt thiết bị và rửa mặt lại với nước.
- Bước 5:** Thoa serum và kem dưỡng ẩm, sau đó bật máy và nhấn nhanh nút mặt trời để bật chế độ nhiệt nóng, ánh sáng đỏ được mặc định bật, nhấp 2 lần để bật/tắt ánh sáng đỏ. Sử dụng chế độ nhiệt nóng (có hoặc không có ánh sáng đỏ) giúp giãn nở lỗ chân lông và giúp da hấp thụ các sản phẩm chăm sóc da tốt hơn.
- Bước 6:** Sau khi sản phẩm đã được hấp thụ, hãy chuyển sang chế độ nhiệt lạnh bằng cách nhấn nhanh nút bông tuyết, ánh sáng xanh được bật mặc định và nhấp 2 lần để bật/tắt ánh sáng xanh. Sử dụng chế độ nhiệt lạnh (có hoặc không có ánh sáng xanh) để giúp thu nhỏ lỗ chân lông và làm săn chắc làn da của bạn.
- Bước 7:** Nhấn nút bật/tắt trong 3 giây để tắt thiết bị.

Lưu ý:

Chế độ nhiệt lạnh và ánh sáng xanh sẽ tự tắt sau 3 phút sử dụng.
 Da cực kỳ nhạy cảm không nên sử dụng hằng ngày.
 Không sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có tính axit vì có thể sẽ làm hỏng bề mặt silicon.
 Bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, không tiếp xúc với nhiệt độ cao.