

halio

Máy Tắm Nước Cầm Tay 6 Chế Độ Halio Professional Cordless Oral Irrigator




Chuẩn IPX7 chống nước



Sóng Sonic

6 regime **8** pressure


6 chế độ
8 áp lực nước

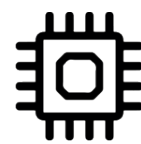

Ghi nhớ tự động

halio-sonic.com

1 Tổng quan máy

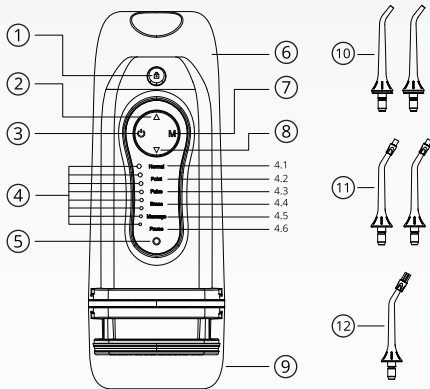

1. Nút khoá/mở khoá đầu phun
2. Nút tăng áp suất
3. Nút nguồn
4. Màn hình hiển thị các chế độ
- 4.1 Bình thường
- 4.2 Vi điểm
- 4.3 Theo nhịp điệu
- 4.4 Niềng răng
- 4.5 Mát-xa

- 4.6 Tạm
5. Đèn báo sạc pin
6. Bình chứa nước
7. Nút chọn chế độ
8. Nút giảm áp suất
9. Vỏ bảo vệ bên dưới
10. Đầu phun thông thường
11. Đầu phun chỉnh nha
12. 1 đầu bàn chải mảng bám

2 Cách sử dụng

Bước 1:

- Đảm bảo sản phẩm được sạc đầy trước lần sử dụng đầu tiên.
- Bật sản phẩm lên bằng cách nhấn nút nguồn.

Bước 2:

- Đổ đầy nước vào bình nước bằng cách: tháo bình nước ra, đổ nước vào rồi lắp lại bình nước.
 - + Tháo bình chứa nước bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ
 - + Tháo vỏ bảo vệ bên dưới bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ
 - + Sau khi lắp đầu phun vào thân máy, dựng đứng, điều chỉnh góc đầu phun 360* để phù hợp với nhu cầu của bạn
 - + Đổ đầy bình nước đến mức nước cao nhất và lắp vào thân máy, lúc này máy đã sẵn sàng để sử dụng
- Không khởi động thiết bị trong quá trình làm đầy nước.

Bước 3: Cài đặt / Thay thế đầu phun:

- Lắp đầu phun vào vị trí ở giữa đầu trên cùng của máy tăm nước.
- Để thay thế hoặc tháo đầu phun, nhấn nút khóa / mở đầu phun.

Bước 4: Chọn chế độ:

- Chạm vào nút chọn chế độ trên tay cầm để chọn chế độ làm sạch phù hợp.

Lưu ý: Giữ thiết bị thẳng đứng với đầu phun hướng về răng. Giữ sản phẩm vuông góc với miệng để có hiệu quả tốt nhất khi sử dụng. Há miệng nhẹ để nước có thể chảy ra ngoài.

Bước 5: Tắt sau khi sử dụng, vệ sinh và lau khô kỹ trước khi cất giữ.