

halio

Bàn Chải Điện Làm Sạch Sâu Halio Sonic SmartClean Electric Toothbrush



Sóng sonic
42.000 nhịp/ phút



Chuẩn IPX7
Chống nước



Ngừng sau 2 phút
Chuyển vùng sau 30 giây

4


modes

4 chế độ

Chải răng đa dạng

halio-sonic.com

1 Tổng quan máy

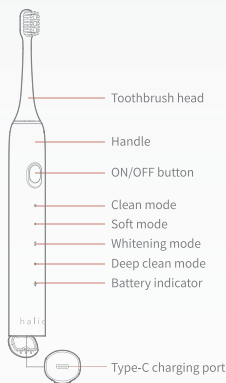


1. Đầu bàn chải
2. Tay cầm
3. Nút bật/ tắt
4. Chế độ làm sạch
5. Chế độ nhẹ
6. Chế độ làm trắng

7. Chế độ sạch sâu
8. Báo pin
9. Cổng sạc Type-C

2 Cách sử dụng

- Sử dụng củ sạc có thông số đầu ra output DC 5V-1A để sạc máy
- Làm ướt đầu bàn chải
- Lấy kem đánh răng cỡ hạt đậu lên đầu bàn chải
- Giữ nhẹ phím nguồn khoảng 1-2s để khởi động
- Nhấn nhẹ nút nguồn để chọn chức năng phù hợp
- Chia hàm răng thành góc phần tư trên, dưới, phải, trái, giữ bàn chải ở một góc 45 độ với đường viền nướu, nhẹ nhàng di chuyển từ bề mặt ngoài rồi đi sâu vào bề mặt trong răng
- Cứ sau 30s máy sẽ ngắt khoảng 0.5 - 1s để nhắc chuyển khu vực chải răng. Sau 2 phút máy sẽ tự động tắt (ngoại trừ chế độ làm sạch sâu 3 phút)
- Súc miệng lại với nước sạch
- Tháo đầu bàn chải, vệ sinh lại bằng nước sạch, để tại nơi khô ráo

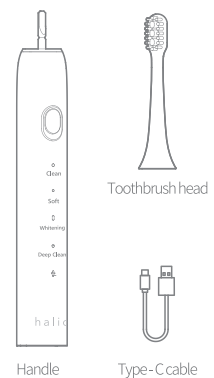

halio

Bàn Chải Điện Làm Sạch Sâu Halio Sonic SmartClean Electric Toothbrush




Sóng sonic
42.000 nhịp/ phút


Chuẩn IPX7
Chống nước



Ngưng sau 2 phút
Chuyển vùng sau 30 giây

4
modes
4 chế độ
Chải răng đa dạng

halio-sonic.com

halio

1 Tổng quan máy

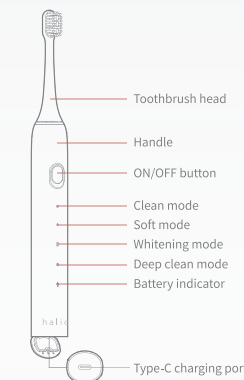


1. Đầu bàn chải
2. Tay cầm
3. Nút bật/ tắt
4. Chế độ làm sạch
5. Chế độ nhẹ
6. Chế độ làm trắng

7. Chế độ sạch sâu
8. Báo pin
9. Cổng sạc Type-C

2 Cách sử dụng

- Sử dụng củ sạc có thông số đầu ra output DC 5V-1A để sạc máy
- Làm ướt đầu bàn chải
- Lấy kem đánh răng cỡ hạt đậu lên đầu bàn chải
- Giữ nhẹ phím nguồn khoảng 1-2s để khởi động
- Nhấn nhẹ nút nguồn để chọn chức năng phù hợp
- Chia hàm răng thành góc phần tư trên, dưới, phải, trái, giữ bàn chải ở một góc 45 độ với đường viền nướu, nhẹ nhàng di chuyển từ bề mặt ngoài rồi đi sâu vào bề mặt trong răng
- Cứ sau 30s máy sẽ ngắt khoảng 0.5 - 1s để nhắc chuyển khu vực chải răng. Sau 2 phút máy sẽ tự động tắt (ngoại trừ chế độ làm sạch sâu 3 phút)
- Súc miệng lại với nước sạch
- Tháo đầu bàn chải, vệ sinh lại bằng nước sạch, để tại nơi khô ráo

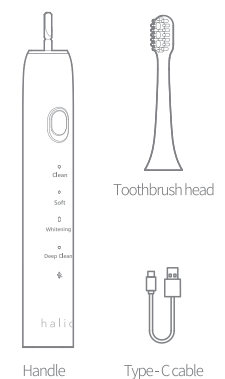

halio-sonic.com