


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## BÚA MASSAGE

MODEL: MK405

### I. Giới thiệu sản phẩm

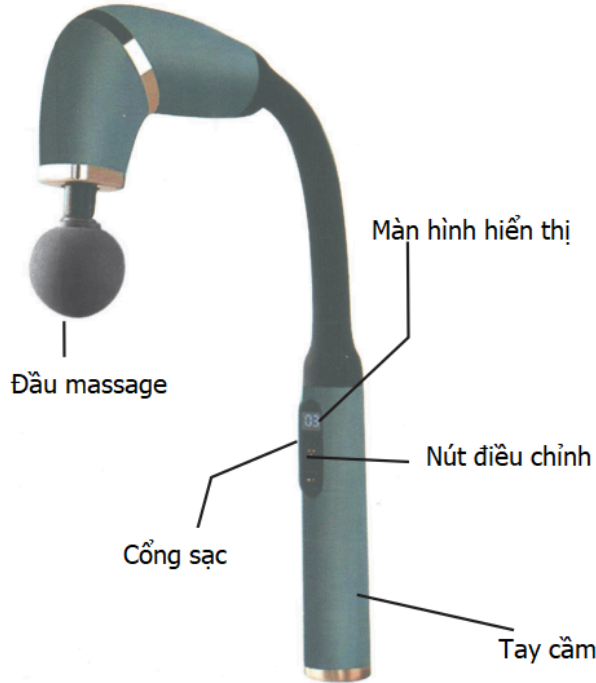

### II. Cách sử dụng

- Gắn đầu massage vào theo nhu cầu từng vùng massage
- Đầu tròn: dành cho các vùng cơ lớn.
- Đầu chữ U: dành cho cột sống, cổ.
- Đầu dẹt: dành cho tất cả các bộ phận của cơ thể.
- Đầu hình đạn: dành cho khớp, mô sâu và các điểm massage nhỏ
- Nhấn và giữ nút nguồn để mở máy, chế độ mặc định P1 được cài đặt sẵn.
- Nhấn nút nguồn để điều chỉnh cấp độ từ 1 đến 6.
- Nhấn nút P để điều chỉnh sang chế độ P2 và P3, ở 2 chế độ này không điều chỉnh được cấp độ.
- Nhấn và giữ nút nguồn để tắt máy, hoặc máy tự động tắt sau 15 phút hoạt động.

### III. Bảo quản và vệ sinh

- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nguồn nhiệt hoặc nơi ẩm ướt
- Có thể lau bằng vải ẩm mềm xung quanh sản phẩm để làm sạch.
- Dung lượng pin: 1500mAh, cắm sạc 2,5 giờ để sạc đầy. Có thể sử dụng trong 1 giờ liên tục đến khi hết pin.

QUAY VIDEO MỞ HỘP HOẶC TRẢI  
NGHIỆM SẢN PHẨM ĐỂ NHẬN  
QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT



QUÉT QR ĐỂ XEM ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM  
BẢO HÀNH GẦN NHẤT

Hotline: 1900 1738  
Website: [www.KachiVietnam.com](http://www.KachiVietnam.com)

