


# BOMIDI

## Gối massage

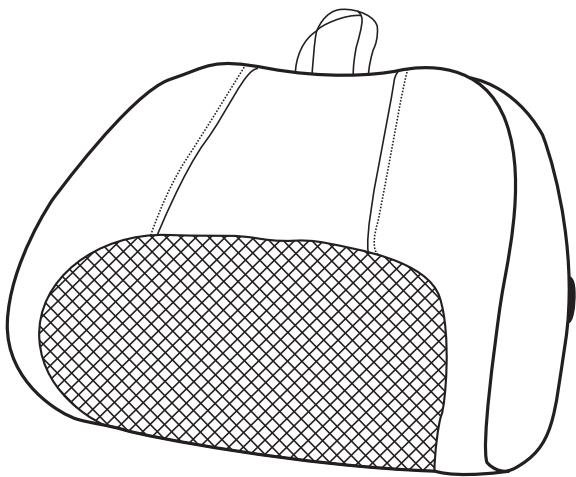


Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và lưu lại để tham khảo sau này.

## Kính gửi người dùng:

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Để sử dụng sản phẩm hiệu quả hơn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Việc bạn bắt đầu sử dụng sản phẩm đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu cách vận hành thiết bị này! Lưu ý: Công ty chúng tôi có quyền điều chỉnh, cải tiến sản phẩm và nội dung hướng dẫn mà không cần thông báo trước. Màu sắc và ngoại hình sản phẩm thực tế có thể khác với hình minh họa.


## Chi tiết sản phẩm

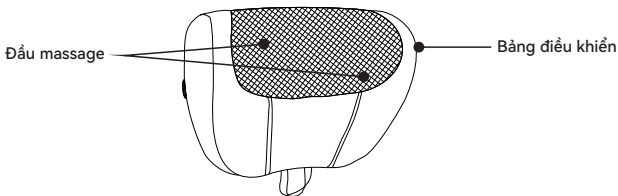

## Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Gối massage
Mã sản phẩm	MP1 pro
Điện áp định mức	7.4V
Công suất định mức	23W
Thời gian tự động	10 phút

## Chi tiết bảng điều khiển

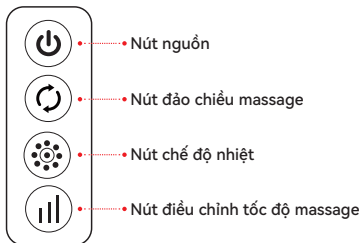

## Hướng dẫn sử dụng

---

### 1. Nút nguồn

Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây để bật thiết bị. Nhấn nhanh nút nguồn để tắt thiết bị.

### 2. Nút đảo chiều

Có ba chế độ: Cài đặt mặc định là xoay theo một chiều trong 1 phút, sau đó tự động chuyển hướng xoay. Nhấn một lần để đảo chiều xoay đầu massage. Nhấn thêm lần nữa để xoay trong 1 giây, sau đó tạm dừng 1 giây.

### 3. Nút chế độ nhiệt

Có 3 mức: Mức 1: Tắt chế độ nhiệt (đèn không sáng). Mức 2: Đèn báo nhiệt sáng đỏ nhạt. Mức 3: Đèn báo nhiệt sáng đỏ rực (mặc định khi khởi động).

### 4. Nút điều chỉnh tốc độ

Có 3 mức tốc độ: chậm, trung bình và nhanh. Cài đặt mặc định là trung bình.

## Lưu ý

---

1. Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy sạc đầy pin trước lần sử dụng đầu tiên.

2. Thời lượng pin sẽ thay đổi tùy theo trọng lượng người sử dụng. Ví dụ: Người 85kg ở mức 1: dùng khoảng 9 lần. Người 75kg ở mức 1: dùng khoảng 10 lần. Người 85kg ở mức 3: dùng khoảng 6 lần. Người 75kg ở mức 3: dùng khoảng 7 lần

3. Áp lực do trọng lượng khác nhau cũng ảnh hưởng đến thời lượng pin. Số liệu trên chỉ mang tính tham khảo.

## Trạng thái sạc pin

---

1. Khi sạc, đèn báo đỏ sẽ nhấp nháy. Khi sạc đầy, đèn sẽ sáng đỏ liên tục.

2. Khi bật máy, đèn báo đỏ luôn sáng.

3. Khi pin yếu, đèn đỏ sẽ nhấp nháy.

4. Chế độ nhiệt nóng:

Mức 1: Đèn xanh sáng, đèn nhiệt tắt

Mức 2: Đèn đỏ sáng, đèn nhiệt đỏ nhạt

Mức 3: Đèn đỏ sáng, đèn nhiệt đỏ rực

## Cảnh báo an toàn

---

1. Nếu bạn có vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

2. Người mắc bệnh tim nên tham khảo bác sĩ trước khi dùng.

3. Không để trẻ em sử dụng sản phẩm một mình.

4. Không sử dụng trên cùng một vùng cơ thể quá 15 phút.

5. Sử dụng trong thời gian dài có thể gây quá nhiệt và làm giảm tuổi thọ sản phẩm. Nếu quá nhiệt, hãy ngừng sử dụng cho đến khi máy nguội.

6. Không sử dụng trên vùng da sưng, viêm hoặc bị tổn thương.

7. Đây không phải là thiết bị y tế chuyên dụng và không được dùng để thay thế cho việc điều trị y tế.

8. Không nên sử dụng trước khi đi ngủ vì sản phẩm có tác dụng kích thích và có thể gây khó ngủ.
9. Không sử dụng sản phẩm khi đang ngủ.
10. Người bị khiếm khuyết vận động, thần kinh hoặc trí tuệ hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm liên quan không được sử dụng sản phẩm trừ khi có người giám sát đảm bảo an toàn.
11. Bề mặt sản phẩm có thể nóng. Những người nhạy cảm với nhiệt nên cẩn thận khi sử dụng.

## Các lỗi phổ biến và cách khắc phục

---

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Máy hoàn toàn không hoạt động và đèn báo nguồn không sáng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Có mất điện không?</li> <li>2. Bộ sạc đã được cắm đúng chưa?</li> <li>3. Phích cắm điện có đúng không?</li> <li>4. Đã bật nút chức năng sau khi cắm điện chưa?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dừng lại sau khi có điện</li> <li>2. Đổi ổ cắm khác</li> <li>3. Cắm lại phích điện đúng cách</li> <li>4. Bật nút nguồn/chức năng</li> </ol>
Massage và lăn rất chậm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Có mất điện không?</li> <li>2. Nhiệt độ mô cơ quá cao, máy tự động ngắt để bảo vệ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dừng lại sau khi có điện</li> <li>2. Chờ máy nguội rồi khởi động lại</li> </ol>
Phát ra tiếng ồn lớn	Máy mới đang trong giai đoạn chạy rà (break-in period)	Sau khoảng 10 giờ sử dụng, tiếng ồn sẽ giảm dần một cách tự nhiên

# Phiếu bảo hành

Vui lòng giữ kỹ thẻ bảo hành này. Đây là căn cứ để bảo hành, bảo trì sản phẩm. Trong trường hợp sử dụng và bảo quản đúng cách, nếu sản phẩm gặp sự cố do lỗi vật liệu hoặc quy trình sản xuất, công ty sẽ cung cấp dịch vụ hậu mãi sau khi xác minh.

Tên sản phẩm	
Họ và tên	
Mã sản phẩm	
Số điện thoại	
Lý do đổi/trả	
Ngày bảo hành/bảo trì	

Khách hàng cần tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng khi vận hành sản phẩm. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào đối với người dùng hoặc tài sản, nếu phát sinh do sử dụng sai cách, sự cố, hỏng hóc hay ngừng hoạt động của thiết bị.

Trường hợp không được bảo hành:

1. Sản phẩm bị từ chối bảo hành nếu model, số serial hoặc hóa đơn từ đại lý ủy quyền bị chỉnh sửa hoặc không còn rõ ràng.
2. Bảo hành không áp dụng cho hư hại do tác nhân con người, sử dụng sai mục đích, thiếu bảo dưỡng, tự ý sửa chữa/thay đổi cấu trúc, hoặc dùng sai thiết kế ban đầu.
3. Bảo hành không áp dụng cho các bề mặt ngoài, tủ vỏ, linh kiện tiêu hao, hoặc phụ kiện đi kèm.