


BOMIDI

Gối Massage Hồng Ngoại
MP1

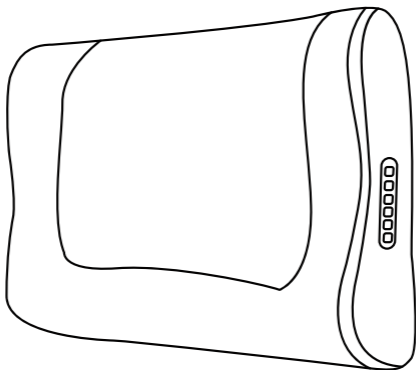

Hướng dẫn sử dụng

Kính gửi Quý khách hàng

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và mua sản phẩm của chúng tôi. Để sử dụng hiệu quả hơn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Khi bạn bắt đầu sử dụng, điều đó đồng nghĩa rằng bạn đã hiểu rõ cách dùng sản phẩm. Lưu ý: Công ty chúng tôi có quyền cải tiến sản phẩm và nội dung hướng dẫn sử dụng mà không cần thông báo trước. Màu sắc và hình dáng sản phẩm thực tế có thể khác so với hình minh họa.

Hướng dẫn an toàn quan trọng

1. Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
2. Người mắc bệnh tim cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.
3. Không để trẻ em sử dụng một mình.
4. Không sử dụng liên tục trên cùng một vị trí quá 15 phút.
5. Sử dụng trong thời gian dài có thể khiến thiết bị quá nhiệt và giảm tuổi thọ. Nếu xảy ra, hãy ngừng sử dụng cho đến khi máy nguội.
6. Không sử dụng trực tiếp lên vùng da sừng, viêm hoặc bị tổn thương.
7. Sản phẩm này không phải thiết bị y tế chuyên dụng, không thay thế cho điều trị bằng thuốc.

Người mẫn cảm hoặc kém nhạy cảm với nhiệt cần thận trọng khi sử dụng.

8. Không sử dụng trước khi đi ngủ, vì sản phẩm này có tác dụng kích thích, có thể khiến khó đi vào giấc ngủ.

9. Không sử dụng khi đang ngủ.


10. Người bị hạn chế về vận động, cảm giác, tinh thần hoặc thiếu kiến thức, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm không nên dùng thiết bị này, trừ khi có người hướng dẫn và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng.

11. Bề mặt thiết bị có thể nóng, người mẫn cảm hoặc kém nhạy cảm với nhiệt cần thận trọng khi sử dụng.

Thông số sản phẩm

Tên sản phẩm	Gối massage hồng ngoại
Mã sản phẩm	MP1
Điện áp định mức	12V
Công suất định mức	24W
Thời gian hẹn giờ tự động	15 phút

Hướng dẫn vận hành

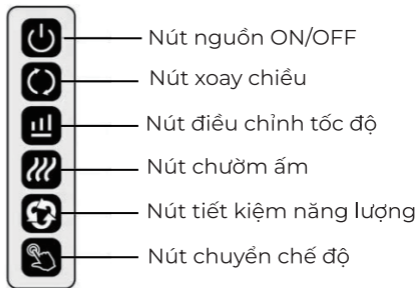

Nút nguồn ON/OFF

1. Nhấn nhanh nút nguồn để bật thiết bị.

Cài đặt mặc định: Thiết bị bật, hẹn giờ 15 phút, chế độ nhiệt cao, ba đầu massage hoạt động, tốc độ ổn định.

2. Nhấn nhanh nút nguồn lần nữa để tắt thiết bị.

Nút xoay chiều

Khi thiết bị đang hoạt động, nhấn nhanh nút điều chỉnh tốc độ để thay đổi cường độ và tốc độ massage tùy theo nhu cầu.

Nút điều chỉnh tốc độ

Khi thiết bị đang hoạt động, nhấn nhanh nút điều chỉnh tốc độ để thay đổi cường độ massage (cường độ thấp, cường độ trung bình, cường độ cao, v.v.)

Nút chườm ấm

Khi thiết bị bật, chức năng sưởi ấm được kích hoạt

mặc định. (nhấn một lần để tắt chế độ sưởi ấm)

Nút tiết kiệm năng lượng

Nhấn nút tiết kiệm năng lượng để kích hoạt chế độ tiết kiệm điện. Đèn hiển thị mờ hơn, đầu massage tự động xoay ở chế độ nhẹ hơn, giảm tiêu thụ năng lượng. Nhấn lại một lần nữa để tắt chế độ tiết kiệm năng lượng và trở về hoạt động bình thường.

Nút chuyển chế độ

Nhấn nút chế độ để chuyển đổi giữa các chế độ massage khác nhau, phù hợp với nhu cầu của từng vùng cơ thể.

Phiếu bảo hành

1. Chính sách bảo hành chỉ áp dụng đối với lỗi do nhà sản xuất.
2. Không áp dụng bảo hành cho các trường hợp như hư hỏng do tác động cơ học, rơi vỡ, sử dụng sai cách hoặc tự ý tháo rời, sửa chữa.
3. Khi cần sửa chữa hoặc bảo hành, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ được uỷ quyền của hãng

Tên sản phẩm	
Mã sản phẩm	
Tên khách hàng	
Số điện thoại	
Lý do hoàn trả/đổi hàng	
Ngày mua hàng	