



Ghé thăm chúng tôi tại

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2023 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A Ngày 23 tháng 3



PHILIPS

Máy massage
cổ và vai

Máy massage cổ

PPM3306



Hướng Dẫn Sử Dụng

Mục Lục

1 Tính năng sản phẩm

2 Các thành phần

3 Cách sử dụng


4 Các thông số kỹ thuật

5 Bảng kê hàng hóa

1 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm này sử dụng bốn đầu massage silicon để rung cổ ở tần số phù hợp, đồng thời kết hợp với chức năng chườm nóng để giảm co thắt và đau cơ cổ. Sản phẩm này phù hợp để massage và bảo trì cổ cho các nhóm người khác nhau.

2 Các thành phần

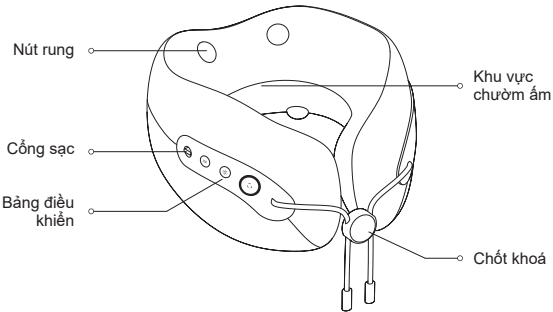

3 Cách sử dụng

Thận trọng trước khi sử dụng:

- 1. Kiểm tra xem thiết bị và các phụ kiện của nó đã đầy đủ chưa.
- 2. Tháo mặt dây và các phụ kiện trong quá trình sử dụng, tránh làm ảnh hưởng đến bộ phận massage.
- 3. Quấn máy mát xa cổ quanh cổ (hoặc các bộ phận khác cần mát xa) và cố định bằng chốt khóa.

Hoạt động

Nút chức năng nguồn

- 1. Nhấn và giữ nút chức năng nguồn trong 2 giây để khởi động thiết bị, sau đó thiết bị sẽ mặc định vào Chế độ rung 1 (đèn trắng). Ở chế độ này, cường độ rung thấp (đèn xanh lục) và chức năng chườm nóng hoạt động ở mức thấp (đèn xanh lục và chuông kêu một lần).
- 2. Nhấn và giữ nút chức năng nguồn trong 2 giây để tắt thiết bị, sau đó tắt cả chế độ rung và chườm nóng, đồng thời đèn báo tắt (còi liên tục kêu).
- 3. Nhấn nút chức năng nguồn để chuyển đổi các chế độ rung theo chu kỳ.
 - Chế độ 1: Đèn báo chuyển sang màu trắng và còi kêu 1 lần.
 - Chế độ 2: Đèn báo chuyển sang màu xanh băng và còi kêu 2 lần.
 - Chế độ 3: Đèn báo chuyển sang màu xanh đậm và còi kêu 3 lần.

Nút chườm nóng

- Ở trạng thái bật nguồn, nhấn nút nén ấm để chuyển các mức chườm nóng.
 - Chườm nóng ở mức thấp (Đèn báo chuyển sang màu xanh và chuông reo một lần).
 - Chườm nóng ở mức cao (Đèn báo chuyển sang màu cam và chuông kêu hai lần).
 - Tắt chức năng chườm nóng (Đèn báo tắt và còi kêu trong 2 giây).


Nút cường độ rung

Ở trạng thái bật nguồn, nhấn nút cường độ rung để chuyển đổi cường độ rung.

- Cường độ rung thấp (Đèn báo chuyển sang màu xanh và còi kêu 1 lần).
- Cường độ rung cao (Đèn báo chuyển sang màu cam và chuông kêu hai lần).
- Tắt rung (Đèn báo tắt và còi vẫn kêu).

Hướng dẫn sạc

1. Ở trạng thái sạc, các nút sẽ không hoạt động nữa.
2. Khi pin yếu, cả chức năng rung và chuông nóng sẽ tự động tắt, đèn báo màu xanh sẽ nhấp nháy và còi sẽ nhắc bạn sạc sản phẩm. Tại thời điểm sạc, đèn báo màu xanh đậm sẽ nhấp nháy chậm, các biểu tượng khác sẽ tắt và không thể khởi động sản phẩm. Mất khoảng 4 giờ để sạc đầy sản phẩm. Khi sản phẩm được sạc đầy, đèn báo màu xanh đậm vẫn sáng.

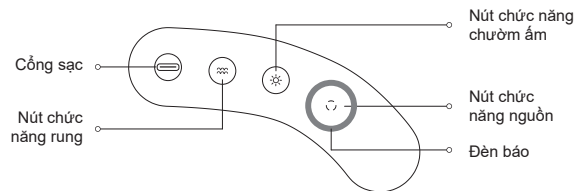

4 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy massage cổ Philips
Mã sản phẩm	PPM3306
Điện áp hoạt động	3.7V
Công suất hoạt động	5W
Điện áp sạc	5V
Dòng điện sạc	1A
Kích thước sản phẩm	215×221×126mm
Trọng lượng	Khoảng 0.43kg
Dung lượng pin	2000mAh
Thời gian sạc	Khoảng 4 tiếng
Cổng sạc	Type-C

5 Danh sách đóng gói

Máy massage	1×	Cáp sạc USB	1×
Hướng dẫn nhanh	1×	Hướng dẫn sử dụng	1×
Túi đựng	1×		