

PHILIPS

Súng Massage


Súng Massage

PPM7331




Hướng Dẫn Sử Dụng


1. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, cần sạc thiết bị trong 3 giờ để đảm bảo hiệu suất tối ưu. Không bật nguồn hoặc sử dụng thiết bị trong quá trình sạc.

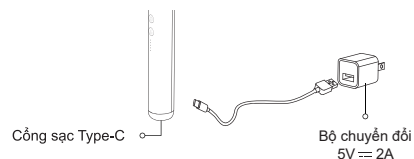

2. Lựa chọn đầu massage chuyên dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng, sau đó lắp vào vị trí lắp đầu massage của thiết bị. Xoay nhẹ và ấn chắc để đảm bảo đầu massage được cố định đúng vị trí.

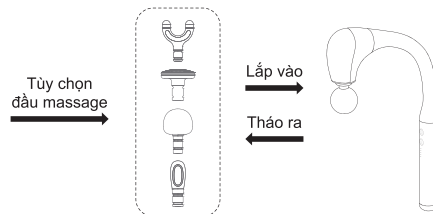

3. Nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để bật súng massage. Khi khởi động, thiết bị sẽ mặc định hoạt động ở Cấp độ 1.

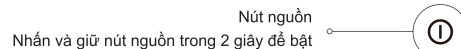


4. Nhấn nút điều chỉnh mức độ để thay đổi tốc độ rung. Đèn báo sẽ tự động sáng hoặc tắt theo mức rung được chọn.



Nút điều chỉnh mức độ

5. Đặt đầu massage vào khu vực cần massage, điều chỉnh lực nhấn phù hợp và di chuyển một cách chậm rãi.

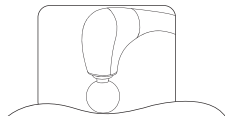


6. Thiết bị được cài đặt mặc định tự động tắt sau 15 phút massage.

Nếu cần dừng giữa chừng, nhấn và giữ nút nguồn để tắt thiết bị.

7. Dây đèn báo nhấp nháy nhanh, cho biết dung lượng pin dưới 10% và thiết bị cần được sạc ngay. Khi các đèn báo sáng liên tục trong quá trình sạc, nghĩa là thiết bị đã được sạc đầy.

(Đang sạc: Đèn báo nhấp nháy
Sạc đầy: Đèn báo sáng liên tục)

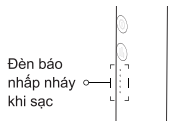

Đèn báo
nhấp nháy
khi sạc

- ❗ 1. Thiết bị không thể sử dụng trong khi đang sạc.
- 2. Khuyến nghị bắt đầu từ Cấp độ massage thấp nhất khi sử dụng lần đầu.
- 3. Không sử dụng thiết bị trên các khu vực có ít cơ, như cột sống, cổ, đầu, khớp, v.v.
- 4. Không sử dụng thiết bị trên cùng một khu vực trong thời gian dài để tránh gây chấn thương cơ thể.
- 5. Không sử dụng thiết bị quá 30 phút mỗi lần.



Ghé thăm chúng tôi tại

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của hướng dẫn này và sản phẩm thực tế. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2024 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A Tháng 3 năm 2024

