

PHILIPS

Máy Massage
Lưng & Eo


Máy Massage Đa
Chức Năng

PPM8502



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đặt sản phẩm thẳng đứng trên ghế chắc chắn. Kết nối sản phẩm với bộ đổi nguồn và cắm phích vào ổ điện để cấp nguồn. Ngồi thoải mái trên đệm massage, lưng tựa sát vào sản phẩm.

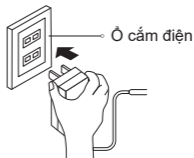

Nút nguồn

2. Nhấn nút trên điều khiển để bật hoặc tắt nguồn.

3. Nhấn các nút vùng massage để chọn massage toàn lưng, lưng trên hoặc lưng dưới, nhằm xác định phạm vi massage.

Nút vùng massage



Điểm cố định

4. Nhấn để giữ massage tại một vị trí; nhấn nút "▼▲" để điều chỉnh vị trí lên hoặc xuống.

5. Nhấn để kích hoạt chế độ rung ghế. Nhấn ngắn để chuyển lần lượt: Thấp → Trung bình → Cao → Tắt rung.


Nút rung





6. Nhấn để kích hoạt chức năng sưởi ấm (Không thể bật sưởi nếu chức năng massage chưa được kích hoạt).

7. Nhấn ngắn để cài đặt thời gian massage: 5 → 10 → 15 phút.

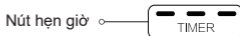

8. Trình diễn nhanh các chức năng khác nhau. Sau khi hoàn tất, thiết bị sẽ tự động tắt.

- !**
1. Không sử dụng trong vòng 1 giờ sau khi ăn hoặc khi đang say rượu/bia.
 2. Nếu cảm thấy bất kỳ khó chịu nào trong quá trình sử dụng, ngừng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.
 3. Khi sử dụng lần đầu, hãy bắt đầu với mức cường độ thấp nhất, sau đó chỉ tăng dần khi đã thích nghi.
 4. Mỗi lần sử dụng mặc định 15 phút; hãy điều chỉnh thời lượng hoặc tần suất phù hợp với thể trạng của bạn.



Ghé thăm chúng tôi tại:

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

©2024 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A NOV 25

