




**GHẾ MASSAGE
S88 SONIC WAVE**

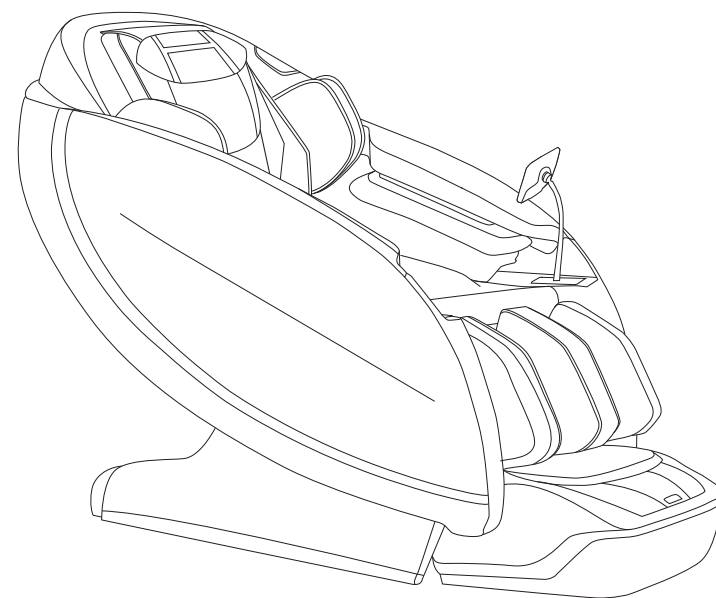


MỤC LỤC

Vui lòng đọc và tuân thủ tất cả các hướng dẫn an toàn và vận hành được liệt kê trong sách hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng. Luôn luôn phải cẩn trọng khi sử dụng.

Hướng Dẫn An Toàn -----	2-3
Thông Số Sản Phẩm -----	4
Thành Phần Sản Phẩm -----	5-6
Lắp Đặt Ghế -----	7-8
Trước Khi Sử Dụng -----	9
Bảng Điều Khiển -----	10-11
Hướng Dẫn Sử Dụng -----	12-19
Xử Lý Sự Cố -----	20
Bảo Dưỡng -----	21


Lưu ý: Công ty chúng tôi có quyền thay đổi thiết kế và mô tả của sản phẩm này mà không cần thông báo trước.

BẢO DƯỠNG

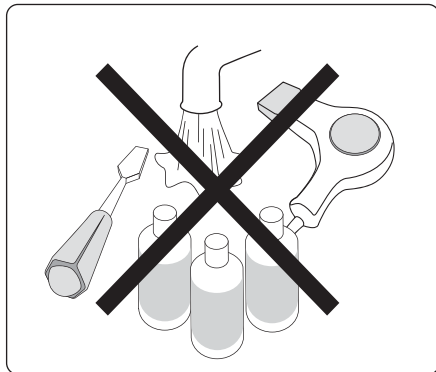

- Tắt nguồn và rút phích cắm trước khi làm sạch ghế massage, không chạm vào phích cắm điện khi tay ướt.

- Sử dụng khăn khô để lau mồ hôi và các vết bẩn khác.

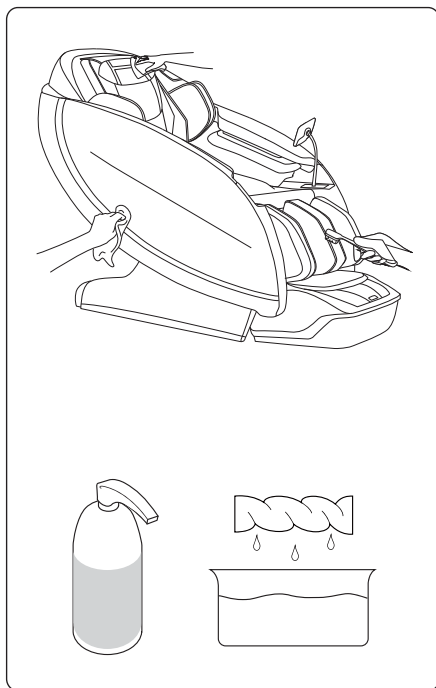

- Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa trung tính để lau và chà nhẹ ghế.

- Lưu thông khí sau khi làm sạch.

- Không sử dụng nước để làm sạch ghế.

- Không sử dụng cồn, benzen, hoặc các chất tương tự để làm sạch.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Cảnh báo:

Phích cắm điện phải được cắm chắc chắn vào ổ cắm. Nếu kết nối phích cắm không đúng cách có thể gây nguy hiểm về điện giật. Không được tự ý sửa đổi phích cắm điện đi kèm với sản phẩm. Hãy đảm bảo rằng ổ cắm điện được lắp đặt đúng cách bởi thợ điện có trình độ. Khi sử dụng ghế massage, cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản để giảm thiểu nguy cơ bị điện giật.

1. Đảm bảo phích cắm điện được cắm chặt vào ổ cắm điện phù hợp.
2. Cắm phích điện đúng cách vào ổ cắm phù hợp để giảm thiểu nguy cơ chập điện và cháy nổ.
3. Luôn rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm ngay sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh ghế.
4. Không sử dụng ghế massage ở những nơi có độ ẩm cao.
5. Không sử dụng ghế massage ngoài trời và tránh những nơi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
6. Nếu nguồn điện bị cắt trong khi đang sử dụng, hãy tắt công tắc nguồn và rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm để tránh hư hỏng khi điện phục hồi.
7. Không sử dụng ghế massage nếu dây điện bị ẩm hoặc hư hỏng.
8. Không cắm hoặc rút phích cắm điện khi tay ướt.
9. Cần có người giám sát khi trẻ em hoặc người khuyết tật sử dụng ghế massage.
10. Chỉ sử dụng ghế massage cho mục đích sử dụng như đã mô tả trong hướng dẫn sử dụng.
11. Không sử dụng bất cứ linh kiện nào không phải từ nhà máy.
12. Không đứng, ngồi hoặc nhảy lên phần kê chân, tựa lưng và tay vịn khi ghế đang hoạt động để tránh bị thương.
13. Không cố đứng lên tựa lưng và tựa tay ghế để tránh gây thương tích cho người.
14. Không ngủ gật trong quá trình massage.
15. Luôn giữ cho ghế massage sạch sẽ và không cho bất kỳ vật thể nào vào các khe hở của ghế.
16. Không di chuyển ghế massage bằng cách kéo dây nguồn.
17. Luôn kiểm tra xem bề mặt ghế có bị rách hoặc xước trước khi sử dụng. Nếu phát hiện bất kỳ vết rách nào trên vải bọc tựa lưng, đừng sử dụng ghế và hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa.
18. Sản phẩm này được thiết kế dành cho sử dụng gia đình.
19. Đối với những người đang mắc bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

20. Các trường hợp sau đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng:

- Người mắc bệnh ung thư
- Người mắc bệnh tim
- Phụ nữ đang mang thai, trong kỳ kinh nguyệt hoặc vừa mới sinh
- Người bị loãng xương
- Người đang dùng thuốc hoặc điều trị y tế
- Người bị chấn thương cột sống do tai nạn hoặc bệnh tật
- Người mà bị loãng xương

21. Nếu bạn cảm thấy đau trong quá trình sử dụng, hãy dừng việc sử dụng ghế massage ngay lập tức. Nếu có bất kỳ chấn thương nào xảy ra, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức.

22. Không massage các vùng bị sưng hoặc viêm của cơ thể.

23. Sản phẩm này không phải là thiết bị chuyên dụng mà chỉ được thiết kế để cung cấp một liệu pháp massage thoải mái. Không sử dụng sản phẩm này như một phương pháp điều trị y tế.

24. Mỗi buổi massage không nên kéo dài quá 30 phút. Massage khu vực mục tiêu chỉ trong 15 phút, việc massage quá nhiều có thể dẫn đến quá nhiệt, do đó làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

25. Không vận hành khi có các sản phẩm dạng aerosol (phun) hoặc nơi có oxy đang được sử dụng.

26. Ghế massage không thích hợp cho trẻ em dưới 14 tuổi.

LƯU Ý:

Thiết bị này không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) có giảm năng lực cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kiến thức về cách sử dụng ghế massage trừ khi họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi chuyên gia hoặc phụ tùng có sẵn từ nhà sản xuất hoặc đơn vị dịch vụ.

Ghế massage nóng lên trong quá trình hoạt động. Những người nhạy cảm với nhiệt phải thận trọng khi sử dụng ghế massage.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu âm thanh hoặc chuyển động không bình thường, vui lòng tắt ghế massage và rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ thêm.

Vấn đề	Giải pháp
Ghế massage được kết nối với nguồn điện nhưng không hoạt động	1. Kiểm tra xem phích cắm có được cắm chặt không và ổ điện có hoạt động đúng không. 2. Kiểm tra xem công tắc chính có ở vị trí "I" không.
Điều khiển từ xa có phản hồi, nhưng ghế massage không hoạt động	Ghế massage có thể tự động tắt do các thiết bị bảo vệ quá nhiệt. Vui lòng tắt nguồn và để ghế nguội trong 30-50 phút.
Cả điều khiển từ xa và ghế massage đều không phản hồi	Ghế massage tự động chuyển sang chế độ "dừng hoàn toàn" hoặc "nhàn rỗi" khi chương trình massage hoàn tất. Vui lòng nhấn nút nguồn một lần nữa để khởi động lại ghế.


HƯỚNG DẪN AN TOÀN

8. Phương pháp phát nhạc Bluetooth trong ghế massage:
A: Kết nối: Mở chức năng Bluetooth trên điện thoại di động hoặc iPad, sau đó tìm kiếm thiết bị gần đó. Chọn thiết bị phát nhạc Bluetooth của ghế massage và kết nối với nó.

B: Phát nhạc: Sau khi kết nối, bạn có thể phát nhạc từ điện thoại di động hoặc phần mềm phát nhạc của ứng dụng.

Chú ý: Vui lòng tắt kết nối Bluetooth khi không sử dụng để các thiết bị khác có thể kết nối dễ dàng.


9. Sau khi sử dụng

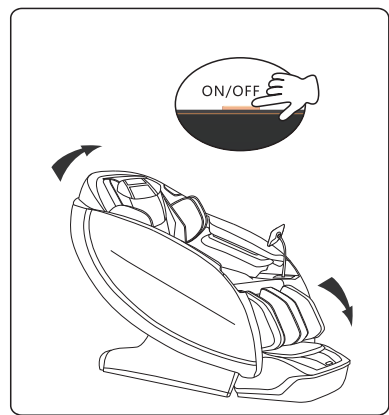

1) Nhấn nút nguồn để tắt ghế massage.

*Đảm bảo không có vật cản xung quanh ghế massage.

2) Đứng dậy khi ghế massage trở về trạng thái ban đầu

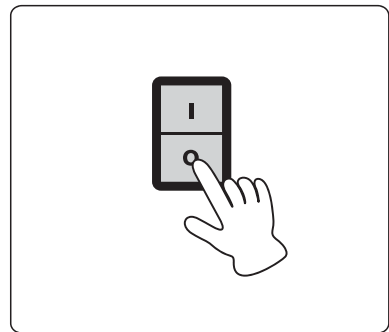

3) Tắt công tắc nguồn chính.

4) Rút phích cắm khỏi ổ điện.

*Vui lòng không kéo dây nguồn để rút phích cắm.


*Không rút phích cắm khi tay đang ướt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

MÔ TẢ	THÔNG SỐ
Tên sản phẩm	Ghế massage
Mã sản phẩm	S88 Sonic Wave
Điện áp định mức	220-240V~
Tần số định mức	50Hz
Công suất tiêu thụ định mức	205W
Kích thước thùng carton	Thân chính: 1460(L)x856(W)x1245(H)mm Chân: 580(L)x555(W)x640(H)mm
Trọng lượng	Thân chính: N.W.:122kg G.W.:144kg Chân: N.W.:23kg G.W.:26kg


CÁC THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM

Sơ Đồ Thân Máy

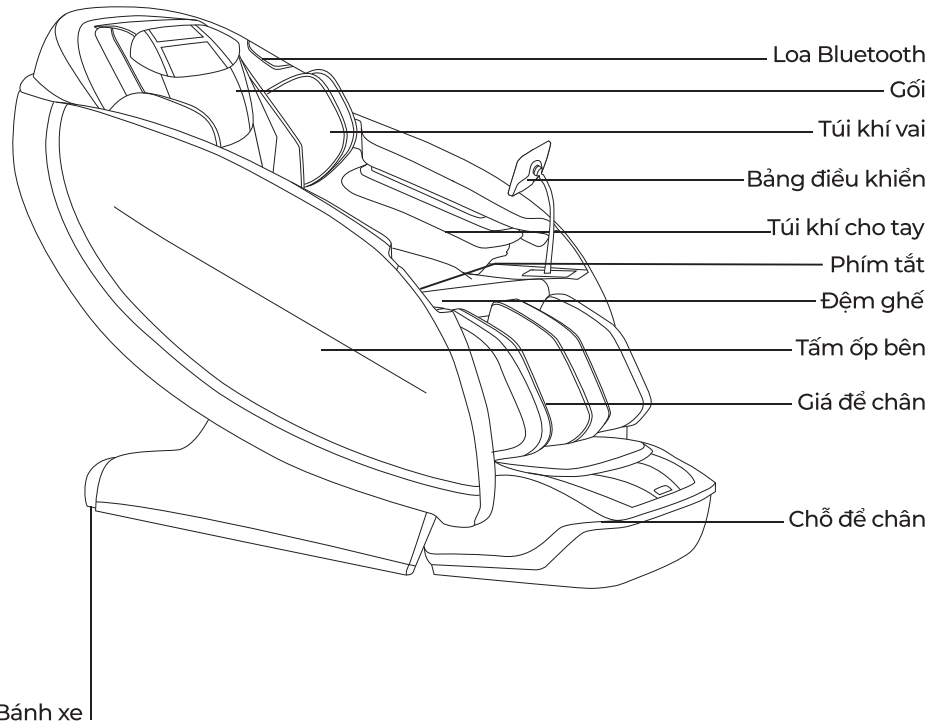

Bánh xe

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

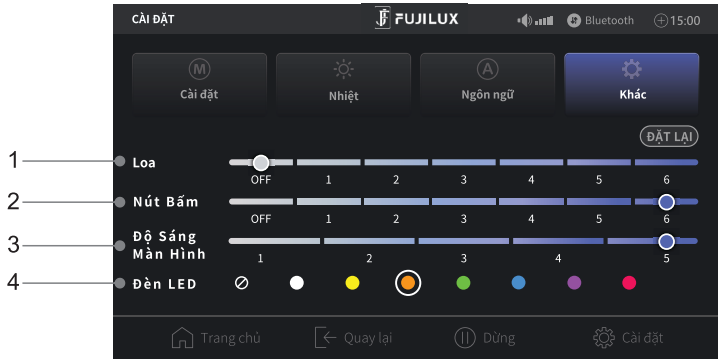

- 1 - Điều chỉnh âm lượng loa
- 2 - Điều chỉnh âm lượng nút bấm
- 3 - Điều chỉnh độ sáng màn hình
- 4 - Lựa chọn ánh sáng xung quanh

7. Chống kẹt




- 1 - Ghế massage dừng hoạt động
- 2 - Tiếp tục massage

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG




Bật/tắt chức năng sưởi

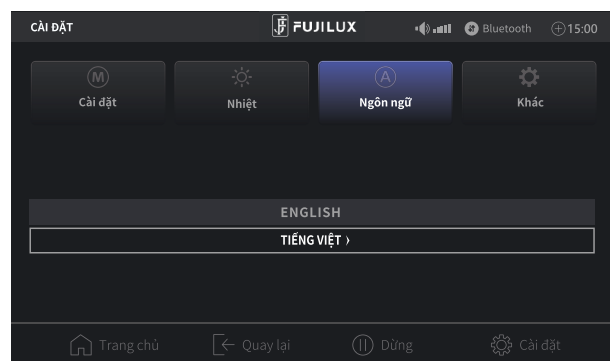

Hỗ trợ 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

CÁC THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM


Sơ Đồ Thân Máy

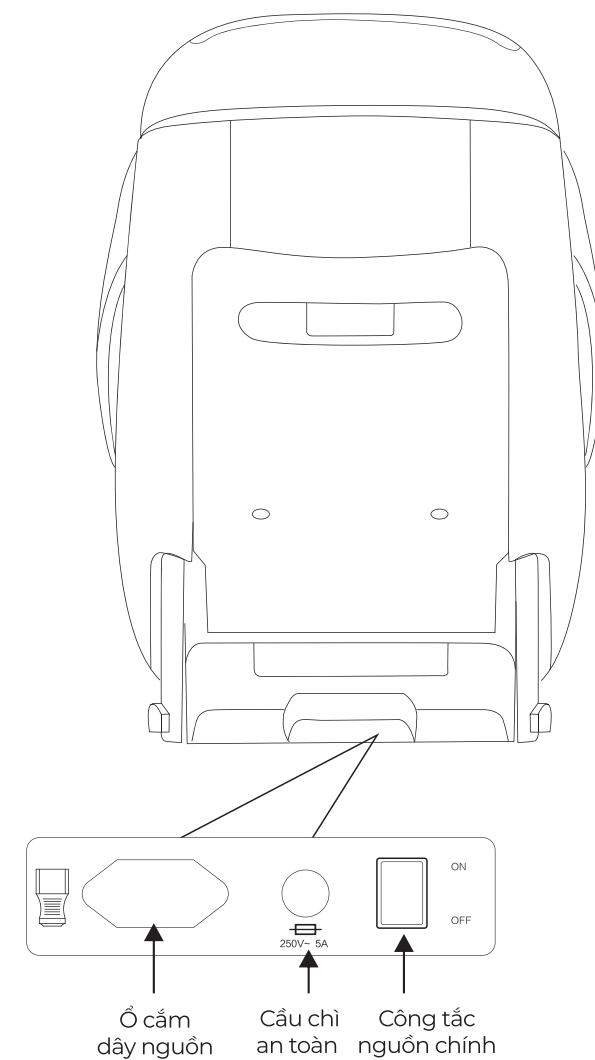

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


1. Lắp đặt phần chân ghế

- (1) Kết nối tất cả các dây cắm của phần chân theo thứ tự, như hình minh họa bên dưới. Số 1 tương ứng với số 1, số 2 tương ứng với số 2, và số 3 tương ứng với số 3.
- (2) Nâng phần chân và chèn lỗ tròn ở góc trên bên phải vào trục kim loại của ghế massage, sau đó cài khóa để cố định chắc chắn.
- (3) Khi lắp phần chân trái, di chuyển phần chân sang bên phải, căn chỉnh lỗ tròn ở góc trên bên trái và chốt kim loại của ghế massage, sau đó di chuyển phần chân dưới sang trái và cài chốt để cố định an toàn.
- (4) Kéo phần bọc da của chỗ để chân lên dây kéo của ghế massage.
- (5) Hoàn tất việc bọc da cho chỗ để chân.

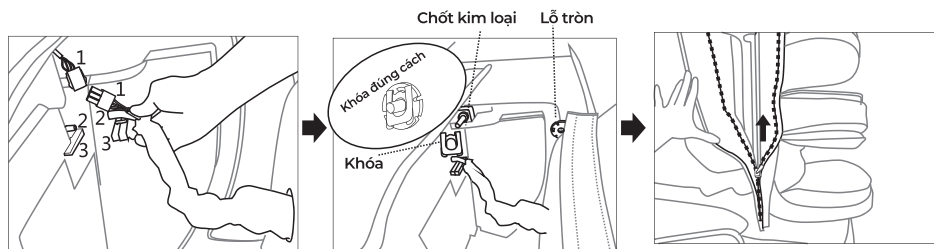


2. Lắp đặt bảng điều khiển

- (1) Nhẹ nhàng đẩy giá đỡ bộ điều khiển vào khe bên trái của ghế massage.
- (2) Kết nối bộ điều khiển từ xa với ghế massage để bắt đầu trải nghiệm thư giãn.

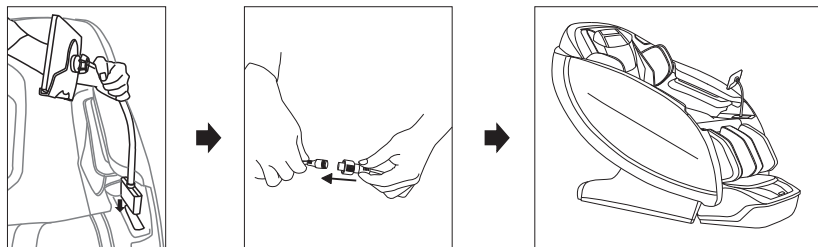


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


5. Áp suất túi khí

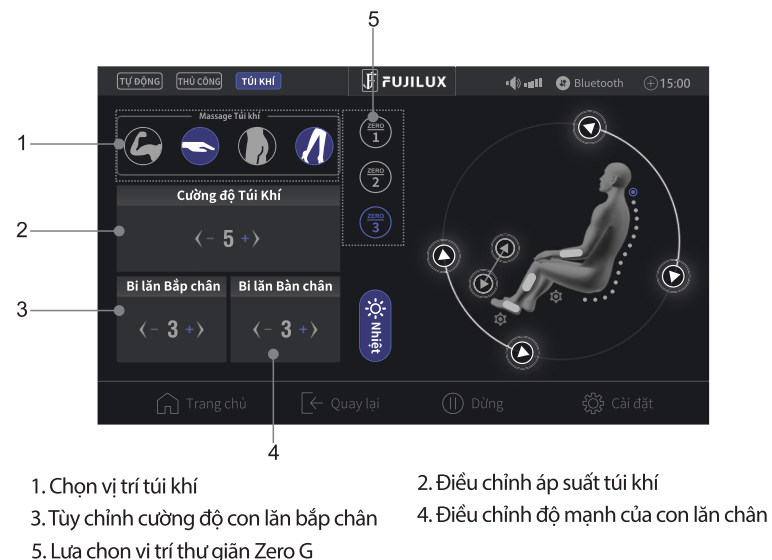


6. Cài đặt

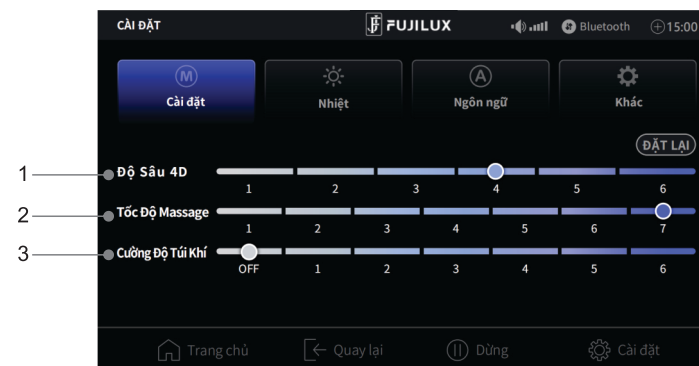

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

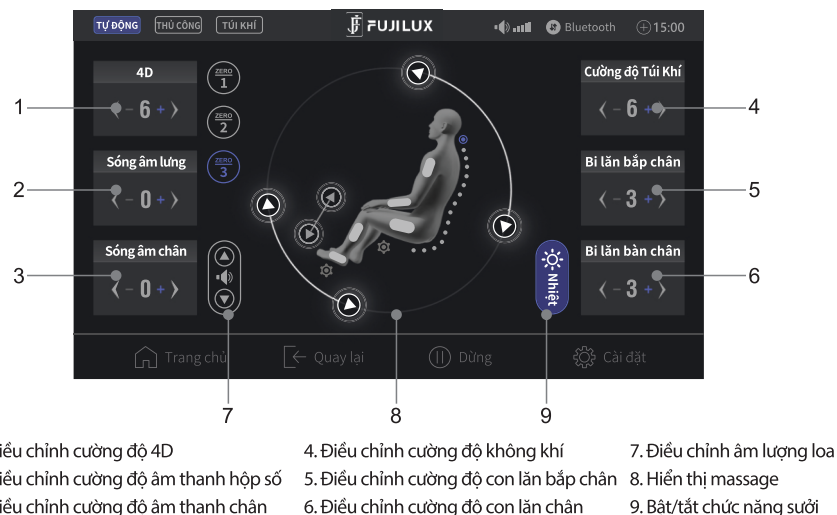


4. Massage thủ công

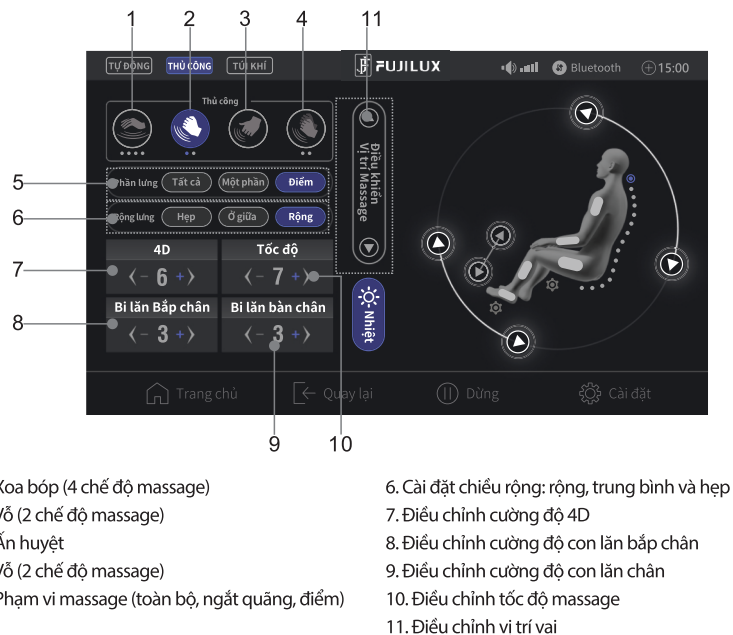

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

3. Đặt ghế massage ở không gian mở

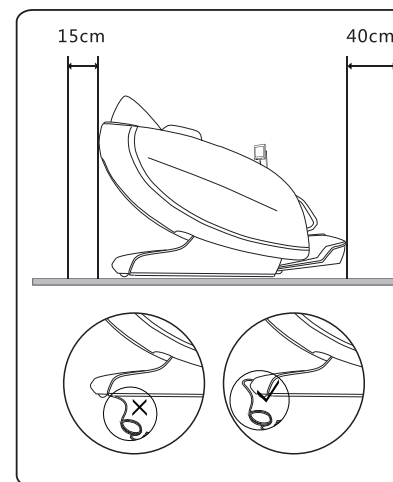

- Đảm bảo khoảng cách xung quanh ghế đủ rộng để ghế có thể ngả thoải mái. Khoảng cách từ phía sau ghế là 15cm và từ phía trước chỗ để chân là 40cm.


* Để tránh hư hỏng sàn nhà và giảm tiếng ồn, vui lòng trải thảm dưới ghế massage.

* Đảm bảo không có vật cản phía trước và sau ghế massage.

* Vui lòng không đặt ghế ở nền nhà ẩm ướt hoặc không bằng phẳng.

* Để tránh nhiễu sóng, vui lòng đặt ghế cách xa ít nhất 1,2m (4 feet) khỏi các thiết bị như AV, TV, và radio.

4. Di chuyển ghế massage

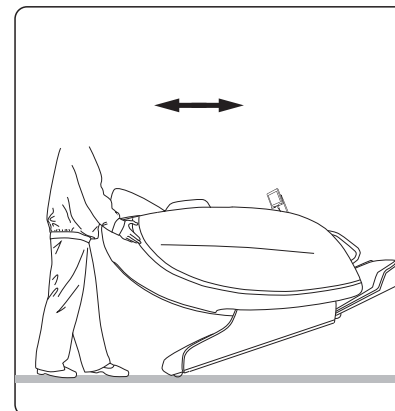

Như hình minh họa, đẩy phần tựa lưng xuống và nghiêng ghế lên bánh xe ở góc 45 độ. Đẩy và điều khiển ghế massage chậm rãi đến vị trí mong muốn. Hạ ghế từ từ cho đến khi nó nằm phẳng trên mặt sàn.


CẢNH BÁO:

* Không di chuyển ghế massage khi có người ngồi hoặc đang sử dụng.

* Di chuyển ghế có thể gây hư hỏng sàn nhà. Khuyến nghị bảo vệ sàn nhà (bằng thảm hoặc vải lót,...)


* Không thả hoặc buông đột ngột khi đang di chuyển vì có thể làm hỏng ghế.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

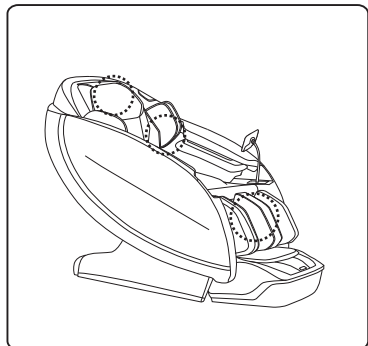


1. Đảm bảo sản phẩm trong tình trạng tốt và hoạt động đúng cách

- Kiểm tra phần gối tựa đầu và đệm lưng.
- Kiểm tra phích cắm điện.
- Đảm bảo phần đế chân ở vị trí thẳng đứng ban đầu để tránh hư hỏng.

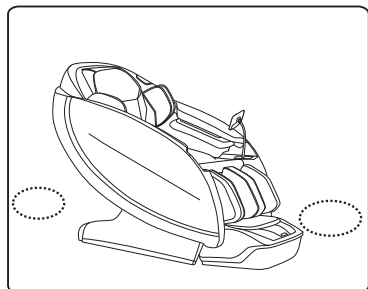


2. Kiểm tra môi trường xung quanh

- Đảm bảo không có người, vật nuôi, hoặc vật thể cản trở ghế massage.

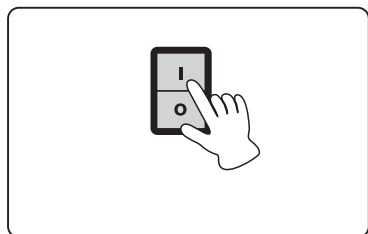

3. Cắm dây nguồn của ghế massage.

- Kết nối dây nguồn.
- Bật công tắc nguồn ở phía sau ghế massage.

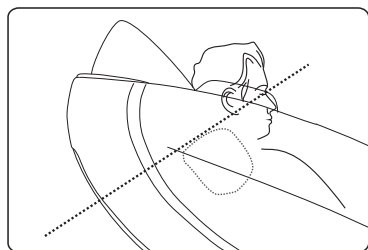

4. Điều chỉnh vị trí của gối đầu.

- Điều chỉnh gối đầu đến vị trí thoải mái.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

• Chế độ Sóng Âm



1. Chăm sóc sóng âm cơ thể trên
2. Chăm sóc sóng âm cột sống
3. Chăm sóc sóng âm cơ thể dưới

4. Chăm sóc sóng âm toàn thân
5. Chăm sóc sóng âm giãn cơ
6. Chăm sóc sóng âm chuyên sâu

• Chế độ Đồng Bộ Nhạc




1. Bijarim: Nhạc truyền thống
2. Shinrin-yoku: Âm thanh thiên nhiên
3. Nature Bliss: Âm thanh thiên nhiên thư giãn

4. Romance: Nhạc lãng mạn
5. Land of bliss: Âm thanh thiên đường
6. Bluetooth: Kết nối với thiết bị Bluetooth để phát nhạc tùy chọn


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3. Chế độ tự động

- Body Section (Vùng cơ thể)

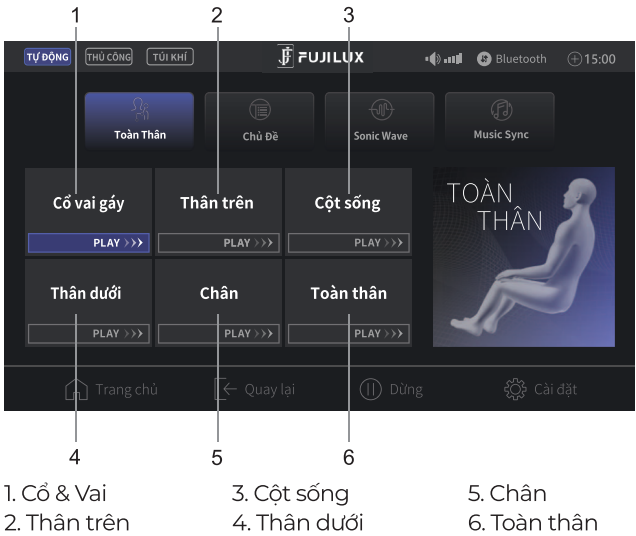


- Theme (Chủ đề)

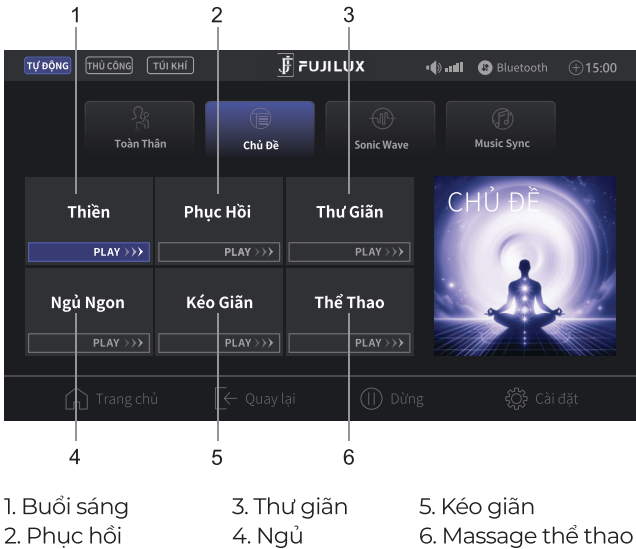

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Phím tắt

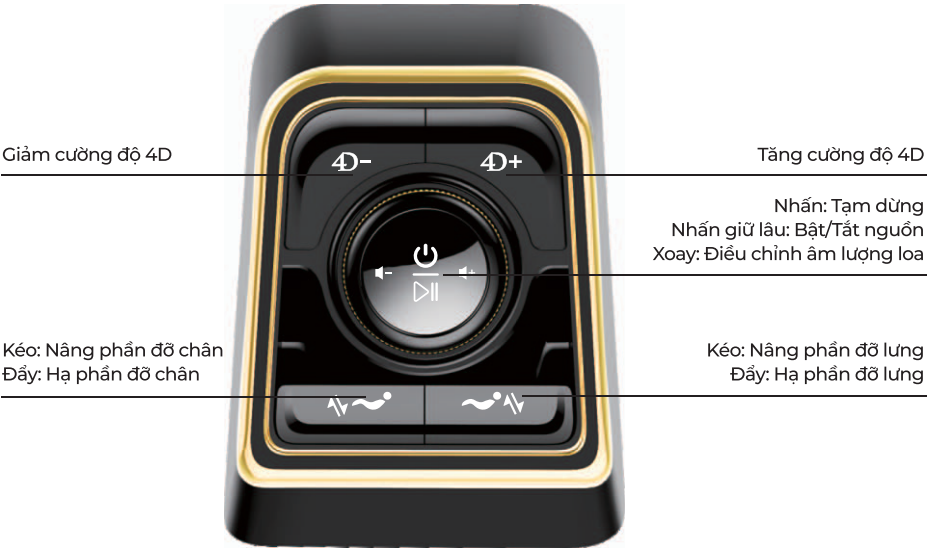

BẢNG ĐIỀU KHIỂN


Bảng điều khiển



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Giao diện và mô tả của remote controller

- Mở remote controller và menu chính sẽ hiển thị. Vui lòng chọn chương trình bạn muốn.

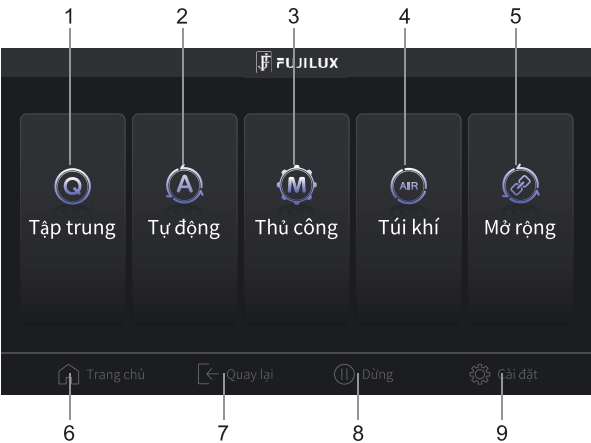

- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Tập trung (Focused) | 4. Khí (Air) | 7. Quay lại (Back) |
| 2. Tự động (Auto) | 5. Thiết bị ngoài (External Device) | 8. Tạm dừng (Pause) |
| 3. Thủ công (Manual) | 6. Chính (Main) | 9. Cài đặt (Settings) |

2. Tập trung (Focused)

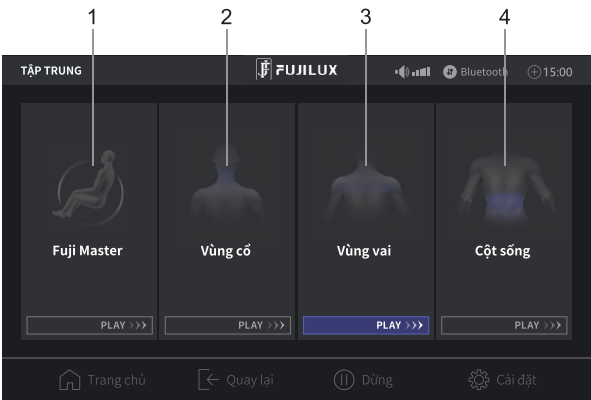

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Chế độ chính (Master Mode) | 3. Tập trung vai (Shoulder Focus) |
| 2. Tập trung cổ (Neck Focus) | 4. Tập trung cột sống (Spine Focus) |