

halio

Red Light Therapy  
LED Mask

# THƯƠNG HIỆU HALIO

halio

Halio là thương hiệu thiết chăm sóc da và nha khoa đến từ nước Mỹ. Dòng sản phẩm của hãng tích hợp thiết kế sáng tạo, công nghệ hiện đại, đem đến hiệu quả tối ưu, giúp bạn luôn tươi sáng, rạng ngời

## Công nghệ *làm đẹp* thế hệ mới



halio

Thương hiệu máy rửa mặt và các thiết bị công nghệ đến từ Mỹ với các công nghệ đặc trưng của sản phẩm:

- Công nghệ kích thích cơ bằng xung điện EMS giúp nâng cơ
- Công nghệ RF giúp tăng sinh collagen, trẻ hoá da
- Sóng rung F-Vibration: cải thiện tuần hoàn máu, nâng cơ và làm săn chắc da
- Công nghệ ánh sáng IPL cao cấp vừa triệt tiêu nang lông, vừa trẻ hóa, làm sáng vùng da thâm sần
- Công nghệ ánh sáng sinh học Phototherapy: Cải thiện nhiều vấn đề của da

Mặt nạ ánh sáng

# Halio PureGlow Ultralite Silicone LED Face Mask



# Tại sao nên chọn liệu pháp ánh sáng đỏ Halio?

halio

Được phát triển bởi NASA, liệu pháp ánh sáng đỏ là phương pháp điều trị sử dụng các bước sóng thấp của ánh sáng đỏ để thâm nhập sâu lớp trung bì, kích thích nguyên bào sợi sản xuất collagen, làm mờ nếp nhăn và chống lão hóa hiệu quả. Liệu pháp có đồng dao người dùng và hàng triệu lượt tìm kiếm tại Amazon Mỹ.



Mặt nạ Led Halio  
PureGlow Ultralite  
Silicone  
8,200,000 VND




Máy Liệu Pháp Ánh  
Sáng Đỏ Halio Red  
Light Therapy Device  
2,500,000 VND



Máy Trẻ Hoá Da  
Halio RevitaWave  
Skin Rejuvenator  
5,000,000 VND

## 1. 9 triệu lượt tìm kiếm trên Amazon Mỹ

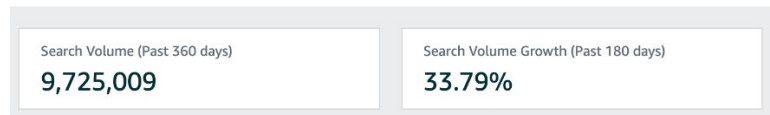

## 2. Liệu pháp được yêu thích bởi nhiều người nổi tiếng

Kylie Jenner, Victoria Beckham, Châu Bùi, Hà My...



## 3. Tại sao Halio mà không phải nhãn hàng khác?

- Halio là thương hiệu Dụng Cụ Làm Đẹp & Chăm Sóc Cá Nhân hàng đầu cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn y tế, được FDA phê duyệt.
- Giá thành của Halio hợp lý hơn với các sản phẩm có chức năng tương đương hoặc cao hơn
- Halio đã có mặt tại các cửa hàng ở Việt Nam như Lixibox, Hasaki, Long Châu, An Khang, Beauty Box...bán chạy trên TikToksop, Shopee và Lazada Mall, hợp tác với nhiều livestreamer hàng đầu
- Quy trình bảo hành và chăm sóc khách hàng dễ dàng, nhanh chóng.

## 4. Thị trường sản phẩm công nghệ ánh sáng đỏ & Điểm nổi bật của Halio



CurrentBody  
65,000,000 VND



Foreo  
20,000,000 VND



Dr. Dennis Gross  
20,000,000 VND



LG  
13,000,000 VND



CurrentBody  
10,000,000 VND

Tất cả các sản phẩm khác đều KHÔNG chống nước, trọng lượng >300gr. Mặt nạ LED Halio CHỐNG NƯỚC & chỉ nặng 93gr



Medicube  
14,000,000 VND



Yaman  
13,000,000 VND



Medicube  
10,000,000 VND



Medicube  
8,000,000 VND




Solawave  
4,500,000 VND

Máy liệu pháp ánh sáng đỏ Halio gồm ánh sáng đỏ 630 nm, công nghệ EMS nhiệt 42°C và rung sóng âm

Brand	Halio
Tên sản phẩm	Mặt nạ ánh sáng Halio PureGlow Ultralite Silicone LED Face Mask
Công dụng chính	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ánh sáng đỏ và hồng ngoại 630nm-850nm: Tăng sinh collagen, giảm nếp nhăn</li><li>- Ánh sáng vàng 590nm: Giảm đỏ da, làm sáng da, giảm thâm</li><li>- Ánh sáng xanh dương 415nm: Cân bằng dầu thừa, giảm viêm và hạn chế vi khuẩn gây mụn</li></ul>
Chất liệu	Silicone y tế
Chế độ	3 màu đèn LED + 3 mức cường độ ánh sáng
Xuất xứ	Mỹ
Sản xuất	Trung Quốc
Giá bán	8,200,000 VND

# Lợi ích của liệu pháp ánh sáng

- **Ánh sáng đỏ và hồng ngoại** 630nm-850nm: Tăng sinh collagen, giảm nếp nhăn, kích thích vết thương mau lành, kích thích mọc tóc
- **Ánh sáng vàng** 590nm: Giảm mẩn đỏ, làm sáng da, giảm thâm.
- **Ánh sáng xanh dương** 415nm: Hạn chế vi khuẩn gây mụn, giảm viêm

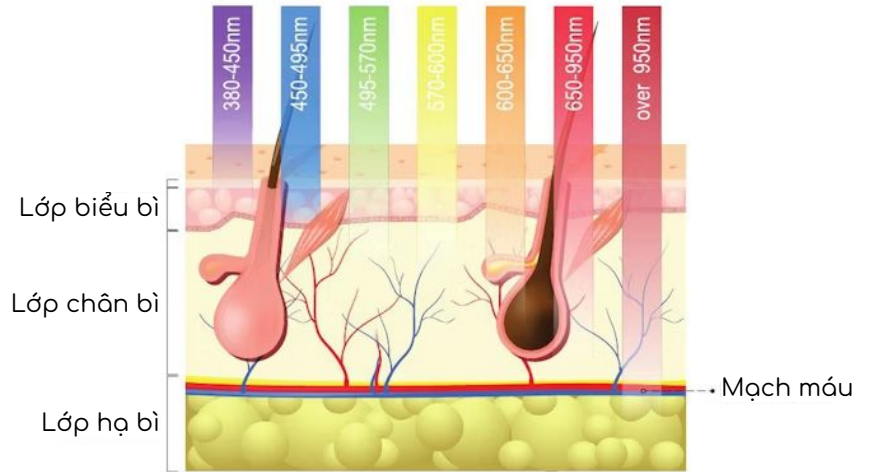

# Giới thiệu sản phẩm

Mặt nạ ánh sáng Halio PureGlow Ultralite Silicone LED Face Mask là thiết bị chăm sóc da tích hợp liệu pháp ánh sáng tiên tiến với hơn **216** bóng đèn LED. Với **4** màu đèn (đỏ/hồng ngoại, xanh, vàng) và **3** mức điều chỉnh, chiếc mặt nạ sẽ xóa mờ nếp nhăn, các đốm đồi mồi và cải thiện sắc tố da. Với trọng lượng chỉ **93 gram**, đây là mặt nạ nhẹ nhất trên thị trường, đảm bảo sự thoải mái tối đa khi đeo—tuyệt vời để dùng trong lúc ngồi làm việc, thư giãn hay bất kỳ hoạt động nào khác. Ngoài ra, thiết bị này có chỉ số chống nước và bụi **IP67**, giúp người dùng dễ dàng vệ sinh máy với nước. Nâng tầm chu trình làm đẹp và tận hưởng làn da rạng rỡ, trẻ trung chỉ với **10 phút** sử dụng mỗi ngày với Mặt nạ ánh sáng Halio PureGlow Ultralite Silicone LED Face Mask!



# Cấu tạo sản phẩm



Mặt nạ Silicone LED



Dây đeo mặt nạ có thể điều chỉnh được



Màn hình hiển thị mức cường độ, loại ánh sáng

Nút nguồn/ điều chỉnh cường độ ánh sáng

Nút điều chỉnh chế độ đèn/ hẹn thời gian

Thiết bị điều khiển



Sạc Type C

# Key Selling Points

1

Ánh sáng LED 3 màu

2

Sản phẩm mặt nạ LED nhẹ nhất trên thị trường, chỉ 93g

3

Thiết kế silicone y tế dẻo

4

Ưu điểm khác:



- 216 bóng đèn LED
- Công nghệ chống bụi nước IP67
- Thiết kế có phần bảo vệ mắt
- Dây đeo mặt nạ có thể điều chỉnh
- Đồng hồ hẹn sẵn 10, 15, 20, 30

# Đối tượng khách hàng





1. Những người trên 30 tuổi, da đã có nếp nhăn, rãnh cười, khoé mắt, khoé miệng, da không đều màu, có mụn/không cần tìm các phương pháp làm đẹp không xâm lấn, không gây đau đớn để giải quyết các vấn đề như da lão hoá, da mẩn đỏ, da bị sưng viêm, da bị mụn, da không đều màu, da bị thâm mụn
2. Những ai là dân văn phòng, người đi làm không có nhiều thời gian chỉ cần đeo 10 phút mỗi ngày là da sáng đều màu, mờ nếp nhăn, hết mụn
3. Những người skincare theo hệ lười, không muốn skincare quá lâu quá nhiều bước, chỉ cần đeo mặt nạ lên, nhét bộ điều khiển vào túi, hẹn giờ 10 phút là vừa làm việc, vừa dọn nhà, vừa xem phim, mà vừa đẹp da
4. Những người có tài chính

# Product Benchmarking



Sản phẩm	Giá thành	Chống nước	Pin	Ưu điểm	Nhược điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
<p>Halio PureGlow Ultralite Silicone LED Face Mask (HRM)</p> 	8,200,000	IP67	2600 mAh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chăm sóc da toàn diện hơn với 3 màu ánh sáng: đỏ/hồng ngoại, vàng, xanh.</li><li>- Thiết kế dạng mặt nạ dẻo với 216 đèn LED, tỏa đều ánh sáng khắp khuôn mặt</li><li>- Trọng lượng 93g siêu nhẹ</li><li>- Thiết kế có phần bảo vệ mắt</li><li>- Chống nước chống bụi IP67 toàn thân</li><li>- Dung lượng pin cao</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giá thành ở mức trung bình-cao (so với thị trường VN)</li><li>- Không có công nghệ rung sóng âm và EMS</li></ul>	Có
<p>Halio Red Light Therapy Device (HRT)</p> 	2,500,000	Phần đầu máy	420 mAh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đầu xoay nhỏ gọn, dễ len vào các vùng da khó tiếp cận</li><li>- Có thêm công nghệ rung sóng âm giúp đẩy tinh chất thẩm sâu</li><li>- Có 3 chế độ EMS: chế độ làm dịu, chế độ nâng cơ, và chế độ kích hoạt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hiệu quả trên da không đều do tính chất điều trị đặc trị từng vùng da</li><li>- Bất tiện cho người dùng do cần phải cầm và di chuyển thiết bị liên tục</li><li>- Chỉ có ánh sáng đỏ</li></ul>	Có

# Product Benchmarking

Sản phẩm	Giá thành	Chống nước	Pin	Ưu điểm	Nhược điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
LG Pro.L Derma LED 	16,000,000	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian sử dụng hàng ngày ngắn (9 phút)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá thành rất cao</li> <li>- Chỉ có ánh sáng đỏ</li> <li>- Trọng lượng nặng 240g + Thiết kế trùm cả mặt, không thể sử dụng trong lúc làm việc khác</li> <li>- Thiết kế mặt nạ cứng, có thể gây khó chịu do không vừa mặt</li> <li>- Thiết kế không có phần bảo vệ mắt</li> </ul>	Có
Currentbody LED Light Therapy Face Mask 	10,000,000	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bóng đèn LED công suất mạnh, tăng cường hiệu quả chăm sóc da (30mW/cm2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ có ánh sáng đỏ</li> <li>- Trọng lượng nặng 350g, tạo cảm giác khó chịu khi đeo</li> <li>- Thiết kế không có phần bảo vệ mắt</li> <li>- Thời gian sạc lâu (6-8 tiếng)</li> </ul>	Không

X: không có thông tin

# Product Benchmarking

Sản phẩm	Giá thành	Chống nước	Pin	Ưu điểm	Nhược điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite™ FaceWare Pro 	19,800,000	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 chế độ màu đèn LED: đỏ, xanh dương, kết hợp đỏ &amp; xanh dương</li> <li>- Bóng đèn LED công suất rất mạnh, tăng cường hiệu quả chăm sóc da (50-65mW/cm2)</li> <li>- Thời gian sử dụng hàng ngày ngắn (3 phút)</li> <li>- Thiết kế đẹp, sang trọng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá thành rất cao</li> <li>- Trọng lượng nặng 264g, tạo cảm giác khó chịu khi đeo</li> <li>- Thiết kế mặt nạ cứng, có thể gây khó chịu do không vừa mặt</li> <li>- Thiết kế không có phần bảo vệ mắt</li> </ul>	Không
Foreo Anti-aging silicone LED face mask 	20,200,000	Không	680 mAh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tích hợp 7 màu đèn LED, chăm sóc da toàn diện</li> <li>- 600 bóng đèn LED</li> <li>- Thiết kế đẹp, sang trọng</li> <li>- Có thể kết nối với điện thoại để điều khiển mặt nạ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá thành rất cao</li> <li>- Trọng lượng 169g, vẫn nặng khi đeo</li> </ul>	Không

X: không có thông tin

# Chống chỉ định

- **KHÔNG** sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ em, người bị nám nặng, người mắc các bệnh da (Lupus ban đỏ, bệnh chàm, bệnh bạch tạng, ...) và người mẫn cảm với ánh sáng.
- **KHÔNG** sử dụng thiết bị này nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Thiết bị này **CHƯA** được thử nghiệm trên phụ nữ mang thai hoặc cho con bú và do đó chưa rõ nguy cơ đối với thai nhi, trẻ sơ sinh hoặc phụ nữ mang thai.
- **KHÔNG** sử dụng thiết bị này nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào có thể gây nhạy cảm với ánh sáng. Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ loại thuốc nào bạn có thể đang dùng, hãy tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.
- Nếu sử dụng vitamin C/AHA/BHA, nên sử dụng sau 24h sau khi sử dụng led mask



# Hướng dẫn sử dụng

## Trước khi sử dụng

- Trong lần sử dụng đầu tiên, nên thực hiện kiểm tra độ nhạy cảm của da trước khi dùng mặt nạ. Đặt mặt nạ lên phần bên trong cánh tay của bạn, bột thiết bị ở mức thấp nhất trong 10-20 phút. Sau khi kiểm tra, chờ từ 4-5 giờ và quan sát kỹ tình trạng của da. Nếu không có phản ứng gì, bạn có thể tiếp tục sử dụng mặt nạ Halio PureGlow hàng ngày.
- Hãy sạc đầy mặt nạ trước khi sử dụng lần đầu tiên, sau khi sạc đầy, rút bộ điều khiển khỏi củ sạc 5V-1A/5V-2A. Lưu ý rằng chỉ có Mặt nạ cần được kết nối với bộ điều khiển pin để hoạt động.
- Hãy tẩy trang, rửa sạch mặt và lau khô da bằng khăn trước khi sử dụng. Bạn có thể sử dụng trên mặt khô ráo không dùng các sản phẩm skincare nào hoặc dùng toner/Aloe gel để dưỡng ẩm cơ bản, nhưng tránh thoa các sản phẩm chăm sóc da có tính nhạy cảm với ánh sáng và làm trắng trước khi sử dụng mặt nạ LED.
- Lắp ráp các phụ kiện mặt nạ, sử dụng cáp đi kèm, kết nối mặt nạ và bộ điều khiển.

**Chú ý:** Không sử dụng bất kỳ dây nối nào khác ngoài dây nối đi kèm với sản phẩm này để kết nối, nếu không sản phẩm sẽ không hoạt động.



# Các bước sử dụng



**BƯỚC 1:  
LÀM SẠCH**



(KHÔNG BẮT  
BUỘC)



**BƯỚC 2:  
DƯỠNG ẨM  
NHẸ**



**BƯỚC 3:  
MẶT NẠ LED**



**BƯỚC 4:  
SERUM**



**BƯỚC 5:  
DƯỠNG ẨM**

# Hướng dẫn sử dụng

**Bước 1:** Đặt mặt nạ vừa khít với khuôn mặt và điều chỉnh độ chặt đến khi bạn cảm thấy thoải mái. Nhấn và giữ nút nguồn của bộ điều khiển trong 1-2 giây để bật nguồn, màn hình sẽ sáng lên.

**Bước 2:** Nhấn nút M để chọn các chế độ đèn khác nhau. Nhấn giữ nút M để lựa chọn thời gian phù hợp (10-15-20-30). Nhấn nút nguồn để chọn cường độ ánh sáng phù hợp (level 1 - level 2 - level 3)

- Ánh sáng Đỏ/Hồng ngoại: làm mờ các nếp nhăn bằng cách kích thích sản xuất collagen và elastin
- Ánh sáng Xanh dương: cân bằng dầu và hạn chế vi khuẩn gây mụn trong lỗ chân lông
- Ánh sáng Vàng: phục hồi và làm sáng da, cải thiện tuần hoàn da và giảm mụn đỏ.

Khi đèn chế độ được chọn sáng lên và duy trì, thiết bị sẽ vào trạng thái hoạt động. Bạn có thể ngồi thư giãn trong khi Mặt nạ LED Silicone Halio PureGlow Ultralite chăm sóc da của bạn.

**Bước 3:** Mặt nạ sẽ tự tắt khi hết thời gian đã lựa chọn. Hoặc bấm giữ nút nguồn để tắt mặt nạ.



# Tần Suất sử dụng

Trong 2 tháng đầu: 10 phút cho 3 loại ánh sáng mỗi ngày, nếu sử dụng hơn 10 phút, tối đa 30 phút thì phải sử dụng cách ngày

Từ tháng thứ ba trở đi: Sử dụng 10 phút cho 3 loại ánh sáng cách ngày, hoặc tối đa 30 phút cho 3 loại ánh sáng cách ngày



# Hướng dẫn sạc pin

Đèn báo nhấp nháy để cho biết mặt nạ LED Halio PureGlow đang sạc. Khi sạc đầy, cả 3 đèn báo đều sáng hoàn toàn.

Vui lòng kiểm tra xem củ sạc có đáp ứng yêu cầu của sản phẩm là 5V - 1A hay không. Sạc ban đầu khoảng 2 giờ. Một lần sạc có thể kéo dài từ 1,5 - 4 giờ.



# Vệ sinh và bảo quản

Sau khi sử dụng thiết bị, sử dụng một khăn ẩm sạch, không có bụi để nhẹ nhàng lau phần trong suốt (bên trong) của mặt nạ, và sử dụng cồn 70% để lau sạch các vết bẩn cứng đầu nghiêm trọng. Hoặc sử dụng sữa rửa mặt trung tính và nước để làm sạch bề mặt. Vui lòng tránh cống sặc.

**KHÔNG** sử dụng khăn thô ráp để lau phần trong suốt của mặt nạ.

Đặt nó vào hộp lưu trữ sau khi làm sạch để ngăn bụi xâm nhập. Lưu trữ thiết bị ở môi trường khô ráo, tránh nơi ẩm ướt hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Bộ điều khiển của mặt nạ LED Halio PureGlow có pin lithium polymer, không được lưu trữ hoặc sử dụng trong môi trường dễ cháy và nổ.

