


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## MÁY MASSAGE CHÂN

MODEL: MK418

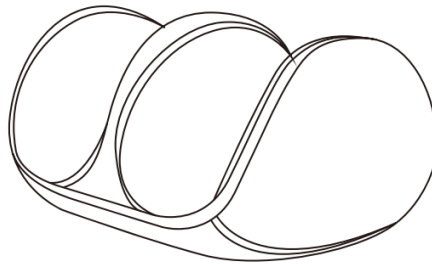

### **\*\*\*Thông số kỹ thuật:**

Tên sản phẩm	Máy massage chân
Model	MK418
Nguồn/ công suất	12V/ 24W
Kích thước	36.5 x 20.5 x 19 cm

### **\*\*\*Cách sử dụng:**

- Cắm adaptor vào ổ cắm để kết nối nguồn điện.
- Đặt bàn chân, bắp chân...vào vị trí, nhấn nút nguồn để khởi động máy. Khi nhấn nút nguồn, máy hoạt động theo chế độ mặc định F2, thời gian cài đặt mặc định là 15 phút.
- Nhấn các nút chức năng để thay đổi theo nhu cầu massage:
  - + Reverse: xoay ngược lại chế độ đã chọn, bấm lại nút này nếu muốn quay lại chế độ trước đó.
  - + Eco: Nhấn nút này nếu bạn muốn điều chỉnh độ mạnh yếu của các con lăn.
  - + Mode: Nhấn để thay đổi qua lại giữa các chế độ F1, F2, F3.
  - + Speed: Nhấn nút này để thay đổi tốc độ massage A1, A2, A3. A3 là tốc độ nhanh nhất.
  - + Heating: Nhấn nút này nếu bạn có nhu cầu làm ấm vùng massage.

### **\*\*\*Bảo quản và vệ sinh:**

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh môi trường ẩm ướt, hoặc nhiệt độ trên 40°C, dưới ánh mặt trời quá lâu.
- Nếu sản phẩm di chuyển từ nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Đảm bảo máy được bảo quản ở nhiệt độ

phòng 1 giờ trước khi sử dụng.

**\*\*\* Lưu ý:**

- Hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi làm vệ sinh.
- Không sử dụng trong khi ngủ để tránh xảy ra sự cố về điện giật, cháy nổ.
- Không sử dụng trong vòng 30 phút sau bữa ăn.
- Nếu cảm thấy đau hoặc không thoải mái khi sử dụng, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức.
- Nên mang thêm vớ chân khi massage lòng bàn chân để tránh làm bẩn máy.
- Không để trẻ em hoặc người không đủ năng lực hành vi sử dụng.
- Không sử dụng trong thời gian điều trị bệnh, mang thai, hoặc đang bị đau nhức.
- Sau khi massage nên uống 50ml nước ấm hoặc trà nóng giúp thúc đẩy sự bài tiết các chất chuyển hóa trong cơ thể.
- Khi dây nguồn của máy này bị hỏng, cần phải liên hệ nhà sản xuất để thay thế dây nguồn hoặc liên hệ với đại lý. Không tự thay thế dây không đủ tiêu chuẩn.
- Nếu bề mặt của máy bị nóng khi sử dụng, hãy ngưng sử dụng nếu bạn nhạy cảm với nhiệt độ.

**\*\*\* Lỗi thường gặp:**

- Máy tắt đột ngột:
  - + Kiểm tra lại phích cắm
  - + Khởi động lại máy nếu thời gian mặc định đã hết.
  - + Nếu máy đã sử dụng trong thời gian dài liên tục, hãy tắt máy để máy nguội rồi tiếp tục sử dụng
- Máy hoạt động chậm:
  - + Nhắc chân lên thư giãn và giảm trọng lượng đè lên máy
  - + Không đứng lên máy
- Có tiếng ồn:
  - + Sản phẩm mới có tiếng ồn là hoàn toàn bình thường.
  - + Rơi mất 1 số bộ phận trong máy trong quá trình sử dụng, vui lòng gửi đến trung tâm bảo hành để sửa chữa.
- Có mùi lạ: ngưng sử dụng và vui lòng gửi đến trung tâm bảo hành để sửa chữa.

QUAY VIDEO MỞ HỘP HOẶC TRÁI  
NGHIỆM SẢN PHẨM ĐỂ NHẬN  
QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT



QUÉT QR ĐỂ XEM ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM  
BẢO HÀNH GẦN NHẤT

Hotline: 1900 1738  
Website: [www.KachiVietnam.com](http://www.KachiVietnam.com)

