

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂN ĐIỆN TỬ MODEL: MK-223

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại nó để tham khảo trong tương lai.


I. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

- 1/. Trọng lượng tối đa: **180kg / 396 lb**
- 2/. Tự động bật và tắt: Cân sẽ được bật khi trọng lượng từ 3 kg trở lên được đặt lên nó.
- 3/. Đo lường: Trọng lượng cơ thể, chỉ số cân nặng (BMI), tỉ lệ chất béo cơ thể (BFR), khối lượng cơ bắp, lượng nước trong cơ thể, khối lượng xương, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR), lượng mỡ nội tạng, mức độ béo phì.
- 4/. Hệ thống cảm biến có độ chính xác cao và có CPU hiệu suất cao, đảm bảo độ chính xác tốt.
- 5/. Mặt kính cường lực an toàn
- 6/. Báo hiệu pin yếu và quá tải.
- 7/. Sai số kỹ thuật tối đa: $\pm 0.2 \text{ kg}$.

✓ Pin

Nguồn: 2 pin AAA (DC 3 V)

Đối với lần đầu sử dụng, vui lòng mở nắp pin để lắp pin theo đúng cực. Nếu cân không hoạt động, hãy tháo hết pin ra và lắp lại.

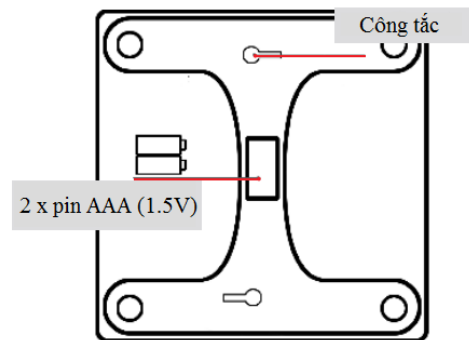

II. HOẠT ĐỘNG

A. Cách đo trọng lượng cơ thể

- 1/. Nếu bạn không kết nối Bluetooth mà đứng trên cân trước, cân sẽ chỉ đo trọng lượng cơ thể của bạn. Vui lòng làm theo bước dưới đây:
Đặt cân trên bề mặt cứng & bằng phẳng, không sử dụng trên thảm xe hoặc bề mặt mềm.



- 2/. Cẩn thận bước lên mặt cân. Đứng yên cho đến khi đọc được trọng lượng hiển thị trên màn hình.
- 3/. Cân sẽ tự động tắt nếu không có trọng lượng từ 3 kg trở lên được đặt trên bề mặt.

B. Cách kết nối với Bluetooth để đo Trọng lượng cơ thể, chỉ số cân nặng (BMI), tỉ lệ chất béo cơ thể (BFR), khối lượng cơ bắp, lượng nước trong cơ thể, khối lượng xương, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR), lượng mỡ nội tạng, mức độ béo phì,...

1/. Tải app trên Android hoặc iOS.

Tên app: OKOK



✓ Vui lòng quét mã QR bên dưới và tải <OKOK> trên App store hoặc Google play về điện thoại của bạn.
Lưu ý: Ứng dụng của chúng tôi có sẵn cho thiết bị iOS và Android với phiên bản iOS 8.0, Android 4.3 và Bluetooth 4.0 (Hoặc phiên bản cao hơn).




App Store



Google Play

2/. Đăng ký.

- ✓ Mở Bluetooth.
- ✓ Khởi động phần mềm <OKOK>.
- ✓ Bật vị trí hoặc định vị GPS.
- ✓ Đăng ký tài khoản hoặc sử dụng thông tin đăng nhập của bên thứ ba (Facebook, Google +, Twitter,...)

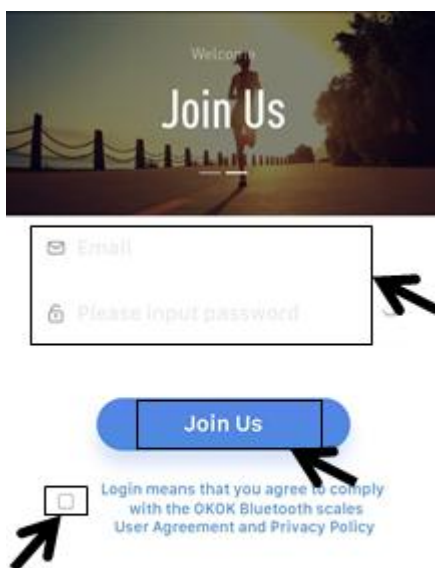

- ✓ Lựa chọn đơn vị đo, điền hồ sơ người dùng và điều chỉnh cân nặng mong muốn của bạn, sau đó nhấn “OK” để hoàn thành.

The first screenshot shows the 'Unit Setting' screen with options for length and weight units. The second shows the 'Profile' screen with fields for nickname, gender, birthday, and height. The third shows the 'Target' screen with a BMI calculation and a 'Healthy' status indicator.

Để lưu giữ chỉ số cân nặng của nhiều người trên cùng một smartphone, bấm vào biểu tượng “ Me” ở góc trái màn hình, chọn “Add” để thêm người dùng mới.

Lưu ý: Mỗi smart phone chỉ lưu được tối đa 8 người dùng.

3/. Kết nối thiết bị

- ✓ Để ứng dụng kết nối với cân, vui lòng đứng hai chân trên cân để khởi động. Sau đó nhấn vào biểu tượng “” trên tab và nhấn “Pair” để kết nối với cân.

The image shows a smartphone screen with a 'Pair' button, a diagram of a person standing on a scale, and a large circular display showing a weight of 51.12 Kg. Text instructions guide the user to step on the scale and confirm the pairing.



- ✓ Nếu bạn muốn kết nối cân điện tử khác, vui lòng Click vào biểu tượng “Device” và chọn <Add device> để kết nối với cân điện tử mới.


4/. Đơn vị đo



- ✓ Nếu bạn muốn thay đổi đơn vị, vui lòng Click vào biểu tượng “Me”, vào mục Settings và chọn <Unit Settings> để thay đổi đơn vị trọng lượng: kg / lb / st và đơn vị chiều cao: cm / inch.

5/. Cách đo

- ✓ Đặt cân lên bề mặt cứng, phẳng.
- ✓ Bước lên cân bằng chân trần và đứng vững nhất có thể cho đến khi trọng lượng được hiển thị trên màn hình, sau đó đợi kết quả đo của bạn hiển thị trên ứng dụng.

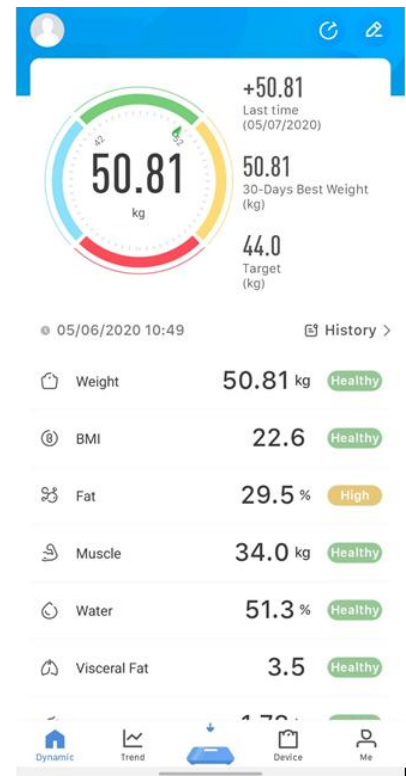

III. CHỈ SỐ CƠ THỂ

Trọng lượng là một trong những chỉ số quan trọng cho biết tình trạng sức khỏe của một người. Quá béo hoặc quá gầy đều không có lợi cho sức khỏe. Chỉ số này thể hiện mức cân năng lý tưởng cho cơ thể.

Weight

50.81 kg Healthy



BMI

22.6 Healthy



Chỉ số cơ thể (BMI), được định nghĩa theo trọng lượng cơ thể (Kg) chia cho bình phương chiều cao cơ thể (m), là một định lượng để phân loại cân nặng và tình trạng sức khỏe của con người.

Tỷ lệ mỡ cơ thể là tỷ lệ khối lượng của tất cả các mô mỡ trong cơ thể bạn với trọng lượng cơ thể (chủ yếu là mỡ dưới da và mỡ nội tạng). Tỷ lệ mỡ cơ thể có thể giải thích tốt hơn tình trạng "béo và gầy" của một người so với BMI.


Fat

29.5 % High



Muscle

34.0 kg Healthy

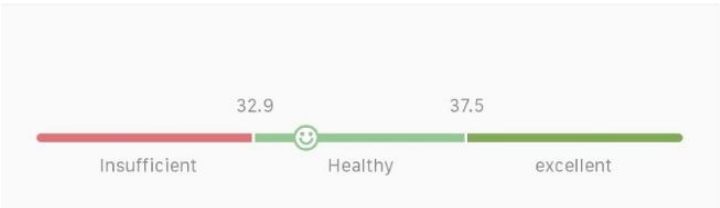

Cho biết trọng lượng cơ bắp trong cơ thể của người dùng. Kích thước và khối lượng cơ bắp liên quan trực tiếp đến mức độ trao đổi chất của cơ thể. Mức độ phù hợp ≥ 14.8 Kg.

Phần trăm trọng lượng nước trong cơ thể. Nước sẽ giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn, do đó cơ thể cần lượng nước từ 60-70%/ngày.

Water

51.3 % Healthy



Visceral Fat

3.5 Healthy




Chất béo nội tạng ở mức độ ≥ 9.0 người dùng cần phải thận trọng trong chế độ ăn uống. Kết hợp giữa tập luyện thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống hợp lý để duy trì tỷ lệ chất béo nội tạng phù hợp.

Cho biết trọng lượng mô xương trong thành phần của cơ thể. Khối lượng mô xương thích hợp ≥ 2.2 Kg

Bone Mass

1.78 kg Healthy

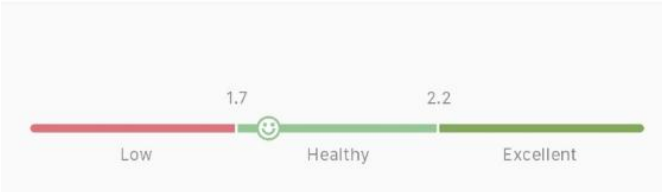

Metabolism


1108.2 Low




Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) là tốc độ trao đổi năng lượng của cơ thể người khi cơ thể con người tỉnh táo và trong trạng thái thư giãn. Mức độ phù hợp ≥ 1200 Kcal/ngày

V. BIỂU TƯỢNG LỖI

Quá tải: màn hình sẽ biểu thị “Err”, khi trọng lượng vượt quá trọng lượng tối đa. Vui lòng không cân vật hoặc người vượt quá trọng lượng tối đa cho phép là 180 kg/396 lb để tránh gây hư hỏng cân.

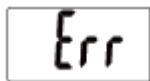


Pin yếu: màn hình LCD sẽ hiển thị “LO” khi dung lượng pin không đủ để hoạt động, vui lòng mở nắp pin và thay pin mới.

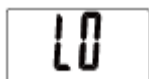

Cân bị lỗi:

Cân thất bại “Err1”, trong 2 điều kiện dưới đây:

1. Tỷ lệ mỡ cơ thể ít hơn 5% hoặc hơn 50%,
2. Cân không thành công.

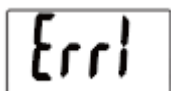

IV. CHÚ Ý

1/. Vui lòng cởi giày, vớ và để bàn chân trần của bạn tiếp xúc với các điện cực khi cần cân đo: Trọng lượng cơ thể, BMI, BFR, khối lượng cơ bắp, lượng nước, khối lượng xương, BMR, Lượng mỡ nội tạng, lượng mỡ trong cơ thể, mức độ béo phì.


2/. Vui lòng kiểm tra pin nếu cân bị trục trặc. Thay pin mới nếu cần thiết.

3/. Vui lòng sử dụng khăn giấy mềm thấm cồn hoặc nước lau kính để làm sạch bề mặt nếu nó bẩn. Không dùng xà phòng hoặc hóa chất khác. Không lau cân bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh.

4/. Cân điện tử là thiết bị đo có độ chính xác cao. Không được nhảy, dậm mạnh lên mặt cân hoặc tháo rời nó. Vui lòng xử lý cẩn thận để tránh bị vỡ khi di chuyển.

5/. Cân chỉ dành cho gia đình sử dụng và không phù hợp cho việc sử dụng chuyên nghiệp như cân hàng nặng. Trọng lượng cơ thể, BMI, BFR, Cơ bắp, Độ ẩm, Khối xương, BMR, Lượng mỡ nội tạng, Tỷ lệ protein, Tuổi cơ thể, Cân nặng tiêu chuẩn, Lượng mỡ cơ thể đo được chỉ mang tính tham khảo. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi bạn thực hiện bất kỳ chương trình ăn kiêng hoặc tập thể dục nào.

Cảnh báo: Mặt kính dễ bị trơn trượt khi có nước, do đó hãy chắc chắn rằng cả kính và chân bạn đều khô trước khi sử dụng. Không bao giờ bước lên cân khi bàn chân đang ướt.

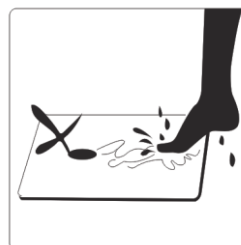

V. BẢO QUẢN




Sau khi sử dụng, vui lòng lau sạch mặt kính và đặt cân trở lại vào hộp.

Không bảo quản cân ở nơi ẩm ướt hoặc gần nguồn nhiệt, có thể gây ra cháy nổ.


VI. HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ QR SẢN PHẨM KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Cách 1: Quét mã QR bằng Zalo

- Mở ứng dụng Zalo.
- Click vào dấu (+)
- Click vào “Quét mã QR”

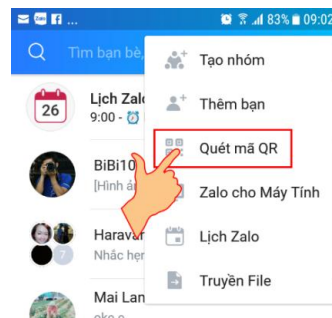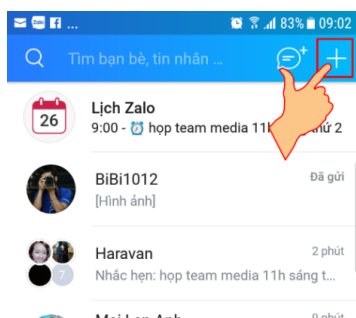
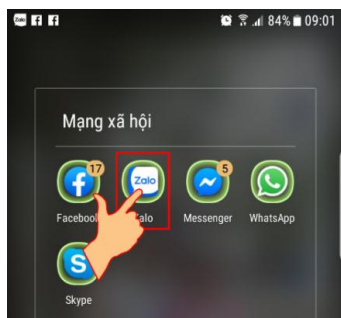


- Di chuyển vùng quét đến mã QR
- Click vào “Có” để chuyển hướng đến trang đăng ký bảo hành.

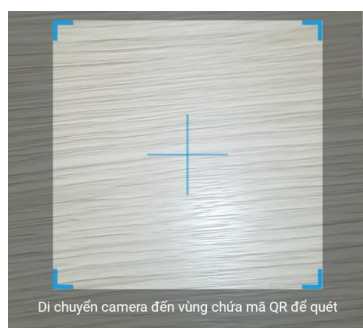

Cách 2: Quét mã QR trên Iphone với hệ điều hành iOS11


- Hướng dẫn kích hoạt chức năng quét mã QR bằng camera: Vào Settings (cài đặt) > Camera (máy ảnh) > Scan QR Code (quét mã QR).

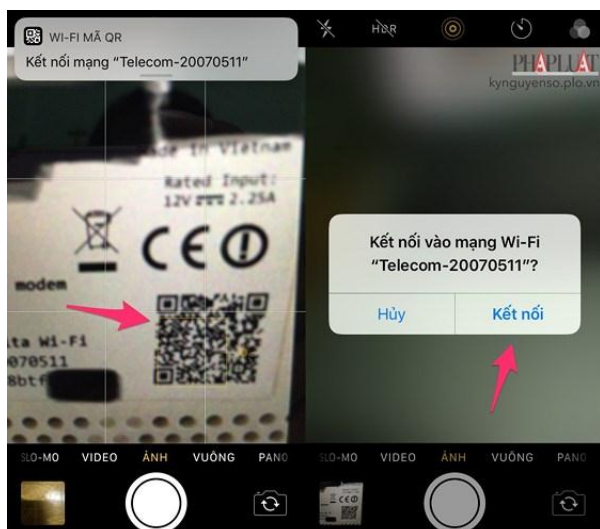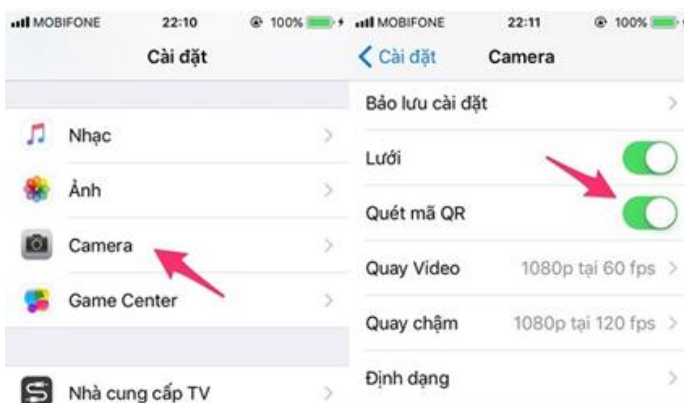

- Sau khi cài đặt xong bạn mở phần mềm chụp hình ra và chuyển camera đến mã QR sau đó bạn sẽ nhận được thông báo, bạn hãy click vào “Kết nối” và làm theo hướng dẫn.

Cách 3: Quét mã QR trên hệ điều hành Androi với Google Assistant

Hướng dẫn sử dụng Google Assistant trên Hệ điều hành Android

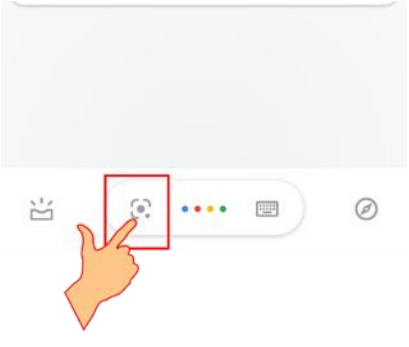Bấm giữ nút Home để mở ứng dụng Google Assistant và làm theo hình minh hoạ.	Sau khi click vào biểu tượng ống kính bên trên ứng dụng mở trình camera, di chuyển đến mã QR và click vào link theo hình.	Kích vào nút “Bắt đầu” và làm theo hướng dẫn.
		

VII. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ - ĐỔI MỚI

I. Quy định đổi trả

Quý Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi hàng/ trả lại hàng trong những trường hợp sau:

- Hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong đơn hàng đã đặt hoặc như trên website tại thời điểm đặt hàng.
- Không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn hàng.
- Sản phẩm không hoạt động.

Khách hàng có trách nhiệm trình giấy tờ liên quan chứng minh sự thiếu sót trên để hoàn thành việc hoàn trả/đổi trả hàng hóa.

II. Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả

- Thời gian thông báo đổi trả:** trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận sản phẩm đối với trường hợp sản phẩm thiếu phụ kiện, quà tặng hoặc bể vỡ.
- Thời gian gửi chuyển trả sản phẩm:** trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận sản phẩm.
- Địa điểm đổi trả sản phẩm:** Khách hàng có thể mang hàng trực tiếp đến văn phòng/cửa hàng của chúng tôi hoặc chuyển qua đường bưu điện.

Trong trường hợp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đường dây chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

III. Điều kiện đổi trả - đổi mới

Sản phẩm nguyên vẹn, không bị trầy xước, xước sát, móp méo, rơi vỡ, nứt, va đập, cháy chập, ẩm mốc hoặc hóa chất.

- Sản phẩm không bị mở sửa chữa bởi người dùng hoặc bên người thứ 3.
- Sản phẩm có đầy đủ chứng từ : phiếu giao hàng, phiếu bảo hành, hóa đơn VAT (nếu có), sách

hướng dẫn, Catalogue...)

- Hàng hóa được xác nhận bị lỗi kỹ thuật do kỹ thuật viên của cty kiểm tra.
- Sản phẩm còn nguyên hộp (hộp không móp méo, không rách nát, bao bì, xốp mút,...) đầy đủ các phụ kiện đi kèm như ban đầu, đầy đủ quà khuyến mãi (nếu có).
- Phụ kiện phải còn đầy đủ , nguyên vẹn.
- Nếu mất mát các phụ kiện hoặc khuyến mãi kèm theo hoặc vỏ máy bị trầy xước sẽ trừ phí tùy vào trường hợp của sản phẩm.

Lưu ý: Công Ty không chấp nhận đổi trả hàng trong các trường hợp sau:

- Quý khách muốn thay đổi chủng loại do ý thích chứ sản phẩm thật sự không bị lỗi gì hết.
- Quý khách vận hành không đúng chỉ dẫn gây hỏng hóc hàng hóa.
- Quý khách không thực hiện các quy định theo yêu cầu để được hưởng chế độ bảo hành (ví dụ không xuất trình phiếu bảo hành, chứng từ của cty khi đổi trả).
- Quý khách tự làm ảnh hưởng tình trạng bên ngoài như rách bao bì, trầy, xước, vỡ,...
- Hàng hóa đã được Quý khách kiểm tra, đồng ý mua nhưng sau đó Quý khách yêu cầu đổi trả hàng hóa vì lý do sai phạm về hình thức (trầy xước, móp méo, ổ vàng, vỡ...).
- Quý khách vui lòng kiểm tra hàng hóa và ký nhận tình trạng với Nhân viên giao hàng ngay khi nhận được hàng. Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, Quý khách có thể trao đổi trực tiếp với Nhân viên giao hàng hoặc phản hồi về ngay nhân viên tiếp nhận đơn hàng của khách hàng.

ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ TẠI NHÀ

I. Trường hợp miễn phí

1. Sản phẩm ghế Massage được hỗ trợ miễn phí tại nhà toàn quốc
2. Sản phẩm mới nhận được và bị lỗi do nhà sản xuất là sản phẩm công kênh thì bộ phận bảo hành sẽ cho kỹ thuật tới xử lý tận nhà miễn phí tại Hà Nội và TP HCM
3. Sản phẩm mới nhận được bị lỗi linh kiện bộ phận bảo hành sẽ gửi bù linh kiện miễn phí tới khách hàng.

II. Trường hợp tính phí

1. Lỗi do người sử dụng
2. Dịch vụ lắp đặt tại nhà

Chi phí đi lại ăn ở nếu có + chi phí nhân công 250k/nửa ngày - 500k/ngày.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

I. Điều kiện bảo hành:

- Phải xuất trình hóa đơn mua hàng hoặc đăng ký bảo hành điện tử
- Tất cả sản phẩm phải còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu tẩy xóa sửa đổi.
- Sản phẩm hư hỏng do lỗi nhà sản xuất.
- Đối với các sản phẩm không sử dụng điện đổi mới trong 7 ngày mua hàng nếu có lỗi nhà sản xuất
- Đối với các sản phẩm sử dụng điện bảo hành 18 tháng bảo hành miễn phí nếu có lỗi nhà sản xuất
- Đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như cân, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, nôi chiên không dầu bảo hành 24 tháng

II. Những trường hợp từ chối bảo hành:

1. Sản phẩm đã hết hạn bảo hành hoặc không có phiếu bảo hành của Công ty.
2. Sản phẩm không còn nguyên vẹn về mặt vật lý, bị rơi rớt, bị va chạm, bị cháy nổ, có dấu vết người dùng tự ý sửa chữa
3. Sản phẩm bị thiên tai, sét đánh, lũ lụt, hỏa hoạn, virus tin học, côn trùng, động vật phá hỏng, môi trường ẩm bị Oxy hóa, bị đất cát nước vào, do vận chuyển không đúng cách.

4. Sử dụng sai nguồn điện hay không đúng cách
5. Không bảo hành các phụ kiện kèm theo như quà tặng.. phụ kiện linh kiện đi kèm theo sản phẩm tùy vào từng sản phẩm.

****Chú ý: Khách hàng phải thanh toán chi phí vận chuyển nếu có.***

III. Thời gian nhận bảo hành

- Thời gian nhận bảo hành: từ 8H đến 17H từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ CN và các ngày lễ, tết).
- Hotline : 1900.1738

IV. Thời gian hoàn trả bảo hành

- Tất cả các sản phẩm của Công Ty cung cấp được bảo hành miễn phí khi khách hàng mang đến Công Ty đảm bảo có đầy đủ phiếu bảo hành của máy còn trong thời gian bảo hành theo quy định.
 - Thời gian giải quyết bảo hành từ 5 – 7 ngày kể từ ngày nhận trừ ngày chủ nhật, các ngày lễ và tùy từng trường hợp hư hỏng.
1. Trong trường hợp thiết bị lỗi nhẹ thời gian hoàn trả từ 5 đến 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận bảo hành.
 2. Trong trường hợp thiết bị lỗi nặng cần phải đợi linh kiện để thay thế thì gian hoàn trả thiết bị không quá 4 tuần(28 ngày) làm việc kể từ ngày nhận bảo hành.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Miền Nam: 12/9 khu phố Tây, Quốc lộ 13, Vĩnh Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương

Miền Bắc: Thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội

Hotline: 1900 1738

Website: www.KachiVietnam.com