



Ghé thăm chúng tôi tại:

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

©2024 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A APR 7



PHILIPS

Máy Massage
Đai Bụng

Máy Massage Đai Bụng

PPM4371



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mục Lục

1	Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng	1	7	Hướng xử lý lỗi	9
	Mô tả biểu tượng	1			
	Đối tượng phù hợp	1	8	Thông số kỹ thuật	11
	Lưu ý khi sử dụng	2			
	Các biện pháp bảo trì an toàn	3	9	Hướng dẫn dịch vụ bảo hành sản phẩm	12
				Bảo hành và dịch vụ	12
				Phiếu bảo hành	13
2	Tính năng sản phẩm	3			
3	Chi tiết sản phẩm	4	10	Danh sách đóng gói	13
4	Hướng dẫn sử dụng	5			
	Lưu ý trước khi sử dụng	5			
	Thao tác sử dụng	5			
	Hướng dẫn sạc	6			
5	Mô tả đèn báo và màn hình	7			
6	Bảo trì sản phẩm	8			
	Vệ sinh	8			
	Phương pháp xử lý pin	8			

1 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và bảo quản cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm.

Mô tả biểu tượng

Để tránh nguy cơ chấn thương cá nhân hoặc hư hỏng thiết bị, hãy tuân thủ các nội dung sau:

- Các biểu tượng dưới đây được sử dụng để minh họa những điều cần lưu ý khi sử dụng thiết bị.



BIỂU TƯỢNG CẤM



BIỂU TƯỢNG LÀM THEO CHỈ DẪN

Những đối tượng cần thận trọng khi sử dụng sản phẩm:



Sản phẩm cần được sử dụng cẩn thận với các nhóm đối tượng sau:

- Phụ nữ đang mang thai hoặc vừa mới sinh con.
- Người đã được chẩn đoán mất khả năng cảm nhận nhiệt độ.
- Bệnh nhân tiểu đường có dấu hiệu rối loạn cảm giác.
- Người có thân nhiệt vượt quá 38°C (trong thời kỳ sốt).
- Người bị rối loạn cảm giác da hoặc có vết thương trên da.
- Người đang sử dụng thiết bị điện tử y tế cấy trong cơ thể, chẳng hạn như máy tạo nhịp tim.
- Người đang điều trị y tế, đặc biệt là những người có bất thường về thể chất.
- Người bị chấn thương vùng thắt lưng, hoặc có di chứng liên quan đến thắt lưng do tai nạn giao thông hay nguyên nhân tương tự.
- Bệnh nhân ung thư ác tính, bệnh tim, huyết áp cao, hoặc đang bị bệnh cấp tính.
- Người có kim loại, silicone hoặc vật liệu nhựa được cấy ghép trong cơ thể do gây xương hoặc phẫu thuật thẩm mỹ.
- Người bị loãng xương, gãy xương nghiêm trọng, bong gân, đau cơ hoặc đau đầu cấp tính.

- ⊘ Không được sử dụng sản phẩm trong các trường hợp sau:
- Không để người thiếu năng trí tuệ hoặc trẻ em tự ý sử dụng sản phẩm.
 - Trẻ em chỉ nên sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát của người lớn.

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm:

- ❗ Khuyến nghị sử dụng cấp độ 1 (Gear 1) cho chế độ chườm nóng và nhào bóp vùng bụng trong giai đoạn đầu khi mới sử dụng sản phẩm.
 - ❗ Khi không sử dụng chức năng massage, mỗi lần đeo thiết bị không nên vượt quá 30 phút. Khi bật chế độ massage, nên sử dụng tối đa 15 phút/lần.
 - ❗ Hãy kiểm tra tình trạng vùng bụng và điều chỉnh số lần sử dụng phù hợp.
 - ❗ Sau khi sử dụng, vùng da bụng có thể hơi đỏ trong thời gian ngắn. Đây là hiện tượng bình thường. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc không cải thiện, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.
 - ❗ Trong quá trình sử dụng, nếu bạn thấy khó chịu hoặc có dấu hiệu bất thường trên cơ thể, hãy ngưng sử dụng ngay và tham khảo bác sĩ.
 - ❗ Không nên lạm dụng chức năng massage.
- Chỉ sử dụng sản phẩm trong môi trường có nhiệt độ từ 5°C đến 35°C.
- ⊘ Tuyệt đối không được đứng hoặc ngồi lên sản phẩm.
 - ⊘ Không sử dụng sản phẩm trong môi trường ẩm ướt để tránh rò điện, có thể gây tai nạn.


Lưu ý khi bảo quản sản phẩm:

- ❗ Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin mỗi tháng một lần.
- ❗ Khi vệ sinh, cần rút bộ sạc khỏi ổ điện gia đình.
- ❗ Vứt bỏ bao bì đúng cách và để xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- ❗ Sản phẩm có chứa pin lithium. Không được tự ý tháo rời, sửa chữa, nhúng vào nước hoặc đốt cháy, vì có thể gây hư hỏng hoặc cháy nổ.
- ⊘ Không để sản phẩm trong tầm với của trẻ nhỏ. Không cho trẻ chạm hoặc sử dụng sản phẩm, vì có thể gây bong, điện giật hoặc chấn thương.
- ⊘ Không làm hỏng, uốn cong mạnh, kéo hoặc bóp cáp sạc. Không để vật nặng đè lên cáp hoặc sử dụng nơi có nhiệt độ trên 35°C hoặc ánh nắng trực tiếp.

2 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm kết hợp chức năng massage xoay với đá Bian và chườm nóng, giúp giảm khó chịu vùng bụng. Có nhiều mức nhiệt và chế độ massage để lựa chọn, phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng để thư giãn vùng bụng.


3 Chi tiết sản phẩm

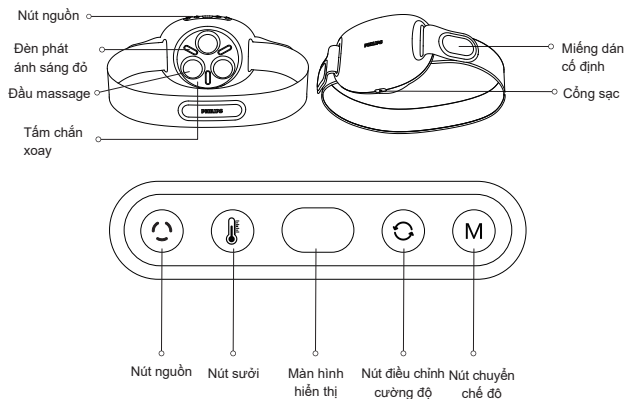

4 Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý trước khi sử dụng

1. Trước khi đeo sản phẩm, vui lòng tháo bỏ các phụ kiện như thắt lưng.
2. Đặt thiết bị lên vùng bụng, canh giữa thiết bị với rốn (có thể thoa một lượng vừa đủ tinh dầu trước khi sử dụng). Quấn dây đeo quanh cơ thể một vòng. Luồn đầu dây còn lại vào lỗ cố định, dán chặt và điều chỉnh sao cho phù hợp với vòng eo của người dùng.

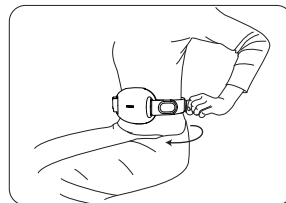

Thao tác sử dụng

1. Bật/Tắt nguồn

- 1) Nhấn và giữ nút nguồn trong 1 giây để bật hoặc tắt thiết bị. Khi bật, thiết bị sẽ phát ra tiếng "bíp", biểu tượng sưởi sẽ nhấp nháy và biểu tượng chế độ sẽ hiển thị. Chế độ mặc định khi khởi động: Nhiệt độ cấp 1 + Massage xoay cấp 1 + Đèn đỏ bật.
- 2) Thiết bị sẽ tự động tắt sau 15 phút sử dụng. Khi tắt, thiết bị cũng sẽ phát ra tiếng "bíp". Việc chuyển đổi chế độ trong lúc hoạt động sẽ không ảnh hưởng đến thời gian hẹn giờ.

- 3) Nhấn và giữ nút nguồn trong 1 giây để tắt thiết bị. Khi đó, thiết bị sẽ phát ra tiếng "bíp", tất cả chức năng và đèn báo sẽ tắt.

2. Chế độ chườm nóng

Nhấn nút sưởi để chuyển đổi các mức nhiệt độ. Thiết bị sẽ chuyển lần lượt theo thứ tự:

Cấp 1 (38°C) → Cấp 2 (40°C) → Cấp 3 (42°C) → Tắt chườm nóng

Mỗi thao tác chuyển đổi sẽ đi kèm âm thanh "bíp" từ thiết bị.

3. Chế độ đèn ánh sáng đỏ

Nhấn nhanh nút nguồn để bật/tắt chức năng ánh sáng đỏ. Khi thao tác, thiết bị sẽ phát ra tiếng “bíp”.

4. Điều chỉnh cường độ

Nhấn nhanh nút điều chỉnh cường độ để thay đổi cấp độ tốc độ xoay. Các cấp độ sẽ luân phiên theo thứ tự:

Cấp 0 → Cấp 1 → Cấp 2 → Cấp 3

5. Điều chỉnh chiều xoay massage vùng bụng

Nhấn nhanh nút chế độ để thay đổi hướng xoay của đầu massage. Hướng xoay sẽ thay đổi theo thứ tự:

Xoay ngược → Xoay xuôi

Mỗi thao tác sẽ được xác nhận bằng tiếng “bíp” từ thiết bị.

Sạc pin


1. Cắm đầu cáp sạc vào cổng sạc bên hông bộ điều khiển.

Sản phẩm hỗ trợ nhiều hình thức sạc như:

Cổng USB của máy tính

Pin sạc dự phòng

Adapter sạc 5V=2A (adapter không đi kèm sản phẩm)

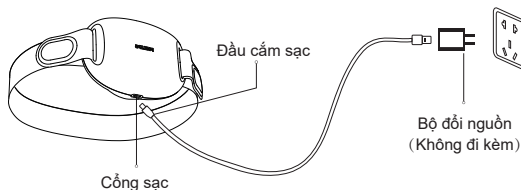

Hướng dẫn sạc

1. Khi pin còn dưới 99%, ba đèn báo pin sẽ nhấp nháy luân phiên (chế độ chạy đèn marquee).

2. Trong quá trình sạc, các đèn pin nhấp nháy lần lượt.

3. Khi pin đã đầy, các đèn pin sẽ sáng cố định.

4. Khi sạc đầy hoàn toàn, cả ba đèn báo pin đều sáng liên tục.

Thời gian sạc đầy khoảng 4 tiếng

5. Không bật hoặc sử dụng thiết bị trong khi đang sạc.

5 Mô tả đèn báo và màn hình

Tình trạng pin (hiển thị qua đèn báo)

Đèn báo pin	Trạng thái	Mô tả
1 đèn sáng	Sáng liên tục	Pin còn lại dưới 10%
2 đèn sáng	Sáng liên tục	Pin còn lại từ 10% – 70%
3 đèn sáng	Sáng liên tục	Pin còn lại từ 71% – 99%
3 đèn chạy luân phiên	Chạy đèn (Marquee)	Đang sạc, pin dưới 99%
3 đèn chạy	Sáng liên tục	Pin đã sạc đầy

Màn hình hiển thị chế độ chườm nóng / massage

Màn hình hiển thị	Mô tả
Biểu tượng sưởi + Nhấp nháy số 1	Chế độ chườm nóng cấp 1
Biểu tượng sưởi + Nhấp nháy số 2	Chế độ chườm nóng cấp 2
Biểu tượng sưởi + Nhấp nháy số 3	Chế độ chườm nóng cấp 3
Biểu tượng xoay + Nhấp nháy số 1	Tốc độ xoay cấp 1
Biểu tượng xoay + Nhấp nháy số 2	Tốc độ xoay cấp 2
Biểu tượng xoay + Nhấp nháy số 3	Tốc độ xoay cấp 3
Biểu tượng xoay ngược	Xoay ngược chiều kim đồng hồ
Biểu tượng xoay xuôi	Xoay theo chiều kim đồng hồ

6 Bảo trì sản phẩm

Vệ sinh

1. Trước khi vệ sinh, hãy đảm bảo công tắc nguồn đã được tắt và rút dây sạc ra khỏi cổng sạc.
2. Bộ điều khiển cần được bảo vệ cẩn thận. Khi vệ sinh màn hình hiển thị, hãy dùng khăn mềm lau nhẹ nhàng.
3. Khu vực vải có thể vệ sinh bằng nước. Khi cần làm sạch, bạn có thể lau hoặc xả nước sạch, sau đó phải làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.
4. Khi vệ sinh phần vải, hãy tháo rời các bộ phận massage bên trong để tránh nước xâm nhập làm hư hỏng linh kiện điện tử.
5. Không sử dụng các dung dịch tẩy rửa có tính ăn mòn như cồn, xăng thơm, dung môi, xăng dầu... để làm sạch sản phẩm. Những chất này có thể làm phai màu, ăn mòn và gây nứt vỡ sản phẩm.



- ❗ Khi vệ sinh sản phẩm, hãy rút dây sạc ra trước, nhưng tuyệt đối không được rút dây sạc bằng tay ướt.

Phương pháp xử lý pin

Pin lithium-ion được sử dụng trong sản phẩm này là nguồn tài nguyên có thể tái chế. Khi bạn không sử dụng sản phẩm nữa, hãy tháo pin lithium-ion và gửi đến các đơn vị chuyên thu gom và tái chế pin sạc đúng quy định để xử lý an toàn cho môi trường.

Các bước tháo pin:

Tháo vỏ sản phẩm.

Nới lỏng các vít của bo mạch và lấy bo mạch ra.

Cắt dây kết nối pin và quấn đầu dây bằng băng keo cách điện.

- ❗ Không tự ý thay pin.
- ❗ Trước khi thải bỏ sản phẩm, hãy tháo pin ra.
- ❗ Trước khi tháo pin, cần ngắt nguồn điện.
- ❗ Pin cần được xử lý đúng cách, an toàn với môi trường.

7 Hướng xử lý lỗi

Bảng dưới đây liệt kê những lỗi phổ biến khi sử dụng sản phẩm. Nếu sự cố bạn gặp phải không nằm trong bảng này, vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ kỹ thuật hoặc trung tâm bảo hành gần nhất.

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
Sản phẩm không khởi động	Pin đã hết	Vui lòng sạc thiết bị
	Sản phẩm vẫn còn đang cắm sạc	Tháo dây sạc ra khỏi thiết bị
Đèn báo sạc không sáng	Dây sạc USB cắm chưa đúng	Kiểm tra và cắm lại đúng vị trí
Thiết bị chỉ dùng được vài phút sau khi sạc	Tuổi thọ pin đã hết (khoảng 5 năm)	Liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ thay pin (Không tự ý thay pin)
Thiết bị không làm nóng	Sử dụng trong môi trường ngoài mức nhiệt cho phép	Dùng trong môi trường nhiệt độ từ 5°C đến 35°C
Thiết bị tự ngừng hoạt động khi đang dùng	Pin yếu	Vui lòng sạc thiết bị
	Thiết bị đã tự động tắt sau 15 phút hẹn giờ	Nếu muốn sử dụng tiếp, vui lòng khởi động lại

Nếu sản phẩm không được sử dụng trong thời gian dài, hãy chắc chắn kiểm tra kỹ trước khi dùng lại để đảm bảo chức năng hoạt động bình thường		
Kiểm tra định kỳ	Kiểm tra các lỗi sau	
	- Dây nguồn hoặc phích cắm có bị nóng không. - Dây nguồn có bị trầy xước, biến dạng nặng hoặc có mùi khét không. - Có tiếng ồn bất thường hoặc rung lắc trong quá trình vận hành. - Sau khi bật công tắc, thiết bị không hoạt động bình thường. - Có lỗi hay hiện tượng bất thường nào khác không.	Nếu xảy ra các hiện tượng trên, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và rút nguồn điện để tránh tai nạn. Hãy gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành của công ty để được sửa chữa.

Lưu ý:

Nếu không thể khắc phục sự cố hoặc thiết bị vẫn không hoạt động ổn định, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành. Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm.

8 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy Massage Bụng Philips
Model	PPM4371
Điện áp hoạt động	11.1V ---
Công suất hoạt động	12W
Điện áp sạc	5V ---
Dòng sạc	2A
Kích thước sản phẩm	190×142×96mm
Trọng lượng	Khoảng 770g
Dung lượng pin	1000mAh
Cổng sạc	Type-C
Nguồn điện	Pin tích hợp bên trong

9 Hướng dẫn dịch vụ bảo hành sản phẩm

Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng truy cập: www.philips.com/support hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng tại quốc gia /khu vực của bạn.

Nếu không có trung tâm chăm sóc khách hàng tại quốc gia/ khu vực của bạn, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương.

Trong vòng hai (2) năm kể từ ngày mua hàng, bạn sẽ được bảo hành miễn phí đối với các hư hỏng do lỗi sản xuất hoặc hư hỏng linh kiện trong điều kiện sử dụng bình thường, được xác nhận bởi nhân viên bảo trì của chúng tôi.

Bảo hành không bao gồm các vật tư tiêu hao thay thế thường xuyên, thiết bị phụ trợ, chi phí vận chuyển và dịch vụ giao – nhận tận nơi.

Vui lòng xuất trình hóa đơn mua hàng cho nhân viên bảo hành khi cần sửa chữa.

Việt Nam
Chăm sóc khách hàng: +84-909800829
Email: Philips.massager.VN@orrohome.vn

Phiếu bảo hành

Mã sản phẩm		Tên khách hàng	
Nơi mua hàng		Số điện thoại	
Ngày mua hàng		Địa chỉ	
Dịch vụ bảo hành			
Nội dung bảo hành	Ngày bảo hành	Nhân viên bảo hành	

10 Danh sách đóng gói

Máy chính	1×	Sách hướng dẫn sử dụng	1×
Cáp sạc Type-C	1×	Dây đai	1×
Hướng dẫn nhanh	1×		
Túi chống bụi	1×	Túi đựng hướng dẫn sử dụng	1×